

Abbott ID NOW™ INFLUENZA A & B 2 KURZANLEITUNG

tarten eines Tests:

Gerät:



Test-basis



Probenempfänger



Transfer-kassette



Nasentupfer

Halterung des Probenempfängers

Halterung der Testbasis



Ein externer positiver und ein steriler Tupfer für die Negativkontrolle müssen einmal bei jeder neuen Lieferung und einmal für jeden ungeschulten Anwender getestet werden.


Für QK-Tests "QK-Test starten" auf der Startseite wählen und die angezeigten Anleitungen befolgen. Weitere Informationen hierzu sind unter "Durchführung eines QK-Tests" im Benutzerhandbuch des Geräts ID NOW Instrument zu finden.

1 "QK-Test starten" drücken.

2 Wählen Sie im Menü "Influenza A & B" aus.

3 Durchzuführenden QK-Test wählen.

4 Test bestätigen
Mit "OK" den Testtyp bestätigen, der zu der zu testenden QK-Probe passt, und die Bildschirmaufforderungen zur Durchführung des Testvorgangs befolgen.

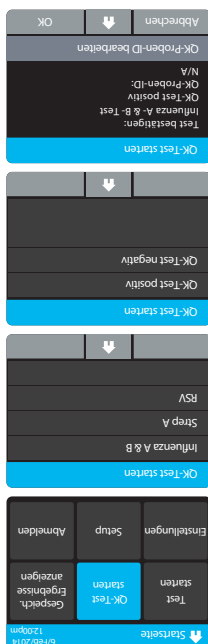

PROBENTNAHME und -HANDABUNG

Zur Erzielung optimaler Testergebnisse frische Proben verwenden. Eine unsachgemäße Probenentnahme, -handhabung, -lagerung oder ein unsachgemäßer Probenentransport kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

Nasabstrich

Zur Entnahme eines Nasabstrichs den Tupfer vorsichtig in das Nasenloch mit dem erkennbar stärkeren Sekretionsfluss oder in das stärker verstopfte Nasenloch (bei Abwesenheit von Sekretion) einführen. Unter vorsichtigem Drehen den Tupfer vorschieben, bis auf Höhe der Nasenmuschel Widerstand spürbar ist (weniger als 2,5 cm im Nasenloch). Den Tupfer mehrfach gegen die Nasenwand drehen und dann langsam aus dem Nasenloch ziehen.

Nasopharyngeal-Abstrich

Zur Entnahme eines Nasopharyngeal-Abstrichs den Tupfer vorsichtig in das Nasenloch mit dem erkennbar stärkeren Sekretionsfluss oder in das stärker verstopfte Nasenloch (bei Abwesenheit von Sekretion) einführen. Den Tupfer direkt nach hinten führen, ohne dabei mit der Tüferspitze oben oder unten anzutippen. Der Nasengang verläuft parallel zum Boden, nicht parallel zum Nasenrücken. Den Tupfer unter vorsichtigem Drehen in die anteriore Naris parallel zum Gaumen oder unter anzuheben. Den Tupfer langsam drehen und dabei in den Nasopharynx vorschieben, ein paar Sekunden verweilen lassen und dann den Tupfer langsam drehen und dabei herausziehen. Um die sachgemäße Probenentnahme zu gewährleisten, den Tupfer eine Strecke vorschieben, die der Hälfte des Abstands von der Nase zur Spitze des Ohrs entspricht. Das entspricht ungefähr der halben Länge des Tüfers. Beim Einführen des Tüfers **KEINE KRAFT ANWENDEN**. Den Tupfer etwas zurückziehen, ohne ihn aus dem Nasenloch zu nehmen. Dann die Rückseite des Tüfers anheben und nach vorne in den Nasopharynx bringen.

Technischer Kundendienst Hotline

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner oder wenden Sie sich an den technischen Kundendienst über:

USA
+1 855 731 2288
tsa.sc@abbott.com
EMEA
+44 161 483 9032
EMEAproductsupport@abbott.com
Asien-Pazifik
+61 7 3363 7711
APproductsupport@abbott.com
Kanada
+1 800 818 8335
CANproductsupport@abbott.com
Europa und Naher Osten
+44 161 483 9032
EMEAproductsupport@abbott.com
Lateinamerika
+57 (1) 4824033
LATproductsupport@abbott.com

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.abbott.com/post



Hinweis: Der QK-Test wird auf dieselbe Weise wie ein direkter Nasenabstrich-Patiententest durchgeführt. Die schriftweisen Anweisungen befinden sich auf der Rückseite.

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

Software © 2020. Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

IN427001de Rev.6 2020/05

KOMPLEXITÄT NACH CLIA: BEFREIT

Die vollständigen Anweisungen sind in der ID NOW Influenza A & B 2 Gebrauchsinformation und im Benutzerhandbuch zu finden.

INFLUENZA A & B 2

KURZANLEITUNG

Die vollständigen Testverfahren und zusätzliche Informationen sind in der ID NOW Influenza A & B 2 Gebrauchsinformation und im Benutzerhandbuch zu finden.

Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen auf dem Gerätebildschirm.

1



2

15°C → 30°C



3

15°C → 30°C



4



4a



4b







5



6



7

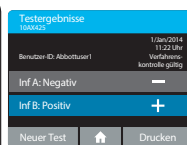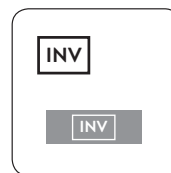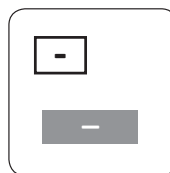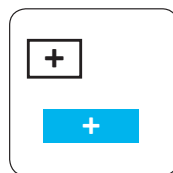

Das Verfahren für erneutes Testen bei sowohl Grippe-A- als auch Grippe-B-positiven oder ungültigen Testergebnissen ist in den Anweisungen der Gebrauchsinformation beschrieben.

8



Die Anweisungen zum sicheren Umgang und zur Entsorgung der Proben und Testkomponenten sind in der Gebrauchsinformation zu finden.

Abbott ID NOW Influenza A & B 2 QRI, DE Size: 8.5 in. x 11 in.	Printed Colors  CMYK	PN: IN427001de Rev: 6 Date of Last Revision: 6.1 2020/05/11
	Incoming Inspection Colors (For Reference Only) Colors below are not used for printing  PMS 2995 U Primary Blue  PMS 303 U Dark Blue  PMS 297 U Light Blue	