



DIGITALES DERMATOSKOP

DE300

Bedienungs- anleitung



DANKE, DASS SIE EIN FIREFLY DERMATOSKOP GEWÄHLT HABEN

Um die kompletten Vorteile von diesem fortgeschrittenen Produkt Fähigkeiten zu haben, und dieses Produkt sicher zu benutzen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch.

Hergestellt von FIREFLY GLOBAL – 464 COMMON ST, #281, BELMONT, MA 02478, USA

Kopierschutz 2020 von Firefly Global. Alle Rechte sind reserviert. Niemand darf diese Anleitung oder Teile davon in irgendeiner Form, erneuern oder verdoppeln, ohne Erlaubnis von Firefly Global (www.fireflyglobal.com).

Firefly Global ist nicht haftbar für irgendwelche Verletzungen, oder für irgendeinen illegales oder unpassendes verwenden, von diesem Produkt, kommen daher, dass die Anweisungen Warnungen oder Anhaltspunkte dieser Anleitung ignoriert wurden.

Die Software in diesem Produkt gehört Firefly Global und seinen Verkäufern. Alle Rechte, sind reserviert. Die Software wird von dem internationalen Kopierschutz und von U.S. geschützt, und hat international Vereinbarungen, die weltweit gültig sind. Wegen, solcher Vereinbarungen, ist der Lizenzbesitzer in der Lage, die Kopie von der eingebauten Software mit diesem Gerät verbunden sind, die in dieser Anleitung verwendet werden. Diese Software, darf nicht kopiert, dekompiert, zerlegt, oder auf eine andere Art und Weise zu einer, menschlich wahrnehmbarer Form reduziert werden. Dies ist kein Verkauf der Software oder irgendeine Kopie der Software; alle Rechte, Titel, und Besitzansprüche der Software gehören, Firefly und/oder seinen Verkäufern.

Vorsicht: Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Firefly Global bestätigt wurden, wird die Erlaubnis des Käufers für nichtig erklärt, sowie diese Ausstattung und seine Garantie zu benutzen.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Tested To Comply
With FCC Standards
For Home or Office Use

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Warnung	5
Sicherheitshinweise	5
Checkliste	7
Nomenklature	8
Die Software Anwendung aufbauen:	9
Mit dem PC verbinden:	9
Schalte das Gerät an:	10
Empfohlene Haltungsposition:	10
Hoher-Zoom benutzen:	11
Fokus:	11
Helligkeitsanpassung:	12
Die Bilderfassungskontrolle benutzen:	12
Den Polarisator benutzen:	13
Standby und das Gerät entfernen:	13
Wartung unnd service	14
Reinigungsempfehlung:	14
Recyclen der Systemkomponenten	14
Dienstleistungsrichtlinien	15
Spezifikationen	16
Beschränkte Garantie	17
Fehlerbehebung	20

EINLEITUNG

Das Firefly Dermatoskop System besteht aus einem digitalen Dermatoskop, einer Software Anwendung und einem USB-Kabel. Nur eine Computerausrüstung mit einem freien USB-Anschluss wird für dieses System benötigt.

Das Firefly Dermatoskop System, wurde für ein effektives Operieren, unter verschiedenster, Bedingungen und typischen Video Parametern als Faktor eingestellt.

Das System ist mit einem Polarisator Ring ausgestattet. Die Drehung des Rings, ermöglicht mehrere Polaristionsgrade, für die Otokop-Anwendungen. Das System, ist auch mit einem feinen Fokussierrad ausgestattet, welcher kristallklare Bilder, bei sehr hoher Vergrößerung ermöglicht.

System Anforderungen

Das Firefly Dermatoskop System, benötigt ein Smartphone oder ein PC-System, dass ein Windows7 oder ein älteres System hat, ein Bildschirm, und ein PC mit einem USB 1.1. oder 2.0 Anschluss.

Vorhergesehene Anwendung

Das Firefly Dermatoskop System, ist für die Inspektion von der Haut und dem Haar, unter der Vergrößerung vorgesehen.

Benutzerprofil

Das Firefly Dermatoskop System wird für folgende Verwendung vorhergesehen so wie:

- Medizinische Untersuchungen
- Tierärztliche Untersuchungen
- Medizinische und Wissenschaftliche Bildung
- Fernmedizin
-

Garantie-Registrierung

Registrieren Sie ihr Firefly Gerät innerhalb von zwei Wochen, nach dem Kauf auf <http://www.fireflyglobal.com/warranty-registration/> und bewahren Sie Ihre Originalquittung auf.

Produkt Unterstützung

Bitte besuche den FAQ Bereich von unserer Internetseite auf <http://www.fireflyglobal.com> für die neuesten Fehlerbehebungsinformation und zusätzlicher Unterstützung. Sie können uns auch auf support@fireflyglobal.com von Montag bis Freitag bis um 5:30 PM Western Zeit kontaktieren.

Warnungen & Vorsicht

Bitte machen Sie, das gesamte Bedienungspersonal, mit den allgemeinen Sicherheitsinformationen in dieser Zusammenfassung vertraut. Spezifische Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, können in dieser Anleitung gefunden werden.

Warnung



Ein Warnhinweis in diesem Handbuch, kennzeichnet eine Bedingung oder Praxis, welche nicht sofort korrigiert oder eingestellt wird, zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen kann.

- Nicht in Gegenwart, von entflammenden Anästhetika verwenden.
- Dieses Produkt, hat keine vom Benutzer zu wartenden/auswechselbaren Teile. Bitte wenden Sie sich für jegliche Wartungsarbeiten an autorisiertes Servicepersonal.
- Dieses Instrument ist nicht zur Verwendung am Auge bestimmt.

Sicherheitshinweise



Ein Sicherheitshinweis in diesem Handbuch, weist auf Zustände oder Praktiken hin, die, wenn sie nicht sofort korrigiert oder eingestellt werden, zu Geräteausfällen, Geräteschäden oder Datenverlust führen können.

- Um eine optimale Leistung zu erzielen und die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten, lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Firefly- Dermatoskop nicht, wenn Sie Anzeichen von Schäden an einzelnen Komponenten des Systems feststellen. Kontaktieren Sie den Kundendienst für sofortige Hilfe.
- Versuchen Sie nicht, das Firefly Dermatoskop-System, mit Glutaraldehydprodukten, Ethylenoxidgas, Dampf oder anderen flüssigen oder gasförmigen Desinfektionsmitteln zu desinfizieren.
- Der Single Ausgang (USB-Anschluss) verbindet nur Geräte mit IEC 60601-1, oder mit anderen IEC Standard (wie zum Beispiel, IEC 0950), wie passend zu


dem Gerät. Andere Dienste mit dem Firefly Dermatoskop zu verbinden, ist, nicht erlaubt.



- Dieses Produkt, entspricht mit den benötigten Standards, für Elektromagnetische Indifferenz und sollte nicht von anderer Ausstattung beeinflusst werden. Als eine Vorsichtsmaßnahme, sollte es vermieden werden, es nicht in der Nähe, von einer anderen Ausrüstung verwendet zu werden.
- Tragen Sie keinen Alkohol, Chemikalien oder Wasser auf die Linse. Jede Flüssigkeit, die in die optische Montage gelangt, wird die inneren Komponenten schädigen.

CHECKLISTE

Bevor Sie mit dem Betrieb beginnen, überprüfen Sie, ob alle folgenden Artikel in Ihrem Produkt enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

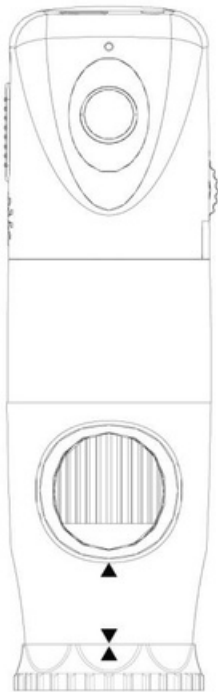

Dermatoskop



Skop Abstandshalter




USB Kabel



Klip

·
·
·

NOMENKLATURE

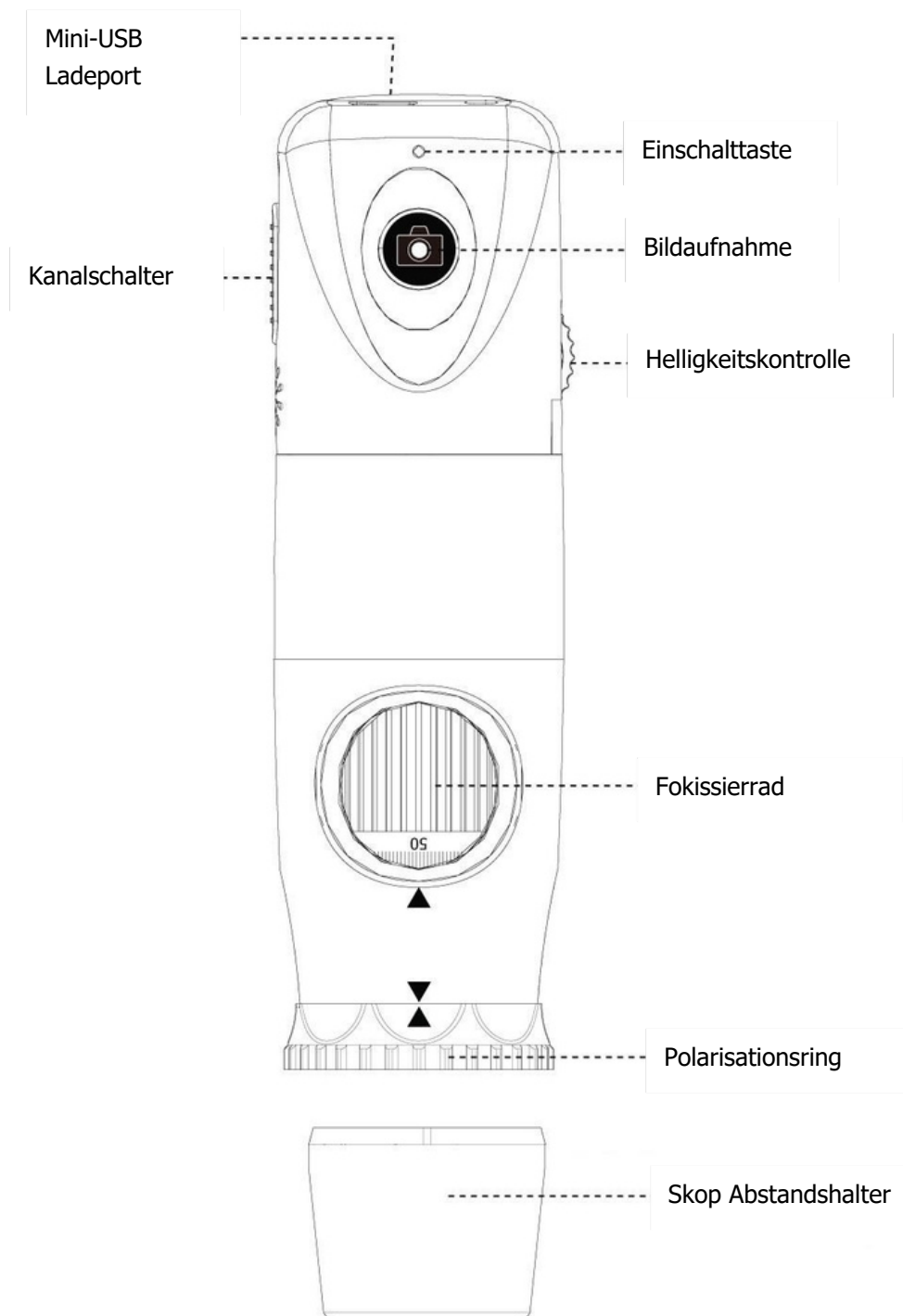

OPERATION

Um ein klares Bild zu erhalten, halten sie die Firefly Dermatoskop, stillhalten und Vibrationen so gut wie möglich während der Beobachtung vermeiden.


Die Software Anwendung aufbauen:

Bevor man das Firefly Otokop zum ersten mal benutzt, lade die Software von der Firefly Internetseite auf dem folgenden Link herunter: www.fireflyglobal.com/downloads

Installiere die FireflyPro Software, folge den Anleitungen auf der Internetseite. Es sind Versionen für Windows und Mac erhältlich. Die Software ist selbsterklärend und einfach zu benutzen.

Mit dem PC verbinden:


Verbinde das Firefly Dermatoskop mit dem PC USB-Anschluss

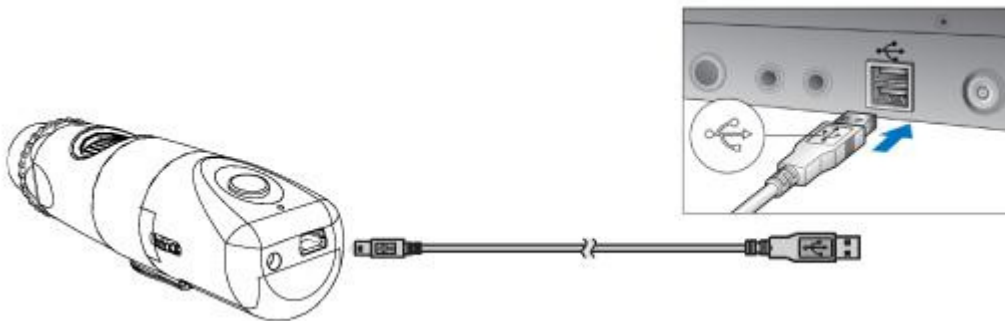

Schalte das Gerät an:


Auf der Rückseite des Gerätes, erlaubt ein Schalter dem Benutzer das Gerät anzuschalten und das LED zu aktivieren.

- OFF: Einschalttaste des Gerätes
- ON: Einschalttaste des Gerätes ON
- LED: Schalte das Gerät ein und aktiviere die 8 LEDs, für eine maximale Beleuchtung
-

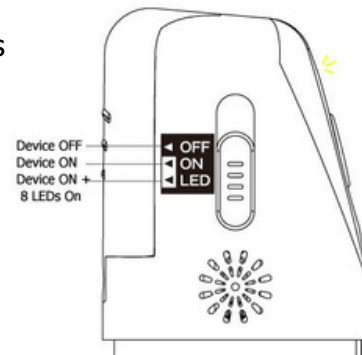


Empfohlene Haltungspostion:

Es wird empfohlen das Dermatoskop die transparente Abdeckung nach vorne zu halten, mit dem Daumen die Ausstattung zu halten. Diese Haltungspostion, bietet eine relative Stabilität und erlaubt es die Linse zu kontrollieren. Der Zeigefinger ist immer noch frei um es zu rotieren und das Fokussierad anzupassen. (Wie unten, gezeigt wird).

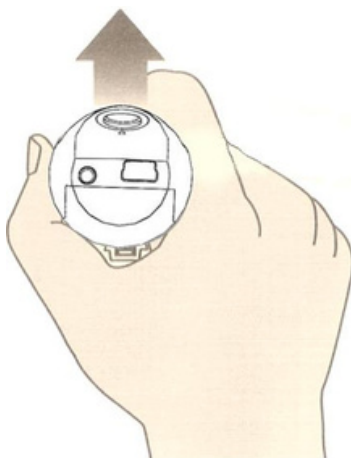

Hoher-Zoom benutzen:


Wenn ein hoher zoom benötigt wird, ist eine Stabile Haltung umso wichtiger. In einem solchem Fall, wird empfohlen, dass digitale Dermatoskop Fokussierrad in Richtung des Benutzers zu richten, und das transparente Abdeckung senkrecht nach unten. Dies erlaubt einen einfachen Zugang, um das Fokussierrad und eine sehr stabile Possition. (Wie unten gezeigt)

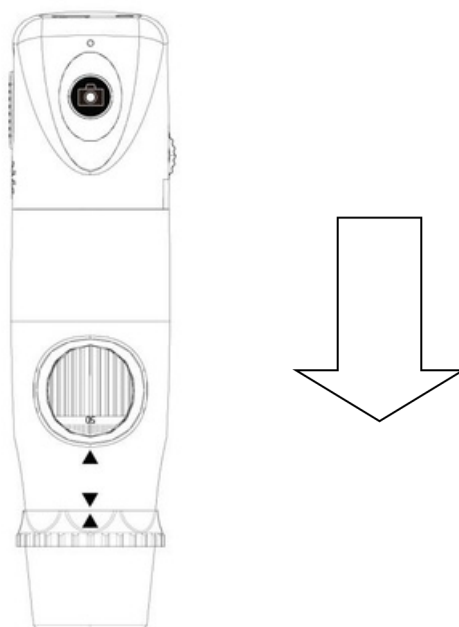

Das Gerät senkrecht nach unten (stabile Überwachung)

Fokus:


Basierend auf einer realtiven Höhe des zu observierenden Objektes, das Fokussierrad kann für ein klares Bild eingeschaltet werden. Wenn eine höhere Vergrößerung benötigt wird, kann das Fokussierrad nach links gedreht werden (siehe unten). Wenn ein größerers Blickfeld benötigt wird, kann das Dermatoskop weiter weg platziert werden und das Rad nach rechts gedreht werden.

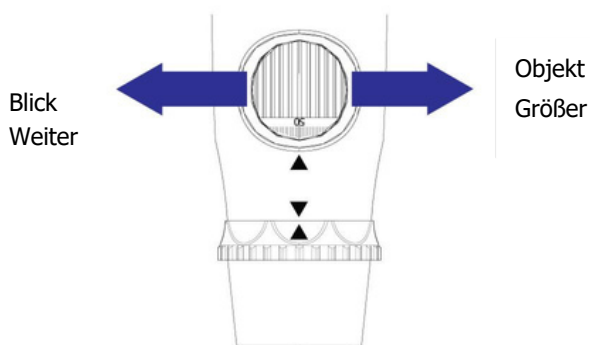

Helligkeitsanpassung:


Auf der linken Seite des Dermatoskops, erlaubt ein Knopf dem Benutzer, die Helligkeit der LEDs zu kontrollieren:

- ◆ Backward Turn: Decrease Brightness
- ◆ Forward Turn: Increase Brightness

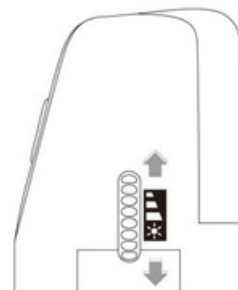


Die Bilderfassungskontrolle benutzen:

Drücke und lasse den Erfassungsknopf. Das System, wird ein Verschlussgeräusch von dem PC-Lautsprecher als Bestätigung geben.

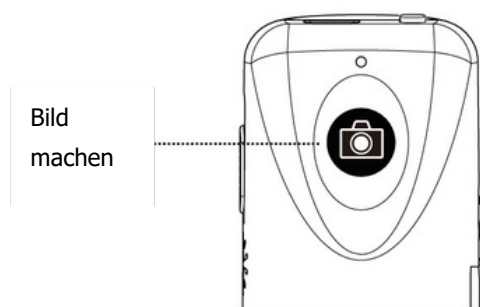


Den Polarisator benutzen:

Der DE300 ist mit einem integrierten Polarisator ausgestattet. Um den Polarisator zu aktivieren, schalte den schwarzen Ring hinter der erweiternden Spitze an. Viele Grade, des Polarisator können allmählich den Polarisator Ring von 0 Grad auf 360 Grad erhitzen.

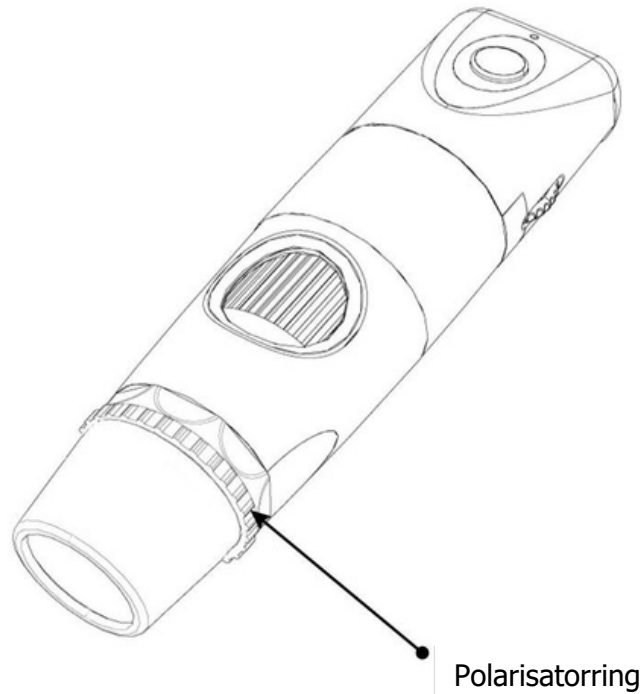

Standby und das Gerät entfernen:

Um das Gerät vorübergehend zu entfernen oder auszuschalten, drücke den „OFF“ Taste. Verlasse die FireflyPro Software Anwendung. Als nächstes, entferne das USB-Kabel und entferne das Gerät.

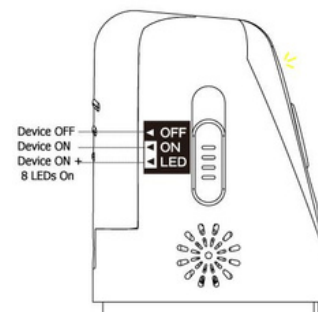

WARTUNG UNND SERVICE

Reinigungsempfehlung:



Vorsicht Trage kein Alkohol, Chemikalien, oder Wasser auf die Linsen auf. Jede Flüssigkeit, die das Optische Montage, wird die inneren Komponenten schädigen. Benutze ein trockenes Tuch, um das Digitale Firefly Dermatoskop System auf einer Wöchentlichen Basis, zu reinigen.

Recyclen der Systemkomponenten

Innerhalb der EU



Entsorgen Sie dieses Produkt, nicht als unsortierten Abfall, sondern geben Sie es zur getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2002/96EG des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union, über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Wenn dieses Produkt verunreinigt ist, gilt diese Richtlinie nicht. Für genauere

Entsorgungsinformationen wenden Sie sich an den Kundendienst.

Außerhalb der EU



Wenn das Produkt und seine Komponenten das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreichen, recyceln Sie das Produkt gemäß den nationalen, Bundesland- und örtlichen Vorschriften.

DIENTLEISTUNGSRICHTLINIEN

Alle Reparaturen am Produkt unter Garantie müssen von autorisierten Verkäufern oder von Firefly selbst durchgeführt werden. Unautorisierte Reparaturen führen zum Erlischen der Garantie. Außerdem, egal ob gedeckt durch Garantie oder nicht, sollten alle Reparaturarbeiten von Firefly-zertifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte das Produkt nicht richtig funktionieren oder Sie Hilfe, Service oder Ersatzteile benötigen, kontaktieren Sie Ihren Firefly Verkäufer.

Bevor Sie sich an Ihren Händler wenden, versuchen Sie, das Problem zu duplizieren und überprüfen Sie alle Zubehörteile, um sicherzustellen, dass nicht eines von ihnen das Problem verursacht. Wenn Sie anrufen, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Produktname und Modellnummer, sowie eine vollständige Beschreibung des Problems.
- Seriennummer Ihres Produktes (falls vorhanden).
- Vollständiger Name, Adresse und Telefonnummer Ihrer Einrichtung.
- Bei Reparaturen außerhalb der Garantiezeit oder Ersatzteilbestellungen, eine Auftragsnummer (oder Kreditkartennummer).
- Bei Ersatzteilbestellungen die erforderlichen Ersatzteil- oder Ersatzteilnummern.

Wenn Ihr Produkt eine Garantie, eine Garantieverlängerung oder einen Reparaturservice außerhalb der Garantie benötigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Firefly-Händler. Ein Kundendienstmitarbeiter, wird Sie bei der Fehlerbehebung unterstützen und alles daransetzen, das Problem telefonisch zu lösen, um eventuell unnötige Rücksendungen zu vermeiden. Falls eine Rücksendung nicht vermieden werden kann, wird der Vertreter alle notwendigen Informationen aufzeichnen und eine Rückgabeberechtigungsnummer sowie die entsprechende Lieferadresse angeben. Die Rückgabeberechtigungsnummer, muss vor jeder Rücksendung angefordert werden.

Wenn Sie ihr Produkt zu Reparatur zurücksenden müssen, berücksichtigen Sie, die empfohlenen Verpackungsanweisungen:

- Trennen Sie vor dem Verpacken alle Schläuche, Kabel, Sensoren, Netzkabel und Zusatzprodukte (falls vorhanden), es sei denn, Sie vermuten, dass sie mit dem Problem in Zusammenhang stehen.
- Verwenden Sie, wo immer möglich, den Original Versandkarton und das Verpackungsmaterial.
- Legen Sie eine Packliste und die Rückgabeberechtigungsnummer bei.

Es wird empfohlen, alle Warenrücksendungen zu versichern. Ansprüche resultierend aus Verlust oder Beschädigung des Produktes, liegen in der Verantwortung des Absenders.

SPEZIFIKATIONEN

Produkt	Spezifikation
Gewicht	Ungefähr 100 g (0.22 lb)
Dimensionen (ungefähre Angaben)	Länge: 13.0 cm (5.2 inches) Höhe: 3.6 cm (1.5 inches) Breite: 4.0 cm (1.6 inches)
Kraft	USB 5VDC, 150mA
Schutz gegen das Eindringen von Wasse	IPXØ
Betriebsbedingungen	
Temperatur	+10°C to +40° C (+50°F to +104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	30% bis 75% nicht kondensierend
Höhe	700 bis 1060 hPa
Versand und Lagerbedingungen	
Temperatur	-20°C to +49°C (-4°F to +120°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend max.
Sicherheitsbestimmungen	FCC, CE und RoHS gefällig

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Beschränkte Hardware-Garantie (durch Distributoren und Wiederverkäufer)

Firefly Global Hardware Produkte, werden mit einer 1-jährigen beschränkten Hardware-Garantie geliefert. Die Garantie, wird durch autorisierte Vertreter und Wiederverkäufer von Firefly Global verlängert. Wenn Sie einen Garantieanspruch haben, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, den Händler oder die Internetseite, über die das Produkt gekauft wurde.

Registrieren Sie Ihr Firefly Gerät auf [at http://www.fireflyglobal.com/warranty-registration/](http://www.fireflyglobal.com/warranty-registration/) innerhalb von zwei Wochen nach Ihrem Kauf und bewahren Sie den Originalbeleg auf.

Was wird durch diese beschränkte Hardware-Garantie abgedeckt?

Diese beschränkte Hardware-Garantie, deckt Material- und Verarbeitungsfehler in Ihren Firefly Global Hardware Produkten ab.

Was wird nicht von dieser beschränkten Hardware-Garantie nicht abgedeckt

Diese beschränkte Hardware-Garantie deckt nicht ab:

- Software einschließlich des, operierende Systems und der Software, die zu den Firefly Global Hardwareprodukten hinzugefügt oder mit diesen gebündelt wurden
- Probleme, die sich aus den folgenden Bedingungen ergeben:
 - Äußerliche Ursachen, so wie ein Unfall, Missbrauch, Fehlanwendung oder Probleme, mit der elektrischer Energie
 - Wartung, die nicht, von Firefly Global autorisiert wurde
 - Verwendung, die nicht mit den Produkthanweisungen übereinstimmt
 - Das nicht einhalten, der Anleitungen
 - Probleme, die durch die Verwendung von Zubehör, Teilen oder Komponenten verursacht wurden, die nicht von Firefly Global geliefert wurden.
- Produkte mit fehlenden oder geänderten Seriennummern
- Produkte, für die Firefly Global oder seine Vertriebspartner keine Zahlung erhalten haben
- Normale Abnutzung und Verschleiß

DIESE GARANTIE, GIBT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE UNVON BUNDESLAND ZU BUNDESLAND (ODER VON GERICHTSBARKEIT ZU GERICHTSBARKEIT)KÖNNTEN

UNTERSCHIEDLICHE;ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN UND DEFEKTE IN DER HARDWARE IST BESCHRÄNKT ZU REPARIEREN UND ERSATZ, WIE IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG DARGELEGT WIRD. ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN FÜR DAS PRODUKT, EINSCHLISSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN UND BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND ZEITLICH BEGRENZT AUF DIE LAUFZEIT DER BESCHRÄNKTEN GARANTIEZEIT, DIE AUF IHREN PACKZETTEL ODER IHRER RECHNUNG ANGEZEIGT IST. NACH ABLAUF DER BESCHRÄNKTEN GARANTIEZEIT, GELTEN KEINE GARANTIEEN, WERDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, MEHR. EINIGE LÄNDER LASSEN KEINE BESCHRÄNKUNGEN DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ZU, SODASS DIESE BESCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZURTRIFFT.

WIR AKZEPTIEREN KEINE ÜBER DIE IN DIESER BESCHRÄNKTEN HARDWARE-GARANTIE VORGESEHENEN RECHTSMITTEL HINAUSGEHENDE HAFTUNG ODER HAFTUNG FÜR FOLGE-ODER ZUFÄLLIG ENTSTANDENE SCHÄDEN; EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEGLICHE HAFTUNG FÜR SCHADENERSATZANSPRÜCHE DRITTER GEGEN SIE, FÜR PRODUKTE, DIE NICHT ZUM GEBRAUCH ZUR VERFÜGUNG STEHEN, ODER FÜR VERLORENE DATEN ODER VERLORENE SOFTWARE. UNSERE HAFTUNG IST NICHT HÖHER ALS DER BETRAG, DEN SIE FÜR DAS PRODUKT BEZAHLT HABEN, DER GEGENSTAND EINES ANSPRUCHS IST. DIES IST DER MAXIMALE BETRAG, FÜR DEN WIR VERANTWORTLICH SIND.

Wie lange, gilt diese beschränkte Hardware-Garantie?

Die beschränkte Hardware-Garantie, für alle Firefly Global Produkte, beginnt mit dem Datum des Beipackzettels, der Rechnung oder der Quittung. Die Garantiezeit wird nicht verlängert wenn ein garantiertes Produkt oder Teile davon repariert oder ersetzt werden. Firefly Global, kann die Verfügbarkeit beschränkter Hardware-Garantien, nach eigenem Ermessen ändern aber keine dieser Änderungen sind rückwirkend.

Was muss ich tun, wenn ich Garantieleistungen in Anspruch nehmen muss?

Bevor die Garantie abläuft, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, den Händler oder die Internetseite, über die das Produkt gekauft wurde.

Was wird Firefly Global tun?

Firefly Global oder rein von Firefly Global autorisierter Vertreter oder Wiederverkäufer, repariert alle zurückgesandten Firefly Global Hardware-Produkte, die sich als defect in Material oder Verarbeitung erweisen. Wenn Firefly Global oder seine autorisierten Vertreter nicht in der Lage sind, das Produkt zu reparieren, werden wir es durch ein vergleichbares, neues oder generalüberholtes Produkt ersetzen.

Wenn Sie unseren autorisierten Vertreter oder Wiederverkäufer per Telefon oder E-Mail kontaktieren, werden sie Ihnen eine Rückgabeautorisierungsnummer für die Materialrückgabe geben, die Sie Ihrer

Rücksendung beilegen müssen. Sie müssen die Produkte in der Originalverpackung oder einer gleichwertigen Verpackung zurücksenden, die Versandkosten im Voraus bezahlen und die Sendung versichern oder das Risiko übernehmen, dass das Produkt beim Versand verloren geht oder beschädigt wird. Die reparierten oder Ersatzprodukte werden an Sie zurückgeschickt. Der Wiederverkäufer oder autorisierte Vertreter, zahlt für den Versand der reparierten oder ersetzten Produkte an Sie, wenn Sie eine Lieferadresse, in dem Land verwenden, in dem der Wiederverkäufer ansässig ist. Andernfalls wird das Produkt unfrei an Sie versandt.

Wenn festgestellt wird, dass das Problem nicht durch diese Garantie abgedeckt ist, werden Sie benachrichtigt und über kostenpflichtige Servicealternative informiert.

Wie werden Sie mein Produkt reparieren?

Bei der Durchführung von Garantiereparaturen und beim Bau von Ersatzteilen und -systemen verwenden wir neue und überholte Teile verschiedener Hersteller. Überholte Teile und Systeme sind Teile oder Systeme, die aus Rücksendungen an Firefly Global stammen und von denen einige nie von einem Kunden verwendet wurden. Alle Teile und Systeme, werden geprüft und auf die Qualität getestet. Ersatzteile und Systeme, sind für den verbleibenden Zeitraum der beschränkten Hardware-garantie für das von Ihnen gekaufte Produkt abgedeckt. Firefly Global ist der Eigentümer aller Teile, die aus reparierten Produkten entfernt wurden.

Kann ich die beschränkte Hardwaregarantie übertragen?

Die beschränkten Hardware-Garantien, sind nicht übertragbar.

FEHLERBEHEBUNG

Bitte besuchen Sie den FAQ-Bereich auf unserer Internetseite für die neuesten Fehlerbehebungsinformationen und zusätzlicher Unterstützung. <http://www.fireflyglobal.com/>

Sie können uns auch auf support@fireflyglobal.com kontaktieren, von Montag bis Freitag, zwischen 9:30AM bis 5:30Pm Östlicher Zeit.

Danke für das Wählen, von Firefly.



www.fireflyglobal.com