

ZOLL AED 3™

Kurzanleitung



ZOLL®



Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich bei der Suche nach einem automatisierten externen Defibrillator für den ZOLL AED 3™, den derzeit weltweit modernsten AED, entschieden haben. Mithilfe dieser Anweisungen können Sie Ihren AED 3 in nur wenigen Minuten einrichten. Melden Sie sich nach der Einrichtung bei www.zollaed3.com an und halten Sie Ihre Seriennummer bereit, um Ihren AED 3 für eine Garantieverlängerung zu registrieren.

Wenden Sie sich bei Fragen oder Anmerkungen telefonisch unter +1 978 421-9655 oder per e-mail unter tservice_master@zoll.com an ZOLL. Selbstverständlich können Sie sich auch an den autorisierten Vertriebspartner wenden, bei dem Sie Ihren AED 3 erworben haben.

Inhalt

Dokumentationsordner:

- Kurzanleitung
- PlusTrac™-Aktivierungszertifikat
- ZOLL AED 3-Rettungskurzanleitung/-Poster
- ZOLL AED 3-Bedienerhandbuch

Lieferumfang:

- ZOLL AED 3
- Dokumentationsordner
- CPR Uni-padz™
- ZOLL AED 3-Batterie

AED-Registrierung

Melden Sie sich bei www.zollaed3.com an. Dort können Sie:


- Die zweijährige Garantieverlängerung registrieren
- Ihr PlusTrac-Konto mit Ihrem PlusTrac-Aktivierungszertifikat einrichten*, mit dem Sie PlusTrac im ersten Jahr kostenlos erhalten
 - Die Einsatzbereitschaft Ihres AED 3 erfassen
 - Den Schulungsstatus Ihrer Ersthelfer erfassen
 - Ihr AED-Programm online verwalten
 - Elektronische Erinnerungen und Alarmmeldungen erhalten
 - Den AED 3 so einrichten, dass dieser regelmäßig Selbsttestergebnisse über das lokale WAN an PlusTrac sendet
- Informationen zum Einrichten Ihres ZOLL-Online-Kontos erhalten, um klinische Daten zu ZOLL Case Review™ hochzuladen und zu verwalten

*Aktivierungszertifikat im Dokumentationsordner


Einrichten Ihres ZOLL AED 3




Nehmen Sie den gesamten Inhalt aus der Versandverpackung.

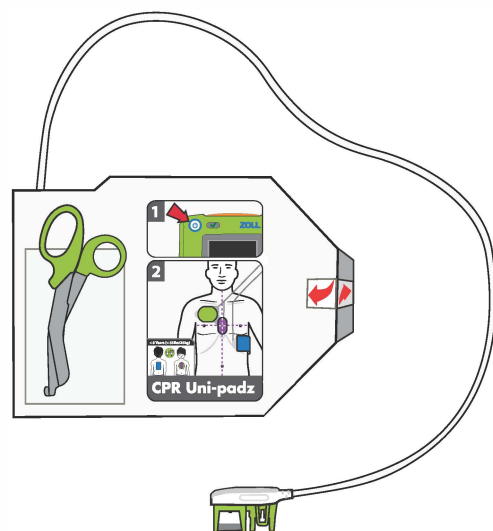

Nehmen Sie die CPR Uni-padz aus der Schutzverpackung.

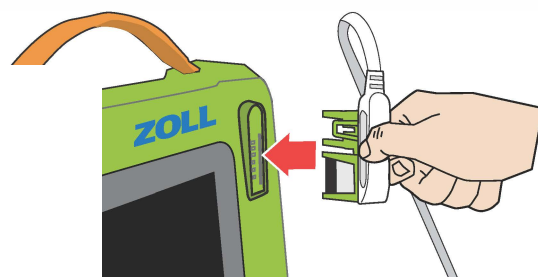


Stecken Sie den CPR Uni-padz-Stecker in den AED 3-Elektrodenanschluss.

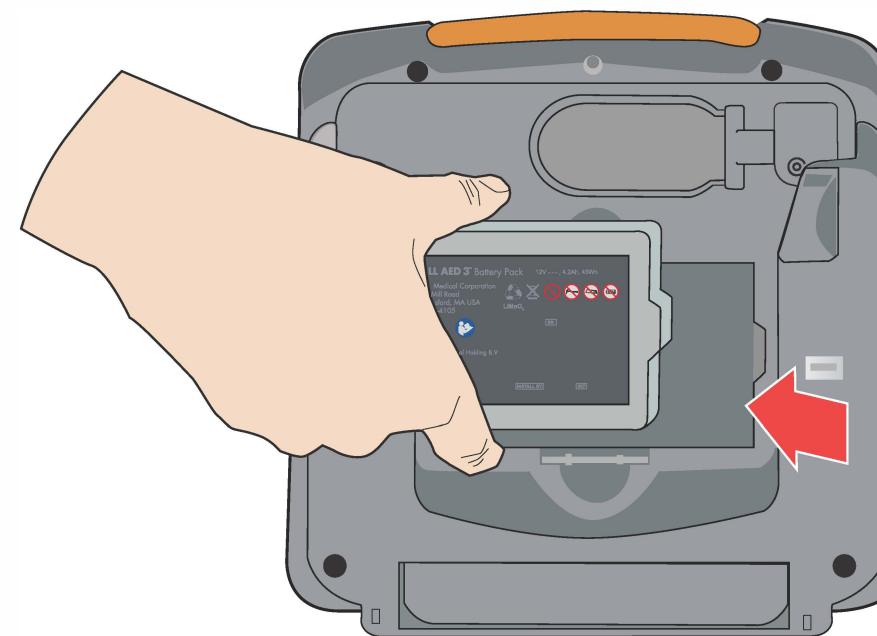


Nehmen Sie die AED 3-Batterie aus der Versandverpackung. Halten Sie die Batterie an den seitlichen Verriegelungslaschen. Dabei muss das Etikett nach außen zeigen. Setzen Sie die Batterie in die Rückseite des AED ein, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet. Richten Sie dabei die Nase am Batterieende an der entsprechenden Aussparung des Batteriefachs aus.



Der ZOLL AED 3 führt einen automatischen Selbsttest durch. Setzen Sie, während der Selbsttest durchgeführt wird, die CPR Uni-padz so in die Rückseite des AED ein, dass das Etikett auf der Packung in Ihre Richtung weist.

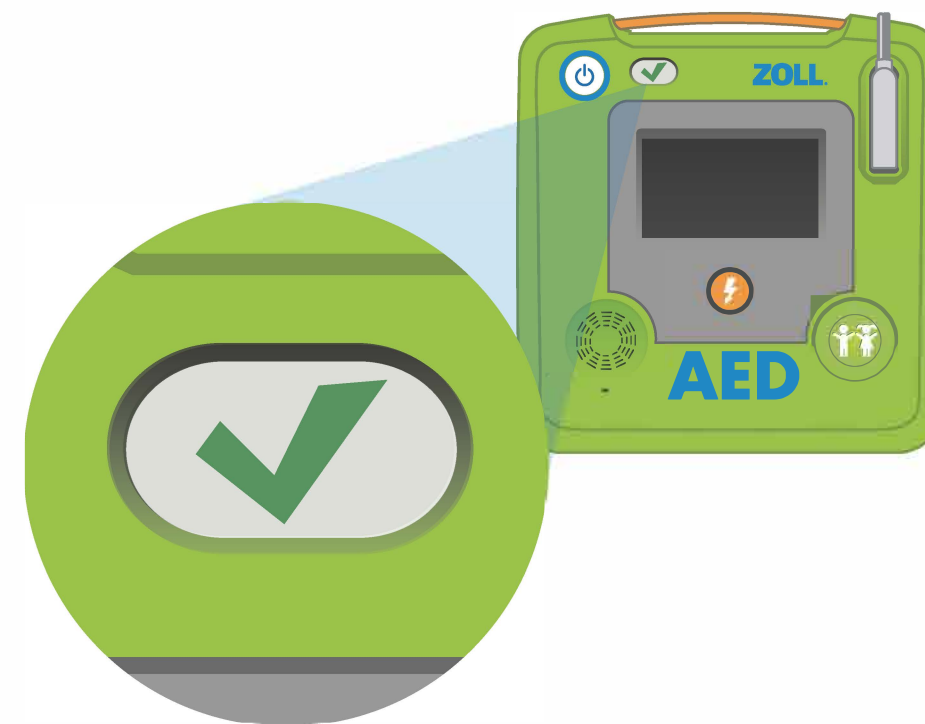

Der AED 3 meldet den erfolgreichen Abschluss des Selbsttests mit der Sprachausgabe „Gerät OK“ bzw. mit dem grünen Symbol auf der Statusanzeige. Der AED 3 ist jetzt betriebsbereit. Konsultieren Sie bei Fragen die Bedienungsanleitung im Dokumentenordner.



Fragen:

Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von ZOLL oder den örtlichen autorisierten ZOLL-Vertreter

Technischer Kundendienst von ZOLL:

Telefon: 1-978-421-9655

E-Mail: tservice_master@zoll.com

9650-001753-08 Rev. A

ZOLL®