



Bedienungsanleitung

H2 O2 hydra facial machine

Hydrodermabrasion

Ultraschall

Kalt/Hammer Radiofrequenz

Spray

Ultraschall Peeling

Importador/Importer Importateur/Importeur Importatore:

Beautek GmbH
Bahnhofstr. 74
57258 Freudenberg
Germany



Achtung—Verwenden Sie das Gerät nicht in diesen Fällen:

- Bei Patienten mit sehr empfindlicher Haut oder starker Akne.
- Bei schwangeren Personen
- Bei Menschen mit dünner Oberhaut können RF nicht länger als 20 Minuten anwenden.
- Bei Patienten mit Diabetes, hohem Blutdruck oder hohes Cholesterin Niveau.
- Bei Patienten mit ansteckender Hautinfektion.
- Bei Patienten mit Herzfrequenzgerät (Herzschrittmacher), implantierten automatischen Defibrillatoren (AID) oder anderen implantierten elektromagnetischen Geräte.
- Wenn sich der Patient unwohl fühlt, seien Sie wachsam und schalten Sie die Maschine im Zweifel aus.

Die Flaschen können mit folgenden Produkten gefüllt werden:

A: Flüssigkeit tiefe Reinigung

B: Feuchtigkeitsflüssigkeit

C: Desinfektionslotion

D: Sauerstoffflüssigkeit (hintere Flasche H2 O2)

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie den Karton und prüfen Sie, dass alle Teile des Gerätes im Karton vorhanden sind und in einwandfreiem Zustand sind. Es ist notwendig, für mögliche Reklamationen die Verpackung zu behalten.
- Prüfen Sie, dass das Gerät funktionsfähig ist. Sollte ein Problem entstehen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Stellen Sie das Gerät in einem sauberen und gut belüfteten Raum mit einer Temperatur zwischen 5 und 40°. Die relative Luftfeuchtigkeit darf nicht höher als 80% sein. Stellen Sie kein Gegenstand näher als 5 cm vom Gerät entfernt.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Die Flaschen vorne und hinten montieren. Wenn Sie die Flaschen hinten rausnehmen möchten, sollen diese abgeschraubt werden. Bei den Flaschen vorne, sollen Sie erstmal auf dem oberen Knopf drücken und danach ziehen, um diese rausnehmen zu können.
- Das schwarze Kabel in die Steckdose einstecken und das Gerät einschalten.
- Die Flaschen sauber machen bevor diese mit den Kosmetikprodukten ausgefüllt werden. Wenn Sie diese nach der Verwendung leeren möchten, vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht in Betrieb ist, da das Produkt in das Gerät reinkommen könnte und dieses beschädigt werden könnte.

Rückseite des Geräts






Wasted water bottle = Flasche für Schmutzwasser

H2 O2 bottle = Flasche für sauberes Wasser

Wichtig: Wenn Sie das Gerät bewegen möchten, entfernen Sie bitte alle Flüssigkeiten aus den Flaschen. Sonst kann es dazu kommen, dass Flüssigkeiten in das Gerät kommen und entsprechend Schaden am Gerät entstehen kann.

Wenn Sie das Gerät benutzen und das Gerät piepst, beobachten Sie es bitte,. Wenn es blinkt, gießen Sie bitte das überschüssige Wasser aus und setzen Sie die Flasche nach dem Ausgießen wieder in das Gerät ein.

Einstellungen am Display

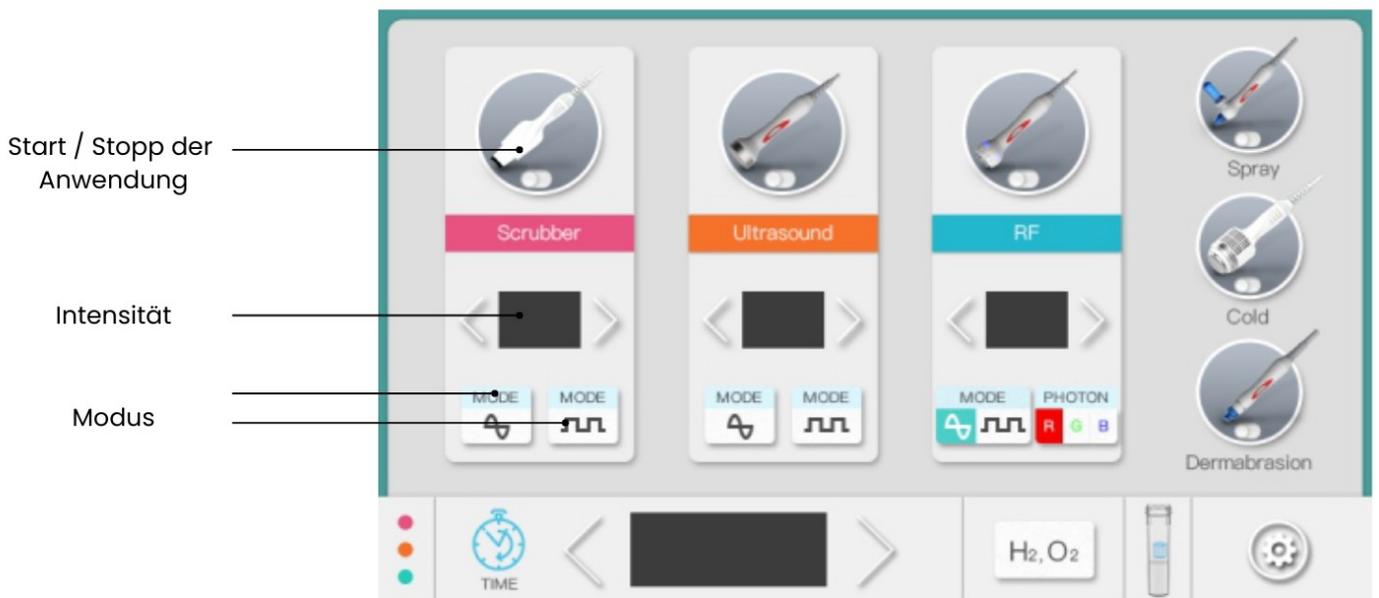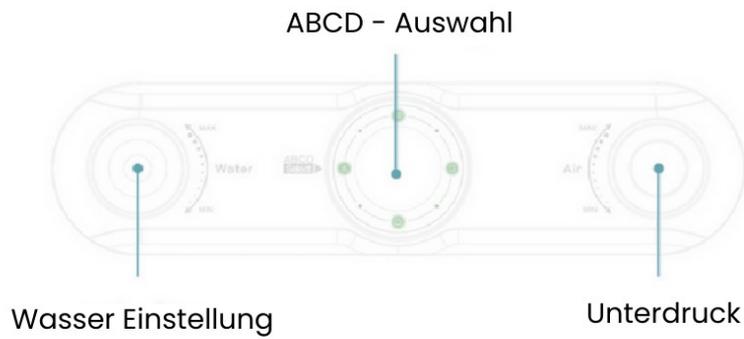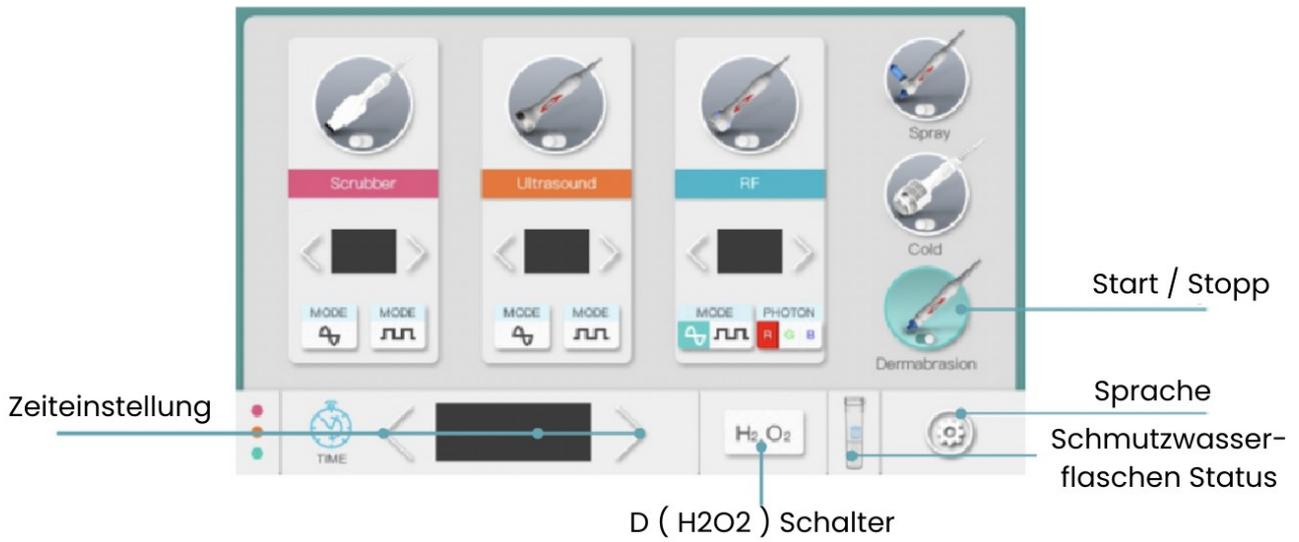

HYDRODERMABRASION

Geeignet für tiefe Reinigungen und Behandlungen von Akne, keine entzündliche Beseitigung von Mitesern, unreiner und fettiger Haut. Auch um Fett zu beseitigen und die Elastizität und Hautton zu verbessern.

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker "Abrasion" stecken. Das Wort "Open" soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung, das Gesicht des Patienten reinigen.
3. Das entsprechende Aufsatz auf dem Handstück einsetzen, je nach Behandlungsbereich.
4. Wählen Sie die gewünschte Flasche je nach benötigtem Mitteln aus, indem Sie das mittlere Rad auf dem Buchstaben der gewünschten Flasche stellen. Zum Beispiel, bei einer Sauerstoff-Gesichtsbehandlung, stellen Sie das mittlere Rad auf dem Buchstabe D.
5. Zwischen den Behandlungen mit den verschiedenen Produkten, drücken Sie das Handstück mit dem Fingern 4-5 Sekunden lang ein paar Mal, um es zu reinigen.
6. Wechseln Sie das Kopfstück und passen Sie die Absaug - Funktion je nach Hauttyp des Patienten oder zu behandelnden Bereich an.
7. Auf der Taste "H2 O2" und/oder "Dermabrasion" am Bildschirm drücken, je nach Behandlung und warten Sie ca. 3 Minuten bevor angefangen wird zu pulverisieren. Die ausgewählte Funktion kann auch mit dem Knopf am Handstück eingeschaltet werden.
8. Nach der Behandlung die Flaschen ABCD und die Schläuche reinigen, um die Verstopfung zu vermeiden.

ULTRASCHALL

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker " ultrasound " stecken. Das Wort "open" soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung das Gesicht des Patienten reinigen und Gel auftragen.
3. Die Zeit der Behandlung auswählen, die Intensität vom 1 bis 10 mit den Pfeilen und der Wellen-Typ mit den Tasten "MODE" auswählen: kontinuierliche Welle (linke Taste) und pulsierte Welle (rechte Taste). Es wird empfohlen, die Erste für normale Haut und dickeres Gewebe zu verwenden. Die Zweite ist ideal für empfindliche Bereiche und feineres Gewebe. Es wird empfohlen mit der kontinuierlichen Welle anzufangen und die Intensität allmählich erhöhen.
4. "Ultrasound" auf dem Bildschirm klicken, um mit der Behandlung anzufangen.
5. Das Handstück bewegen indem Sie leicht auf der Haut drücken von unten nach oben um die Umrisslinien herum während 5-8 Min.

KALTER HAMMER

Geeignet für Hautverjüngungbehandlungen, für Verkleinerung der Porengröße, Rötten Beseitigung, Minderung der Sensibilität und Verbesserung des Hauttones.

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker "Cold" stecken. Das Wort "cold" soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung das Gesicht des Patienten reinigen und Gel auftragen.
3. "Cold" auf dem Bildschirm klicken.
4. Der Hammer in Kontakt mit der Haut des Patienten auf den Bereichen stellen, die zu behandeln sind.

RADIOFREQUENZ

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker "RF" stecken. Das Wort "RF" soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung, das Gesicht des Patienten reinigen und Kosmetikprodukt auf dem Behandlungsbereich auftragen.
3. Die Zeit der Behandlung auswählen, die Intensität vom 1 bis 10 mit den Pfeilen und der Wellen-Typ mit den Tasten "MODE" auswählen: kontinuierliche Welle (linke Taste) und pulsierte Welle (rechte Taste). Es wird empfohlen, die Erste für normale Haut und dickeres Gewebe zu verwenden. Die Zweite ist ideal für empfindlichere Bereiche und feineres Gewebe. Es wird empfohlen mit der kontinuierlichen Welle anzufangen und die Intensität allmählich erhöhen.
4. "RF" auf dem Bildschirm klicken, um mit der Behandlung anzufangen.
5. Das Handstück bewegen indem Sie leicht auf der Haut drücken von unten nach oben oder in kleinen Kreisen im Gesicht entlang.
6. Behandlungen von 10-15 Minuten werden empfohlen.

SPRAY

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker "Spray" stecken. Das Wort „Open„ soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung, das Gesicht des Patienten reinigen
3. Der kleine Plastikbehälter vom Handstück mit der gewünschten Lotion zum pulverisieren ausfüllen und am Handstück mit Druck anbringen.
4. "Spray" auf dem Bildschirm klicken.
5. Das Handstück zum behandelnden Bereich richten. Nun fangen Sie an zu pulverisieren.
6. Falls die Düse verstopft ist, reinigen Sie die Reste

ULTRASCHALL PEELING:

Entfernt abgestorbene Haut, kämpft gegen übermäßige Verhornungen und verbessert die Beschaffenheit der Haut.


MODE A: Peeling

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker " Scrubber " stecken. Das Wort "open" soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung, das Gesicht des Patienten reinigen und richtig abtrocknen. Die geeignete Lotion auf dem Behandlungsbereich auftragen.
3. Die Zeit der Behandlung auswählen, die Intensität vom 1 bis 10 mit den Pfeilen und der Wellen-Typ mit den Tasten "MODE" auswählen: kontinuierliche Welle (linke Taste) und pulsierte Welle (rechte Taste). Es wird empfohlen, die Erste für normale Haut und dickeres Gewebe zu verwenden. Die Zweite ist ideal für empfindliche Bereiche und feinerer Gewebe. Es wird empfohlen mit der kontinuierlichen Welle anzufangen und die Intensität allmählich erhöhen.
4. Die seitlichen Tasten des Handstückes gleichzeitig drücken und diese ca. 45° schräg stellen, wie unten abgebildet.
5. Die Behandlung dauert ca. 15-20 Minuten.


MODE B: Lymphmassage

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker " Scrubber " stecken. Das Wort „open,“ soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung, das Gesicht des Patienten reinigen und richtig abtrocknen. Die geeignete Lotion für die galvanische Funktion auf dem Behandlungsbereich auftragen.
3. Die Zeit der Behandlung auswählen, die Intensität vom 1 bis 10 mit den Pfeilen und der Wellen-Typ mit den Tasten "MODE" auswählen: kontinuierliche Welle (linke Taste) und pulsierte Welle (rechte Taste). Es wird empfohlen mit der kontinuierlichen Welle anzufangen und die Intensität allmählich erhöhen.
4. Die seitlichen Tasten des Handstückes gleichzeitig drücken und diese fest auf der Haut den Gesichtslinien entlang zu drücken, wie unten abgebildet.

MODE A

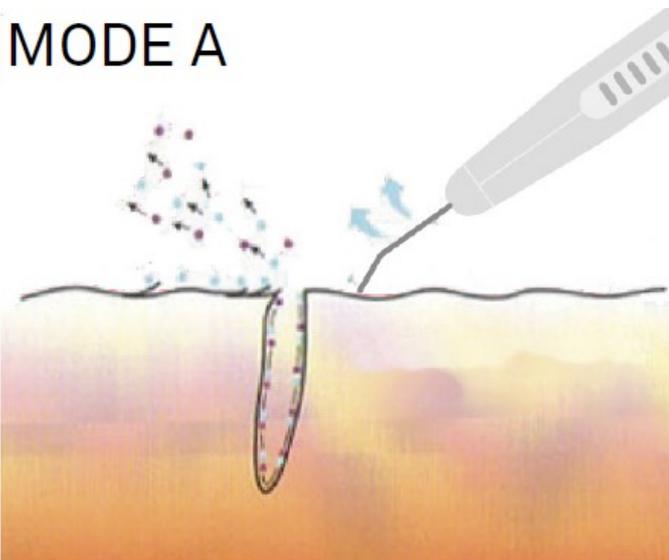

MODE B

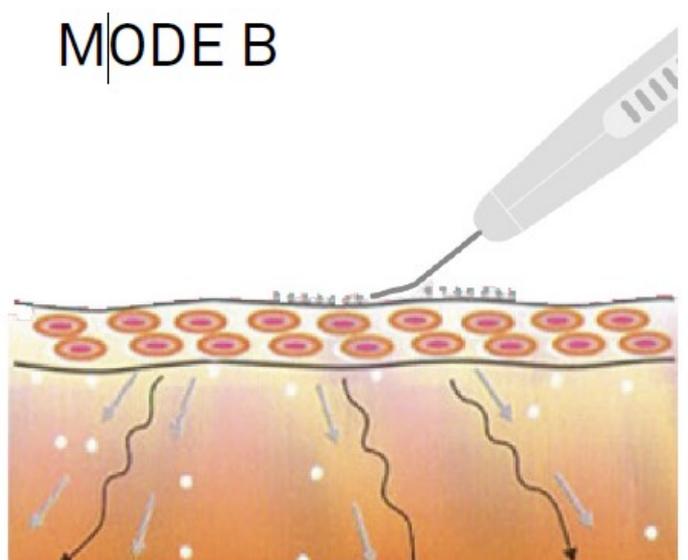

VORSICHTSMAßNAHME

- Während den ersten 24 Stunden nach der Behandlung wird es empfohlen Sonnencreme aufzutragen. Fragen Sie Ihre Kosmetikerin welche kosmetischen Produkte auf der Haut aufgetragen werden dürfen.
- Sollte der Patient unter Anaphylaxie, starker Akne leiden oder überempfindliche Haut oder Herzblutkreislauf Schwierigkeiten haben, wird es empfohlen Ihren Facharzt zu fragen bevor das Gerät verwendet wird.
- Sollte der Patient während der Behandlung Beschwerde spüren, stoppen Sie diese sofort.

WARTUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät während der Reinigung aus ist.
- Verwenden Sie ein sauberes und trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Im Falle von Flecken oder extreme Verschmutzungen kann ein feuchtes Tuch verwendet werden.
- Um das Handstück der Hydrodermabrasion zu reinigen, fangen Sie mit der Flasche C an und stellen Sie die Absaug- Funktion möglichst hoch ein. Auf "Start" Klicken und behalten Sie den Finger auf dem Handstück 5-10 Sekunden lang. Aufsatz abnehmen und wiederholen Sie dasselbe 8-10 Male. Wenn die Flasche C schon leer und sauber ist, füllen Sie die Flaschen A und B mit lauwarmem Wasser aus und wiederholen Sie dasselbe mit diesen zwei Flaschen. Damit wird vermieden, dass die Schläuche und Handstücke verstopft werden. Nach der Behandlung, nehmen Sie den Aufsatz ab und reinigen Sie ihn mit den anderen anhand eines Tuches, um alle Spuren vom Schmutz zu entfernen. Sie können auch diese in Alkohol oder desinfiziertes Mittel 1 Minute lang tauchen.
- Um das Handstück Spray zu reinigen, füllen Sie den Behälter mit lauwarmem Wasser aus, klicken Sie auf „Start“ und pulverisieren Sie das ganze lauwarme Wasser.
- Die anderen Handstücken sollen mit einem feuchten Tuch mit lauwarmen Wasser nach jeder Behandlung gereinigt werden.

TECHNISCHE ANGABEN

Gewicht & Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	43x45,5x31
	Bruttogewicht (kg)	9,5
	Produktabmessungen (cm)	26x40x38
	Abmessungen des Bildschirmes	7"
Technische Daten	Ultraschall Frequenz	1 MHz
	Bipolare Freq. Radiofrequenz	2 MHz
	Saugkraft	650 cm/hg
	Wasserfluss Kraft	30 l/h
	Druck	80 Kpa
Elektrische Daten	Nennspannung	230 V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Leistung	100W

Importeur:

Beautek GmbH

Bahnhofstr. 74
57258 Freudenberg

Telefon

+49 (0) 271 - 313 74 3 0

E-mail

info@beautek.de

