

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.
Software © 2020 Axxin, used under license.
All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.



Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott

Technischer Kundendienst Hotline
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner, oder kontaktieren Sie den technischen Kundendienst über:
USA
+1 855 731 2288 ts.scr@abbott.com
Afrika, Russland, GUS-Staaten
+44 161 483 9032 EMEproductsupport@abbott.com
Asien-Pazifik-Raum
+61 7 3363 7711 APproductsupport@abbott.com
Kanada
+1 800 818 8335 CANproductsupport@abbott.com
Europa und Naher Osten
+44 161 483 9032 EMEproductsupport@abbott.com
Lateinamerika
+57 (1) 4824033 LAPproductsupport@abbott.com

4 Test bestätigen:
Bestätigen Sie mit „OK“ den Testtyp, der zu der zu testenden QK-Probe passt, und folgen Sie den Bildschirmaufforderungen zur Durchführung des Testvorgangs.

3 Wählen Sie den durchzuführenden QK-Test aus.

2 Wählen Sie im Menü „RSV“ aus.

1 Drücken Sie auf „QK-Test starten“.



Ein externer positiver und ein steriler Tupfer für die Negativkontrolle müssen einmal bei jeder neuen Lieferung und einmal für jeden ungeschulten Anwender getestet werden.
Für QK-Tests wählen Sie auf der Startseite „QK-Test starten“ aus und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Weitere Informationen hierzu sind unter „Durchführung eines QK-Tests“ im Benutzerhandbuch des Geräts ID NOW Instrument zu finden.

Abbott ID NOW[™] RSV KURZANLEITUNG

Erforderliche Materialien zum Starten eines Tests:

Hier bestellen! **PRAXISDIENST** Medizinprodukte seit 1953



Testbasis



Probenempfänger



Transferkassette



Nasopharyngeal-Abstrich

Gerät:



KOMPLEXITÄT NACH CLIA: BEFREIT

Die vollständigen Anweisungen sind in der ID NOW RSV Gebrauchsinformation und im Benutzerhandbuch zu finden.

ID NOW™ RSV KURZANLEITUNG

Vor der Testdurchführung lesen Sie das vollständige Testverfahren und zusätzliche Informationen in der ID NOW RSV Gebrauchsinformation und im Benutzerhandbuch durch.


Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen auf dem Gerätebildschirm.

1



2

15°C – 30°C

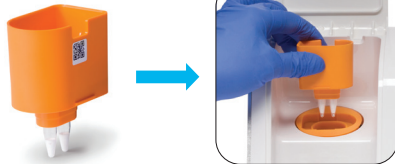

3

15°C – 30°C



4




4a



4b




5

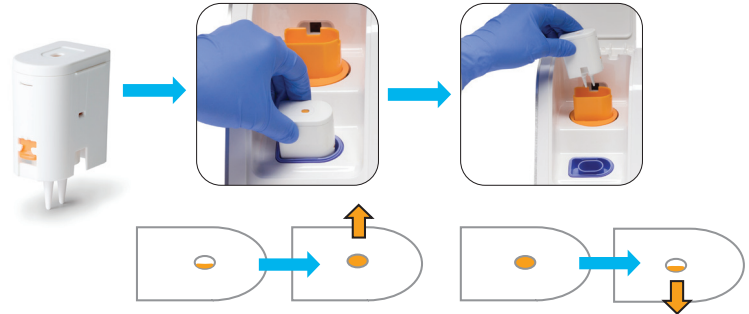

6



7

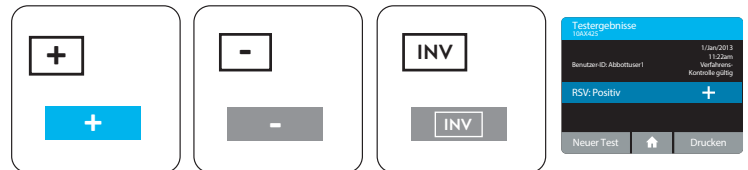

Das Verfahren für erneutes Testen bei ungültigen Testergebnissen ist in den Anweisungen der Gebrauchsinformation beschrieben.

8



Die Anweisungen zum sicheren Umgang und zur Entsorgung der Proben und Testkomponenten befinden sich in der Gebrauchsinformation.

Abbott ID NOW RSV QRI, DE Size: 8.5 in. x 11 in.	Printed Colors  CMYK	PN: IN435001de Rev: 6 Date of Last Revision: 6.1 2020/08/31
	Incoming Inspection Colors (For Reference Only) Colors below are not used for printing  PMS 2995 U Primary Blue  PMS 303 U Dark Blue  PMS 324 U Mint	