




QuikRead go[®] iFOBT

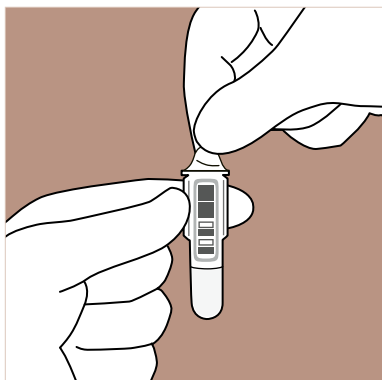

1 Entfernen Sie die Aluminium-
folie von der Küvette. Achtung:
die Küvette nur in der oberen
Hälfte berühren.

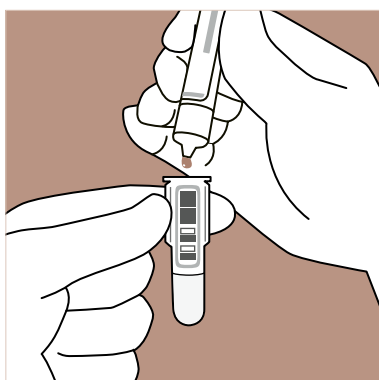


2 Probenröhrchen schütteln
und die Spitze abbrechen. Die
ersten drei Tropfen verwerfen. Drei
Tropfen in die Küvette geben.

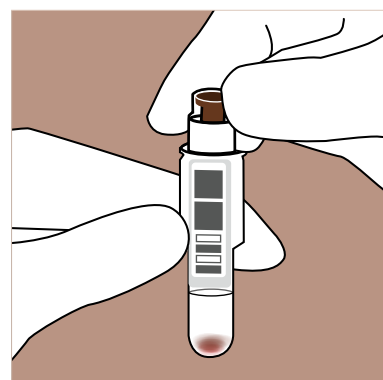


3 Verschließen Sie die Küvette
mit dem IFOBT Reagenzstopfen
ohne den braunen inneren Teil
hinunterzudrücken. Beginnen Sie die
Messung innerhalb von 2 Stunden.



4 Wählen Sie "Messen" auf
dem Display des QuikRead go
Instruments.

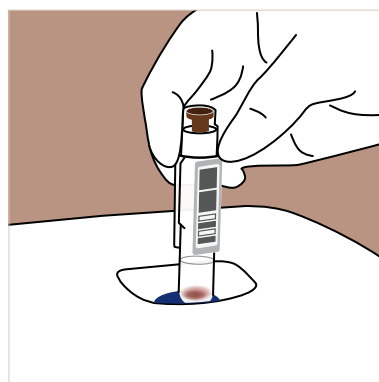

5 Setzen Sie die Küvette mit
dem Barcode nach vorne
gerichtet in das Küvettenfach ein.

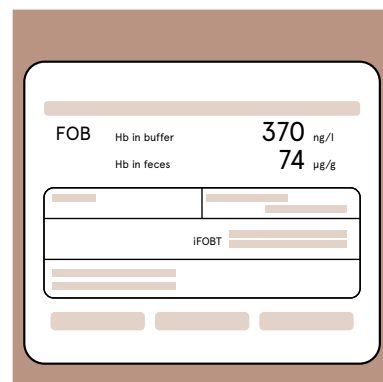

6 The Nach Abschluss der
Messung wird das Ergebnis
auf dem Display angezeigt und
die Küvette fährt automatisch aus
dem Küvettenfach zur Entnahme
heraus.

Bitte lesen Sie
die Bedienungs-
anleitung, bevor
Sie einen Test
durchführen.

QuikRead go[®] iFOBT



Kit-Box

Lagerung des ungeöffneten Kits bei 2–8°C bis zum außen aufgedruckten **Verfallsdatum**



Behälter mit
Reagenzstopfen

Lagerung im verschlossenen und geöffneten Behälter bei:
2–8°C: bis zum **Verfallsdatum**
18–25°C: 24 Std./Tag: **1 Monat**
18–25°C: 7,5 Std./Tag: **3 Monate**



Küvetten

Verschlossene Schutzfolie bei 2–25°C: bis zum angegebenen **Verfalldatum**
Verschlossene Küvette nach Anbruch der Schutzfolie
bei 2–8°C: **6 Monate**; bei 18–25°C: **3 Monate**



Geöffnete
Küvette

Die Pufferlösung sollte 18–25°C Raumtemperatur haben, die Probe bleibt in der Pufferlösung **2 Stunden** stabil. Führen Sie den Test innerhalb von **2 Stunden** nach Zufügung des Probe durch



FOB Positive
Control

Lagerung bei 2–8°C: bis zum **Verfallsdatum**



QuikRead go
iFOBT Control
Quantitative

Ungeöffnetes Fläschchen bei 2–8°C bis zum **Verfalldatum** haltbar
Geöffnetes Fläschchen bei 2–8°C **1 Monate** haltbar



iFOB Set zur
Probennahme

Lagerung bei 2–25°C: bis zum **Verfallsdatum**
Die Probe ist im Probenröhrchen bei 2–8°C **7 Tage** stabil
oder bei 18–25°C **5 Tage** stabil.

Kontaktinformationen

Aidian Germany GmbH

info@aidian.de

06196-77 00 146

Bestellungen: bestellung@aidian.de

www.aidian.de / www.quikread.com

Produkt	Art.-Nr.
QuikRead go iFOBT	151051
QuikRead FOB Positive Control	06027
QuikRead go iFOBT Control Quantitative	152390
QuikRead iFOB Sampling Set	151052
QuikRead go Instrument	133893