




COVER-DRI

Cover-Dri sind ein Sortiment an Schutzauflagen zum Schutz vor Verschmutzung und Nässe, z.B. bei Inkontinenz. Sie sind auch für andere nicht-sterile Anwendungen im klinischen Bereich geeignet.

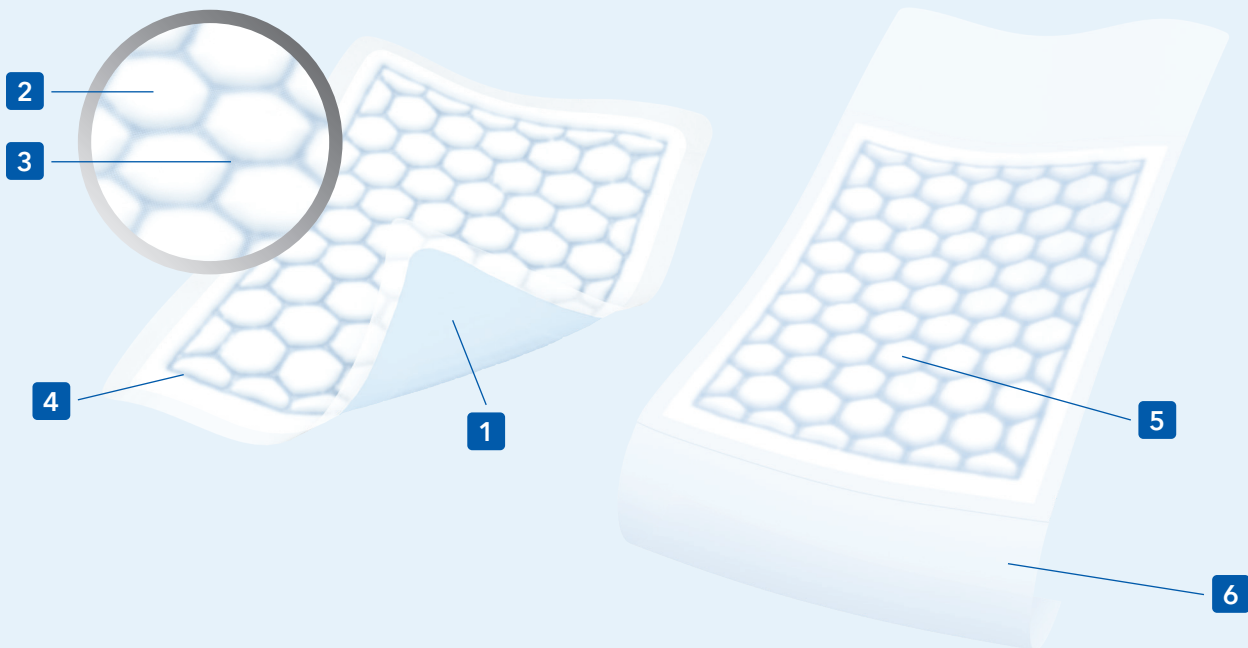

- 1 Die farbige Unterseite ist rutschhemmend,** damit die Schutzauflage nicht verrutscht.
- 2 Einzeln abgesteppte Saugkissen,** die Zellstoff und Superabsorber enthalten, nehmen Flüssigkeiten schnell auf.
- 3 Kanäle verteilen** die Flüssigkeit und verhindern Staunässe.
- 4 Die Rundum-Auslaufbarrieren** bieten Schutz vor Rücknässe.

- 5 Leistungsfähiger Saugkern,** sorgt für Auslaufschutz, Trockenheit und Geruchsbindung.

Cover-Dri Classic enthalten keinen Superabsorber und sind speziell für Situationen, in denen eine besonders schnelle Flüssigkeitsaufnahme erforderlich ist.

- 6 Attends Cover-Dri Plus 80 x 170 hat Seitenflügel zum Einschlagen** unter die Matratze - gegen Verrutschen.



Hautverträglichkeit bestätigt von SGS proderm GmbH, Institut für dermatologische Forschung und Prüfung. Getestet im Auftrag von Attends.

Mehr Informationen auf www.attends.de




**Extra weiche
Oberseite**
für ein sanftes
Hautgefühl.



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen.
(Nur bei Cover-Dri Plus/ Super)



**Wasserundurchlässige
Rückseite**
hilft Oberflächen
trocken zu halten.

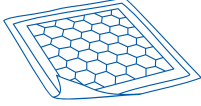Attends COVER-DRI 	Abmessung (in cm)	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nummer
Classic	60 x 90	25 6 x 25	208342 208359	12743172 13330845	1064	19.40.05.5133
Plus	40 x 60	50 6 x 50	203903 203910	01882893 01882901	346	19.40.05.3015
	60 x 60	50 4 x 50	203927 203934	01882918 01882924	580	19.40.05.4020
	60 x 90	50 4 x 50	203965 203972	01882930 01882947	867	19.40.05.5022
Plus (mit einsteckbaren Seitenflügel)	80 x 170	30 4 x 30	204023 204030	01883007 01883013	1567	19.40.05.5023
Super	60 x 60	50 4 x 50	203941 203958	01882953 01882976	630	19.40.05.4019
	60 x 90	50 4 x 50	203989 203996	01882982 01882999	972	19.40.05.5018
Attends SUPERSORB ADVANCED Extra groß. Extra stabil. Unterstützt dabei, die Position von Patienten bis 130 kg zu verändern. Hochsaugfähig dank Superabsorber. Atmungsaktiv.	76 x 91	5 12 x 5	209370 209387	15588738 15588734	1725	-

Saugkern

- **Plus/Super** - aus Superabsorber und Zellstoff
- **Classic** - aus Zellstoff

Rückseite

aus flüssigkeitsundurchlässiger
Polyethylen-Schicht

Oberseite

aus Vlies

Latexfrei



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde.



Unser Werk in Schweden
ist als klimaneutrale
Produktionsstätte
zertifiziert.



Cover-Dri Plus und Super
haben die Zertifizierung
des anerkannten Nordic
Swan-Umweltzeichens.



Das Holz für unseren
Zellstoff stammt aus
kontrolliert nachhaltiger
Forstwirtschaft.



STANDARD
100
SE 21-260
RISE
www.oeko-tex.com
Unsere Cover Dri sind
nach OEKO-TEX
STANDARD 100
zertifiziert und somit
streng schadstoffgeprüft.



Attends Healthcare AB
Järnväggsgatan 4
SE-57833 Aneby
Sweden