


Attends® Slip Regular



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Slip Regular sind geeignet bei starker Harn- und Stuhlinkontinenz. Für das Extra an Sicherheit.

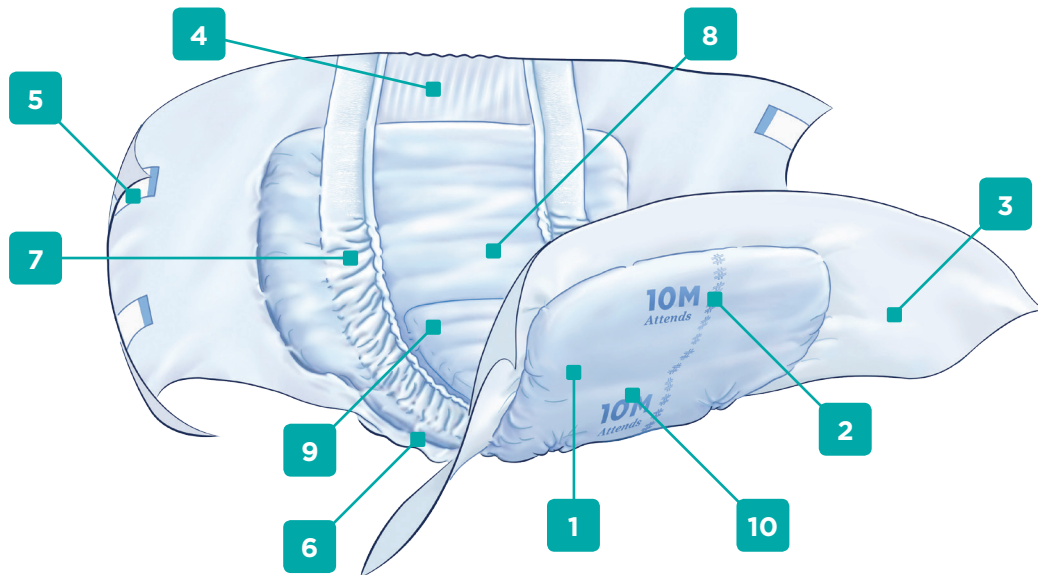

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 Weiße atmungsaktive textilähnliche Außenseite als Auslaufschutz. Textilähnlich in der Größe XL.</p> | <p>2 Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschwimmen an, wann das Produkt gewechselt werden muss. Bei der Größe XS und S wechseln die beiden gelben Streifen die Farbe und werden blau.</p> | <p>3 Die atmungsaktiven textilartigen Seitenflügel lassen mehr Luft an die Haut. Das trägt zur Hautgesundheit bei.</p> |
| <p>4 Elastischer Abschlussbund im Rücken für besseren Sitz. (außer Größe XS)</p> | <p>5 Wiederverschließbares Fixiersystem mit 4 Klebe-Klettverschlüssen zur Sicherung des Slips.</p> | <p>6 Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz.</p> |
| <p>7 Auslaufsperrern sorgen für bestmöglichen Auslaufschutz.</p> | <p>8 Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.</p> | <p>9 Leistungsstarker Saugkern für verbesserten Auslaufschutz, optimale Hauttrockenheit und Geruchsbindung.</p> |
| <p>10 Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt.</p> | | |

www.attends.de www.attends.at www.attends.ch

	Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 732152 Packung / Karton	PZN Packung/Karton	Hilfsmittelpositionsnummer	Bauch- / Hüftumfang in cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Elastisches Bündchen im Rücken	Auslaufsperrn	Wiederverschließbares Fixiersystem	Atmungsaktiv	Geruchsbindung (Odour Protection)	Quick-Dry Technologie
Attends Slip Regular 8M	28 4 x 28 24 x 4 x 28	203682 203699	06962384 06962390	15.25.03.1306	80 - 110	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 8L	28 4 x 28 16 x 4 x 28	203705 203712	06962409 06962415	15.25.03.2357	100 - 150	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9XS	32 4 x 32 20 x 4 x 32	208182 208199	11647940 11647957	15.25.03.1037	40 - 70	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9S	21 4 x 21 32 x 4 x 21	208106 208113	11594853 11594876	15.25.03.0001	50 - 85	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9M	28 4 x 28 24 x 4 x 28	203316 203323	07190624 07190653	15.25.03.1307	80 - 110	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9L	28 4 x 28 16 x 4 x 28	203330 203347	07190736 07190848	15.25.03.2358	100 - 150	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10S	21 4 x 21 32 x 4 x 21	208120 208137	11594882 11594899	15.25.03.0193	50 - 85	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10M	26 4 x 26 24 x 4 x 26	207680 207697	10313846 10313852	15.25.03.1308	80 - 110	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10L	26 2 x 26 36 x 2 x 26	207659 207666	10306409 10313869	15.25.03.2359	100 - 150	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10XL*	14 4 x 14 24 x 4 x 14	207635 207642	10313875 10313881	-	150 - 175	Polypropylen-Vlies und Polyethylen-Folie	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	Ja - Seitenflügel	✓	✓

* Nur in der Schweiz und Österreich erhältlich.



Quick-Dry

Die Quick-Dry-Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt Urin schnell auf und leitet ihn von der Haut weg in den Saugkern. Dort wird der Urin sicher gebunden und eingeschlossen und somit die Haut vor Rücknässe geschützt - zur Gesunderhaltung der Haut. Das Produkt kann mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen - für optimalen Auslaufschutz.



Hautfreundlicher pH-Wert

Die Saugkern-Technologie mit Aktivfasern in der Aufnahmeschicht sorgt für einen natürlichen, hautfreundlichen pH-Wert von ca. 4,5. Dies hilft, die Haut zu schützen und sie gesund zu erhalten.



Atmungsaktiv

Atmungsaktives Material lässt die Luft zirkulieren, was zur Gesunderhaltung der Haut beiträgt.



Aktivzone

Die Aktivzone im Schrittbereich des Produktes sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Gesunderhaltung der Haut und hervorragenden Auslaufschutz.



Geruchsbindung

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch wird das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.



Die Hautverträglichkeit von Attends Slip Regular ist dermatologisch bestätigt durch proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung. (außer Slip Regular 9XS und 10XL)