

Ambu® Perfit ACE® & Mini Perfit ACE®



Die wichtigsten Vorteile

- Flache Bauweise ermöglicht platzsparende Lagerung
- CT, MR und Röntgen kompatibel*
- Einfaches und exaktes Anpassen mittels seitlicher Feinrasterung
- Standard-Größenmarkierungen bei beiden Zervikalstützen
- Kinnstück mit Trachea- und Drainageöffnung für ein erleichtertes Atemwegsmanagement
- Halterung für Nasensonden und Tubusfixierungen
- Einfache Intubationsmöglichkeit
- Ohne Naturlatex
- Einwegprodukt
- Standardmäßig werden beide Zervikalstützen in der kleinsten Größeneinstellung geliefert

Ambu® Perfit ACE® & Mini Perfit ACE®

28 mögliche Größen durch 2 Halskrausen

Die Ambu Perfit ACE ist eine einzigartig verstellbare Zervikalstütze. In Verbindung mit der Mini Perfit ACE ermöglichen diese beiden Halskrausen zusammen 28 verschiedene Größeneinstellungen, um sicherzustellen, dass es für jeden Patienten eine effektive und akkurate Passform gibt.

Die Zervikalstütze ist komplett flach verpackt und hat ein einzigartiges Kinnstück, welches das Atemwegsmanagement erleichtert. Die Ambu Perfit ACE ist eine größenverstellbare Einweg-Zervikalstütze für Erwachsene zur Immobilisierung der Halswirbelsäule.

Die individuell einstellbare Zervikalstütze umfasst 16 mögliche Größeneinstellungen und ist somit für jeden erwachsenen Patienten geeignet.

*Verzerrungen oder Schatten können abhängig von den Einstellungen des Bildgebungsgerätes auf den Bildern erscheinen.

Die Ambu Perfit ACE besitzt Verriegelungen, die es dem Ersthelfer ermöglichen, die Zervikalstütze genau an die Anatomie des Patienten anzupassen. Zwei Verriegelungsknöpfe stabilisieren die Zervikalstütze während der Größeneinstellung an der richtigen Position.


Die Ambu Mini Perfit ACE ist eine individuell einstellbare Zervikalstütze mit 12 möglichen Größeneinstellungen und ist somit für Kinder und kleine Erwachsene geeignet.

Technische Daten


Ambu Perfit ACE	
Justierbare Größen	Halslos, Kurz, Normal, Groß
Feineinstellung	16-fache Rasterung
Abmessungen	554 x 215 x 14 mm
Gewicht	200 g
Farbe	Weiß/hellgrau
Ambu Mini Perfit ACE	
Justierbare Größen	Säuglinge, Kleinkinder, kleine Erwachsene
Feineinstellung	12-fache Rasterung
Abmessungen	447 x 188 x 14 mm
Gewicht	100 g
Farbe	Gelb/hellgrau



Ambu® Perfit ACE®

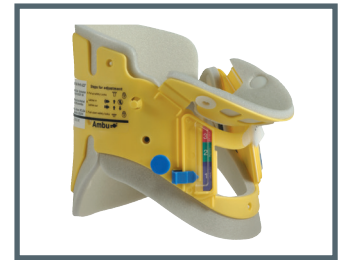

Ambu® Mini Perfit ACE®

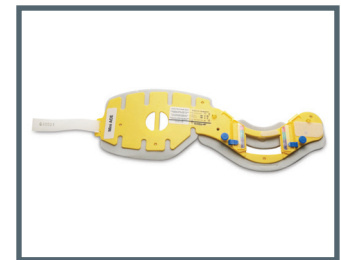

Ambu® Perfit ACE®
Ambu® Mini Perfit ACE®

Material

Produkt	Material
Ambu Perfit ACE	
weiß/hellgraues Plastik	Polypropylen
Schaumstoff	Polyethylen
Ambu Mini Perfit Ace	
gelb/hellgraues Plastik	Polypropylen
Schaumstoff	Polyethylen

Bestellinformationen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
002 810 001	Ambu Perfit ACE, justierbar von Größe 3 - 6
000 281 107	Ambu Mini Perfit ACE, justierbar von Größe 1 - 3
264 208 020	Ambu Perfit ACE Military, olivgrün, justierbar von Größe 3 - 6

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 72 25 20 00
Fax +45 72 25 20 50
www.ambu.com

Ambu GmbH
In der Hub 5
D-61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de