



75/387027/1011

DE – Gebrauchsanweisung

Aqua B. Braun

Spüllösung,
steril und endotoxinfrei
Zusammensetzung
1000 ml Lösung enthalten:
Aqua ad iniectabilia 1000 ml
Anwendungsgebiete
Zur Spülung und Reinigung bei
operativen Eingriffen
Zur Spülung von Wunden und
Verbrennungen
Zur Anfeuchtung von Wundtam-
ponaden, Tüchern und Verbän-
den
Zur Spülung und Reinigung von
Blasenkathetern
Zur Spülung und Reinigung bei
Stomaversorgung
Zur Spülung und Reinigung von
Instrumenten und Zubehör
Zur Befüllung von Atemluftbe-
feuchtungsgeräten (Behälter ab
100 ml werden empfohlen)
Zur mechanischen Augenspülung
(30 ml Behälter werden empfoh-
len).
Dosierung
Die Flüssigkeitsmenge richtet
sich nach der jeweiligen
Situation.
Überdosierung
Bei einer Überdosierung im Rah-
men von Wundspülungen und
intraoperativer Anwendung kann
es zur Absorption von Spülflüs-
sigkeit kommen, die zu einer
Hypervolämie im Sinne einer
hypotonen Hyperhydratation
(Hyponatriämie) führen kann.
Symptome einer Hyperhydratati-
on sind Kopfschmerz, Brechreiz,
Unruhe und Desorientierung. In
schweren Fällen kann es zu
komaähnlichen Zuständen kom-
men.

**Gegenmaßnahmen bei Überdo-
sierung**
Abbruch der Spülung, Korrektur
des Wasser- und Elektrolythaus-
halts entsprechend der jeweili-
gen klinischen Situation.
**Warnungen und
Vorsichtsmaßnahmen**
Nicht zur Infusion verwenden.
Lösung ist nur zu verwenden,
wenn Verschluß unverletzt und
Lösung klar ist.
Angebrochene Behältnisse dür-
fen nicht aufbewahrt werden,
Restmengen müssen verworfen
werden.
Die Wiederverwendung von
Geräten für den einmaligen
Gebrauch stellt ein potenzielles
Risiko für den Patienten oder den
Anwender dar. Sie kann eine
Kontamination und/oder Beein-
trächtigung der Funktionalität
zur Folge haben. Kontamination
und/oder eingeschränkte Funk-
tionalität des Gerätes können zu
Verletzung, Erkrankung oder Tod
des Patienten führen.
Für Kinder unzugänglich aufbe-
wahren.
Aqua B. Braun darf nicht für
intraathekale Spülverfahren ver-
wendet werden.
Unerwünschte Nebenwirkungen
Sind nicht bekannt.
Verfalldatum
Die Lösung darf nach dem auf
dem Etikett angegebenen Ver-
falldatum nicht mehr verwendet
werden.
Datum der letzten Überarbeitung
0310

DK – Brugsanvisning

Aqua B. Braun

Skyllevæske,
steril og endotoksinfri
Indhold
1000 ml indeholder:
Aqua ad iniectabilia 1000 ml
Indikationer
Til skylning og rensning under
kirurgiske indgreb
Til skylning af sår og brandsår
Til fugtning af sårtamponader,
klæde og forbindinger
Til skylning og rensning af blære-
katetre
Til skylning og rensning ved
stomabehandling
Til skylning og rensning af
instrumenter og udstyr
Til fyldning af respirationsluftbe-
fugtere (brug af beholder på 100
ml eller større anbefales)
Til mekanisk skylning af øjnene
(brug af beholder på 30 ml anbe-
fales)
Dosering
Mængden af væske afhænger af
situationen.
Overdosering
Overdosering i forbindelse med
sårskylning og intra-operativ
applikation kan føre til absorbe-
ring af skyllevæsken, hvilket kan
føre til hypervolaemia i form af
hypoton hyperhydratation.
**Modtræk i tilfælde af overdo-
sering**
Afbryd skylningen. Korrektion af
væske- og eletrolytbalancen
afhængig af den specifikke klini-
ske situation.

**Advarsler og forsigtighedsreg-
ler**
Må ikke anvendes til infusion.
Må kun anvendes såfremt
væsken er klar, og plomberingen
er ubrudt.
Åbne beholdere må ikke gemmes.
Overskydende væske skal fjernes.
Genanvendelse af engangsreme-
dier medfører en potentiel risiko
for patienten og brugeren. Det
kan føre til kontaminering
og/eller reduceret funktion. Kon-
taminering af og/eller reduceret
funktion i remediet kan medføre
skade, sygdom eller død for pati-
enten.
Opbevares utilgængeligt for
børn.
Aqua B. Braun må ikke anvendes
til intratekale skylningsprocedu-
rer.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Anvendes inden
Se beholderens etiket
Dato for sidste revision
0310

ES – Instrucciones de uso

Aqua B. Braun

Solución para irrigación,
estéril y libre de endotoxinas
Composición
1000 ml de solución contienen:
Aqua para inyectables c.s.
Indicaciones
Para irrigación y limpieza duran-
te una intervención quirúrgica
Para irrigación de heridas y que-
maduras
Para humedecer heridas cerra-
das, vendajes
Para enjuague y limpieza de los
catéteres para vejiga
Para irrigación y limpieza en cui-
dados de estomas
Para enjuague y limpieza del
equipo e instrumental
Para rellenar humidificadores
respiratorios (se recomienda uti-
lizar contenedor de 100 ml o
superior)
Para irrigación mecánica de los
ojos (se recomienda utilizar con-
tenedor de 30 ml).
Dosis
La cantidad de solución a irrigar
depende de cada situación parti-
cular.
Sobredosis
Una sobredosis durante la irriga-
ción de una herida y una aplica-
ción intra-operativa puede llevar
a la absorción del fluido para
irrigación. Esto puede provocar
una hipervolemia en forma de
hiperhidratación hipotónica
(hiponatremia).
Dolores de cabeza, náuseas,
inquietud y desorientación son
síntomas de una hiperhidrata-
ción.

En casos graves pueden aconte-
cer estados similares a coma.
Medidas en caso de sobredosis
Interrumpir la irrigación, corregir
los balances de agua y electrolí-
tico, con dependencia de cada
situación clínica particular.
Advertencias y precauciones
No utilizar para infusión.
La solución sólo debe utilizarse si
el precinto está intacto y la solu-
ción es clara.
Una vez abierto, el remanente
debe desecharse.
La reutilización de dispositivos
de un solo uso supone un riesgo
potencial para el paciente o el
usuario. Puede producir conta-
minación o mal funcionamiento
de la capacidad funcional. La
contaminación o la limitación en
el funcionamiento del dispositivo
pueden ocasionar lesión, enfer-
medad o incluso la muerte del
paciente.
Manténgase fuera del alcance de
los niños.
Aqua B. Braun no debe emplear-
se para procedimientos de irriga-
ción intratecal.
Efectos secundarios
No se han descrito.
Caducidad
La solución no debe ser utilizada
después de la fecha de caducidad
que figura en la etiqueta.
Fecha de la última revisión
0310

FR – Mode d'emploi

Aqua B. Braun

Solution d'irrigation,
stérile et exempt d'endotoxines
Composition
Eau p.p.i. 1000 ml
Indications
Irrigation et lavage lors d'inter-
ventions chirurgicales
Irrigation des plaies et des brû-
lures humidification des plaies,
champs opératoires et panse-
ments
Irrigation et lavage des cathéters
vésicaux
Irrigation et lavages stomacaux
Lavage du matériel chirurgical
Remplissage des réservoirs des
respirateurs (l'utilisation d'un
containeur de volume supérieur
ou égal à 100 ml est recomman-
dée)
Irrigation oculaire (l'utilisation
de l'Ecolav 30 ml est recomman-
dée)
Posologie
Les quantités de solution utili-
sées dépendent de la situation.
Surdosage
Le surdosage lors de l'irrigation
des plaies ou lors d'applications
per-opératoires peut conduire à
la résorption de la solution. Ceci
peut entraîner une hypervolémie
sous la forme d'une hyperhydra-
tation hypotonique (hyponatré-
mie).
Maux de tête, nausées, vomisse-
ments et désorientation sont des
symptômes de l'hyperhydrata-

tion. Dans des cas sévères, il peut
y avoir apparition de coma.
**Conduite a tenir en cas de sur-
dosage**
Arrêt de l'irrigation.
Correction de la balance hydro-
électrolytique.
Mises en garde et précautions
Ne pas injecter.
Vérifier l'intégrité du contenant
et la limpidité de la solution.
Jeter tout contenant partiellement
utilisé.
La réutilisation d'éléments à
usage unique est dangereuse
pour le patient ou l'utilisateur.
L'élément peut être contaminé
et/ou ne plus fonctionner correc-
tement, ce qui peut entraîner
chez le patient des blessures et
des maladies potentiellement
mortelles.
Ne pas laisser à la portée des
enfants.
Aqua B. Braun ne doit pas être
utilisé dans des procédures d'irri-
gation intrathécale.
Effets indésirables
Pas d'effets indésirables connus.
Date de peremption
La solution ne doit pas être utili-
sée après la date figurant sur
l'étiquette.
Date de revision
0310

FI – Käyttöohje

Aqua B. Braun

HuuhTELuneste,
steriili ja endotoksiiniton
Koostumus
1000 ml huuhTELunestettä
sisältää:
Injektionesteisiin käytettävä vesi
1000 ml
Indikaatiot
HuuhTELuun ja puhdistukseen
kirurgisten toimenpiteiden yhtey-
dessä
Haavojen ja palovammojen huuh-
teluun
Haavanhoidossa liinojen kostut-
tamiseen
Rakkokatetrien huuhTELuun ja
puhdistamiseen
HuuhTELuun ja puhdistukseen
avannehoidossa
Instrumenttien ja laitteiden
huuhTELuun sekä puhdistukseen
Hengitysilman kostuttajien täyt-
töön (suositellaan vähintään 100
ml pakkauksen käyttöä)
Silmähuhteena (30 ml pakkaus)
Annostus
Tarvittava huuhTELunesteen
määrä riippuu tilanteesta.
Yliannostus
Yliannostus haavan huuhTELun tai
muun toimenpiteen yhteydessä
voi johtaa huuhTELunesteen imey-
tymiseen. Tästä voi seurata hyper-
volemia hypotonisen hyperhyd-
raation (hyponatremia) muodosa.
Hyperhydraation oireita ovat
päänsärky, pahoinvointi, levottomuus
ja sekavuus.
Vakavissa tapauksissa saattaa
esiintyä koomaa muistuttavia
tiloja.

**Toimenpiteet yliannostuksen
yhteydessä**
HuuhTELunesteen käytön
keskeyttäminen, neste- ja elektro-
lyyttitasapainon korjaaminen riip-
puen potilaan klinisestä tilasta.
Varoitukset ja varotoimet
Valmistetta ei saa käyttää
infusionesteenä. Varmista enne-
navaamista, että pakkaus on
vahingoittumaton ja liuos
kirkasta.
Avattua pakkausta ei tule
säilyttää, käyttämättä jäänyt liuos
tulee hävittää.
Kertakäyttötuotteiden käyttämi-
nen uudelleen voi vaarantaa poti-
laan tai käyttäjän turvallisuuden.
Tämä saattaa johtaa kontaminaa-
tioon ja/tai toiminnallisuuden
heikkenemiseen. Laitteen konta-
minoituminen ja/tai rajoittunut
toiminta saattavat aiheuttaa
potilaan vahingoittumisen, sairastu-
misen tai kuoleman.
Ei lasten ulottuville.
Aqua B. Braun ei saa käyttää int-
ratekaalisiin huuhTELutoimenpi-
teisiin.
Haittavaikutukset
Valmistella ei ole tunnettuja
haittavaikutuksia.
Säilyvyys
Valmistetta ei tule käyttää
pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivämäärän
jälkeen.
Teksti tarkastettu
0310



GB – Information for use

75/387027/1011

Aqua B. Braun

Irrigation solution,
sterile and endotoxin-free

Composition
1000 ml solution contain:
Water for Injection 1000 ml

Indications

For irrigation and cleansing dur-
ing surgical intervention

For irrigation of wounds and
burns

For moistening wound tampon-
ades, cloths and dressings

For rinsing and cleansing of

bladder catheters

For irrigation and cleansing in
stoma care

For rinsing and cleansing of
instruments and equipment

For filling respiratory air humidi-
fiers (the use of container equal
or higher than 100 ml is recom-
mended)

For mechanical irrigation of the
eyes (the use of 30 ml container
is recommended)

Dosage

The amount of fluid depends on
the clinical condition.

Overdosage

Overdosage during wound irriga-
tion and intra-operative applica-
tion can lead to absorption of
irrigation fluid, that can lead to
hypervolaemia in the form of
hypotonic hyperhydration
(hyponatraemia).

Headache, nausea, restlessness
and disorientation are symptoms

of hyperhydration. In severe
cases coma-like states can occur.

**Countermeasures in cases of
overdosage**

Discontinuation of irrigation,
correction of the water and elec-
trolyte balance depending on the
particular clinical situation.

Warnings and precautions

Do not use for infusion.

Only use the solution if the seal
is undamaged and the solution is
clear.

Opened containers must not be
saved, quantities left over must
be discarded.

Re-use of single-use devices cre-
ates a potential risk of patient or
user. It may lead to contamina-
tion and/or impairment of func-
tional capability. Contamination

and/or limited functionality of
the device may lead to injury, ill-
ness or death of the patient.

Store out of reach of children.

Aqua B. Braun must not be used
for intrathecal irrigation proce-
dures.

Adverse side effects
None are known.

Expiry date
The solution must not be used
after the expiry date given on
the label.

Date of last revision
0310

IT – Istruzioni per l'uso

Aqua B. Braun

Soluzione per irrigazione,
sterile e privo di endotossine

Composizione
1000 ml di soluzione contengo-
no:
Acqua p.p.i. 1000 ml

Indicazioni

Per irrigazione e lavaggio duran-
te interventi chirurgici

Per irrigazione di ferite e ustioni

Per inumidimento di medicazio-
ni, tessuti e vestiti

Per la pulizia e il risciacquo di
cateteri vescicali

Per la pulizia e il risciacquo di
stomie

Per la pulizia e il risciacquo di
strumenti e apparecchiature

Per il riempimento di umidifica-
tori dell'aria di respirazione (si
consiglia l'uso del contenitore di
volume uguale o superiore a 100
ml)

Per irrigazione meccanica degli
occhi (si consiglia l'uso del con-
tenitore da 30 ml)

Dosaggio
La quantità di soluzione da uti-
lizzare varia a seconda dei casi.

Sovradosaggio
Il sovradosaggio durante l'irriga-
zione delle ferite e l'applicazione
intra-operatoria può portare
all'assorbimento della soluzione
di irrigazione che a sua volta può
causare ipervolemia sotto forma
di iperidratazione ipotonica (ipo-
natremia).

Cefalea, nausea, irrequietezza e
disorientamento sono sintomi di
iperidratazione. Nei casi gravi si
possono avere stati simili al
coma.

**Interventi in caso di sovrado-
saggio**
Interruzione dell'irrigazione, cor-
rezione del bilancio idro-elettrolitico,
a seconda della particolare
situazione clinica.

Avvertenze e precauzioni
Non usare per infusioni.
Usare solo se il sigillo è integro e
la soluzione è limpida.

Conservare in contenitori chiusi;
le quantità residue devono esse-
re eliminate.

Il riutilizzo di dispositivi monou-
so crea un potenziale rischio sia
per il paziente che per l'operato-
re. Può provocare contaminazio-
ne e/o riduzione della funziona-
lità del dispositivo, che possono
dar luogo a lesioni, malattie o
morte del paziente.

Tenere lontano dalla portata dei
bambini.

Aqua B. Braun non deve essere
utilizzato per procedure di irriga-
zione intratecale.

Controindicazioni
Non note.

Data di scadenza
La soluzione non deve essere uti-
lizzata dopo la data di scadenza
riportata in etichetta.

Data dell'ultima revisione
0310

NO – Brukerveiledning

Aqua B. Braun

Skyllevæske,
steril og endotoksinfri

Virkestoff og styrke
1000 ml væske inneholder:
sterilt vann til 1000 ml

Indikasjoner

Skylling og vasking ved kirurg-
iske inngrep

Skylling av sår og brannskader

Fukting av sårtamponger,
bandasjer og kompresser

Skylling og vasking ved stomier

Rensing og vasking av
instrumenter og utstyr

Fylling av respiratoriske
luftfuktere (det er anbefalt å
bruke pakninger på 100 ml eller
mer)

Mekanisk skylling av øyne (det er
anbefalt å bruke pakning på 30
ml)

Dosering
Avhengig av bruksområdet.

Overdosering
Overdosering ved sårskylling eller
ved tilførsel peroperativt, kan
føre til absorpsjon av
skyllevæsker. Dette kan føre til
hypervolemi og hypoton
hydrering (hyponatremi).

Symptomer er hodepine, kvalme,
uro og forvirring. I alvorlige til-
feller kan komaliknende tilstand-
er oppstå.

Tiltak ved overdosering
Avbryt behandlingen, korrigér
pasientens væske- og elek-
trolytt-balanse.

Advarsler og forholdsregler
Må ikke infunderes. Løsningen
kan kun brukes når forseglingen
er ubrutt og løsningen er klar.

Skyllevæsken må brukes innen 1
døgn etter anbrudd.

Gjenbruk av enheter til engangs-
bruk medfører risiko for pasient
eller bruker. Det kan føre til
kontaminering og/eller nedsatt
funksjonsevne.

Kontaminering
og/eller begrenset funksjonsevne
for enheten kan føre til skade,
sykdom eller død hos pasienten.

Oppbevares utilgjengelig for
barn.

Aqua B. Braun må ikke brukes til
intratekale skylleprosedyrer.

Kontraindikasjoner
Ingen kjente.

Holdbarhet
Holdbarhetsdato er angitt på den
enkelte pakning.

Siste oppdatering
0310

NL – Gebruiksaanwijzing

Aqua B. Braun

Spoelvloeistof,
steriel en endotoxinevrij

Samenstelling
1000 ml vloeistof bevat:
Water voor injecties 1000 ml

Indicaties

Voor het spoelen en schoonma-
ken tijdens chirurgische ingrepen

Voor het spoelen van
(brand)wonden

Voor het bevochtigen van wond-
verband en gazen

Voor het spoelen en schoonma-
ken van blaascatheters

Voor het spoelen en schoonma-
ken van stoma's

Voor het spoelen en schoonma-
ken van instrumenten en appa-
ratuur

Voor het vullen van bevochtig-
ingsapparatuur (het gebruik
van een container van 100 ml of
meer wordt aanbevolen)

Voor het mechanisch spoelen
van de ogen (het gebruik van een
30 ml flacon wordt aanbevolen)

Dosering
De hoeveelheid vloeistof hangt
af van de toepassing.

Overdosering
Overdosering tijdens wondspoel-
ing en intra operatieve toepas-
sing kan aanleiding geven tot
absorptie van de spoelvloeistof,
wat kan leiden tot hypervolemie
in de vorm van een hypotonische
hyperhydratie (hyponatriëmie).

Hoofdpijn, misselijkheid, onrust
en desoriëntatie zijn symptomen
van hyperhydratie.

In ernstige gevallen kan een
comateus beeld ontstaan.

Bij overdosering
Stoppen met het spoelen, correc-
tie van de water- en electroly-
tenbalans afhankelijk van klini-
sche situatie.

**Waarschuwingen en voorzor-
gen**
Niet gebruiken als infusievloe-
stof.

Vloeistof alleen gebruiken indien
de vloeistof helder en de verpak-
king ongeschonden is.

Voor éénmalig gebruik, eventuele
restanten dienen vernietigd te
worden.

Het opnieuw gebruiken van pro-
ducten voor eenmalig gebruik
creëert een mogelijk risico voor
de patiënt of de gebruiker. Het
kan leiden tot contaminatie
en/of beschadiging van het func-
tionele vermogen.

Contaminatie
en/of een beperkte functionali-
teit van het product kan leiden
tot letsel, ziekte of de dood van
de patiënt.

Buiten bereik van kinderen
bewaren.

Aqua B. Braun niet gebruiken
voor intrathecaal spoelen.

Bijwerkingen
Niet bekend.

Houdbaarheid
Niet gebruiken na de op de ver-
pakking aangegeven datum.

Datum laatste herziening
0310

PT – Instruções de uso

Aqua B. Braun

Solução de irrigação,
estéril e livre de endotoxinas

Composição
1000 ml de solução contém:
Água bidestilada para
preparações injectáveis 1000 ml

Indicações terapêuticas

Para irrigação e lavagem durante
intervenções cirúrgicas

Para irrigação de feridas e queima-
duras

Para humedecer feridas e tecidos

Para desobstrução e lavagem de
catéteres vesicais

Para irrigação e lavagem de estom-
as

Para lavagem de instrumentos e
equipamentos

Para enchimento de humidificado-
res de ar (recomenda-se o uso de
apresentações com volume igual
ou superior a 100 ml)

Para lavagem ocular (recomenda-
se o uso da apresentação de 30 ml)

Posologia usual
O volume de solução a utilizar
depende da situação em particular.

Sobredosagem
A sobredosagem durante a lava-
gem de feridas e a aplicação intra-
operatória pode levar à absorção
da solução de irrigação resultando
em hipervolemia na forma de
hiperhidratação hipotônica (hipo-
natrémia).

Cefaleias, náuseas, agitação e
desorientação são sintomas de
hiperhidratação. Em situações crí-
ticas podem ocorrer estados
comatosos.

**Medidas a adoptar em casos
de sobredosagem**
Parar a irrigação e fazer correcção

do equilíbrio hidro-electrolítico de
acordo com a situação clínica do
doente.

Avisos e precauções
Não utilizar em perfusão intrave-
nosa.

Rejeitar a solução caso se apresen-
te turva ou com sedimento ou se o
recipiente não estiver intacto.

Depois de aberta a embalagem, a
solução deve ser utilizada imedia-
tamente; rejeitar qualquer volume
residual da solução.

A reutilização dos dispositivos de
utilização única cria um risco
potencial para o doente ou para o
utilizador. Poderá levar à contami-
nação e/ou insuficiência na capa-
cidade funcional. A contaminação
e/ou a limitação da funcionalidade
do dispositivo poderá provocar
lesões, doença ou morte do doen-
te.

Manter fora do alcance das
crianças.

O Aqua B. Braun não deve ser uti-
lizado em procedimentos de irri-
gação intratecal.

Efeitos indesejáveis
Não existem efeitos indesejáveis
associados ao uso desta solução
desde que a sua aplicação seja
feita de modo correcto.

**Verificar o prazo de validade ins-
crito na embalagem. Não utilizar
após expirar o prazo de validade
indicado no rótulo.**

**Data da última revisão do folhe-
to:**
0310

SE – Bruksanvisning

Aqua B. Braun

Spolvätska,
steril och endotoxinfri

Innehåll
1000 ml innehåller:
Vatten till injektion

Indikationer

För spolning och rengöring under
kirurgiska ingrepp

För spolning av sår och bränn-
skador

För befuktning av sårtamponader
och kompresser

För sköljning och rengöring av
blåskatetrar

För spolning och rengöring under
stomivård

För sköljning och rengöring av
instrument och utrustning

För påfyllning av befuktningsap-
paratur (volym 100 ml och däre-
fter rekommenderas)

För spolning av ögon (30 ml
behållare rekommenderas)

Dosering
Mängden vätska beror på den
kliniska situationen

Överdosing
Överdosing vid sårrengöring
och operativa ingrepp kan leda
till absorption av spolvätska, som
i sin tur kan leda till hypervolemi
i form av hypoton hyperhydrer-
ing (hyponatremi).

Huvudvärk, illamående, oro och
desorientering är tecken på
hyperhydrering. I allvarliga fall
kan komaliknande tillstånd
inträffa

Motåtgärder vid överdosering
Avbryt spolningen, korrigera vat-
ten och elektrolytbalansen bero-
ende på den kliniska situationen

**Varningar och försiktighetsåt-
gärder**
Använd ej till infusion

Använd endast om förslutningen
är obruten och vätskan klar

Öppnade förpackningar får ej
sparas.

Överbliven vätska skall kasseras

Återanvändning av engångspro-
dukter utgör en potentiell risk för
patienten eller användaren. Det
kan leda till kontaminering
och/eller nedsättning av produk-
tens funktion. Om produkten är
kontaminerad och/eller har en
begränsad funktion kan det leda
till att patienten skadas, insjuk-
nar eller dör.


Förvaras oåtkomligt för barn

Aqua B. Braun får inte användas
för intratekal spolning.

Biverkningar
Inga kända

Hållbarhet
Får ej användas efter utgångsda-
tum på etiketten.

Senast reviderad
0310

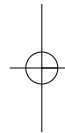

Schwarz
420x148 mm
75/387027/1011
Lätus: 130
Medizinprodukt

