

Askina® Finger Bob®

Der patentierte Fingerverband mit dem pfiffigen Dreh bringt Farbe in die Wundversorgung



Der Askina® Finger Bob® ist ein pfiffiger Fixierverband für Wundauflagen an allen Fingern.

Hierbei kommen alle Finger Bob®-Vorteile zur Geltung:

- in Sekunden applizierbarer Verband
- durch neuartige Wirkstruktur für jede Fingergröße und -stärke geeignet
- sichere Fixierung der Wundauflage
- farbige Ausführungen – speziell für Kinder

Askina® Finger Bob®

Der pfiffige Dreh macht
das Anlegen leicht.



Askina® Finger Bob®

Der Askina® Finger Bob® besteht aus einer elastischen Baumwoll-Viskose-Mischung, welche nicht so schnell verschmutzt und allergisch unbedenklich ist. Die innovative Wirkstruktur sorgt für eine sichere Fixierung des Verbandes am Finger. Selbst für Kinderfinger ist der Askina® Finger Bob® geeignet.


Neben dem Askina® Finger Bob® weiß gibt es die Packung Finger Bob® farbig, gemischt aus roten, blauen, pinkfarbenen, rosafarbenen, grünen und orangefarbenen Verbänden.

Askina® Finger Bob®	Packungsinhalt	PZN	Art.-Nr./REF
weiß, Packung zu 50 Stück	1 Packung	6874705	0904 4000
farbig, Packung zu 50 Stück	1 Packung	6874711	0904 4019
weiß, Packung zu 25 Stück	1 Packung	8605429	0904 4132
farbig, Packung zu 25 Stück	1 Packung	8605435	0904 4140
weiß, Packung zu 6 Stück	12 Packungen	6965023	0904 4027
farbig, Packung zu 6 Stück	12 Packungen	6965017	0904 4035
Aufsteller für je 2 Spenderpackungen (à 12 Packg. zu 6 Stück)	1 Stück	–	0904 4043


Askina® Finger Bob® – der pfiffige Dreh macht das Anlegen leicht




In seiner Form wird der Askina® Finger Bob® auf die Spitze des verletzten Fingers gesetzt.

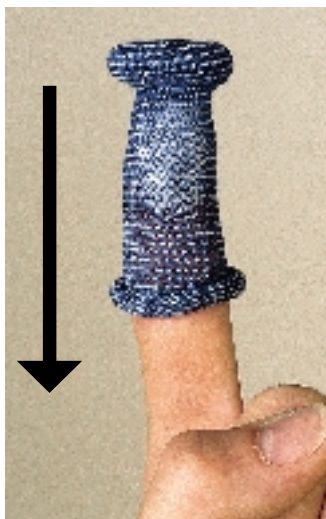

Der Askina® Finger Bob® wird über den Finger abgerollt.

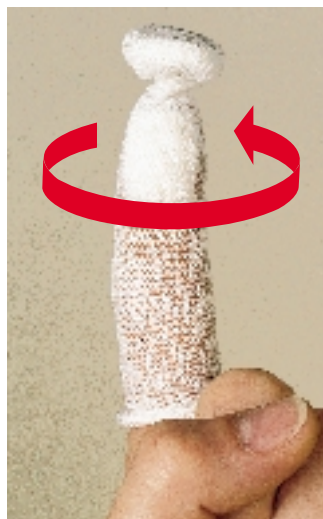

Nun wird er am oberen Ende in beliebiger Richtung eingedreht (eine Umdrehung genügt).

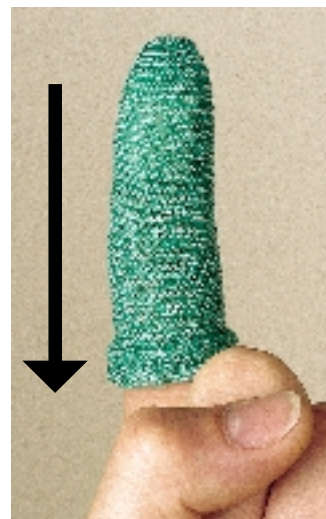

Jetzt nur noch das eingedrehte Ende abrollen. Fertig ist der Schnellverband.

B | BRAUN

B. Braun Petzold GmbH
Schwarzenberger Weg 73-79
D-34212 Melsungen

Tel (0 56 61) 71-0
Fax (0 56 61) 71 37 70