



## AUDIOMETER 800 M

*Bild mit Kopfhörern  
DD65-V2*



**Das Audiometer 800 M ist besonders für Profis der Arbeitsmedizin und Schulmedizin geeignet. Es verbindet sich leicht mit jedem PC mit USB-Anschluss.**

# AUDIOMETER 800 M




Professioneller Medizinprodukt für **Luftleitung**. Mit **Patienten-Antwort Taste** und **1 Kopfhörern von Radioear, nach Wahl**, geliefert : DD45, DD65-V2 oder DD45 mit Peltor Kappen



Geliefert mit **intuitiver und interaktiver Software**, auf USB-Stick, Ohne Begrenzung der Anzahl der Installationen oder der Gültigkeitsdauer.



- Exportieren im **XML-Format**
- Kompatibel mit den meisten, Software für die Arbeitsmedizin,
- Kompatibel **GDT-Schnittstelle + G 20 Lärm I und II**
- **Aufbau von Datenbanken** mit der Möglichkeit der **fusion und Synchronisieren**

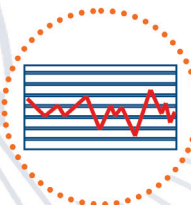

- Beihilfe für die **Auslegung der Audiogramme**,
- **Berechnung** von der Hörverlusten,
- **Festlegung der Schwellen** für die Hörbarkeit nach der «Hughson-Westlake»-Methode
- Integration eines **personalisierten Logos** und der **Unterschrift des Praktikers** in den Testbericht



Anschluss des Kopfhörers an das Audiometer mit 2 Einstecken, Jacks mono in 6,35 mm



Gebrauchsanweisungen im Pdf-Format und Online-Hilfe : Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch.

Bild mit Kopfhörern DD45



## 3-Jährige GARANTIE (Außer Kopfhörer) – FRANZÖSISCHE DESIGN UND HERSTELLUNG

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

- **Typ:** 4 – Screening und Kontrolle (gemäß EN 60645-1) Medizinische Normen EC-Kennzeichnung 0459 (G-MED) – Klasse IIa
- **Ausgang :** Luftleitung mit 2 Einstecken, Jacks mono in 6,35 mm, Kopfhörer von RADIOEAR zur Wahl: DD45, DD65-V2, DD45 mit „Peltor“ Kappen
- **Frequenzen Bereich (11 Werte) :** 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz ( +/- 1%)
- **Ausgangspegel :** von -10 HLdB bis 100 HLdB
- **Pegel-Schrittweite:** 5 dB
- **Spannungsversorgung :** Isolierte USB-Verbindung zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit (nach EN 60601-1)

- **Ton :** kontinuierlicher Klang oder gepulster Klang
- **Tests :** Manual – Automatisch / Normal und «Hughson Westlake» Methode/ Standard, Random und personalisiertes Szenario
- **Berechnung der Hörverluste :** Frühwarnindex – Durchschnittlicher Hörverlust + 3 Berechnungen zu schaffen: alle sind anpassbar
- **Mindestsystemanforderungen des PC :** 1 USB-Port, RAM: 1 Go, CPU: 1 GHz, Freier Speicherplatz auf der Festplatte: 50 Mo, grafische Auflösung: 1024 x 600. Windows 7, Windows 8, Windows 10.
- **Gesamtgewicht :** 1,5 Kg inklusive Zubehöres. Stoßschutzmittel Koffer 350 x 300 x 100mm

Electronica Medical bietet ein umfassendes Angebot an Screenings Audiometer an, die für die Schulmedizin und die Arbeitsmedizin geeignet sind.