



PROFESSIONELLE MEDIZINISCHE KÜHLBOXEN

SICHER TRANSPORTIEREN

TEMPERATURGEFÜHRTE LOGISTIKLÖSUNG

Beim Transport von Medikamenten wie lebensrettenden Impfstoffen ist eine zuverlässige und stabile Kühlkette eine Frage von Leben und Tod. Die Kühlgeräte von Dometic kühlen den Inhalt auf die eingestellte Temperatur herunter. Als Branchenexperten für professionelle Kühlung bieten wir eine ganze Palette branchenbesten Kühllösungen an, die auf Ihren speziellen Bedarf zugeschnitten werden können. Alle medizinischen und tragbaren Kühllösungen werden mit einem kundenspezifischen, individuellen Anforderungsbuch geliefert, um unseren hohen Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten und zu dokumentieren.



GOOD DISTRIBUTION PRACTICE FÜR TEMPERATUREMPFINDLICHE MEDIKAMENTE


Durch die EU-Richtlinie zur Good Distribution Practice (GDP) sind die Anforderungen für den Transport von Medikamenten weiter gestiegen. Bei besonders empfindlichen Produkten schreibt die Richtlinie eine lückenlose Dokumentation über die Einhaltung der vorgeschriebenen Temperatur im Verlauf der gesamten Kühlkette vor – auch bei extremen Umgebungstemperaturen. Datenlogger dienen zum Nachweis der Einhaltung der vorgeschriebenen Temperaturen.


 **DOMETIC**

DOMETIC CDF 18 PROFESSIONAL PAKET 1

KOMPAKTE KÜHLBOX MIT 1 FIXTEMPERATUR +5 °C
FÜR MEDIKAMENTE UND IMPFSTOFFE

DOMETIC COOLFREEZE CDF 18

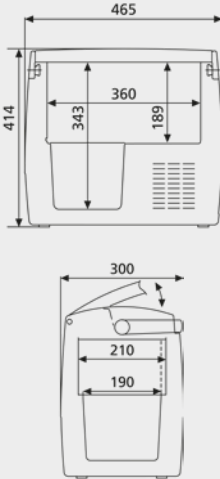MOBILE KOMPRESSOR-KÜHLBOX FÜR KÜHLUNG			
	Nutzzinhalt	ca. 18 Liter	
	Anschlussspannung	12/24 Volt DC	
	Temperatur	Fixtemperatur +5 °C	
	System	Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schiebeschalter einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/ automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Aluminium-Rollbond-Verdampfer	
	Kältemittel	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R 134a (32 g), CO2-Äquivalent: 0,046 t, GWP: 1430	
	Gewicht	ca. 9,5 kg	
	Qualitätsmerkmale	Deckel zum Hochklappen oder Abnehmen, stabiler Tragegriff, Stehhöhe für stehende 2-Liter-Flaschen	
	Lieferumfang	DC-Anschlusskabel	

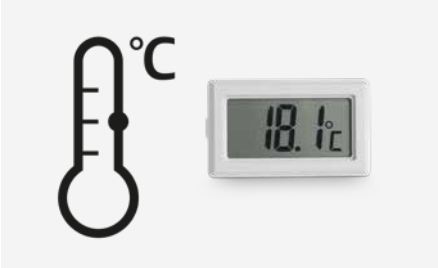

DT-02
Eine Fixtemperatur (nur Kühlung) mit digitaler Temperaturanzeige im Bereich von -18 °C bis +10 °C. Toleranz: ±2 °C.



DT-04
Hochleistungslüfter zum schnellen Kühlen oder Heizen und für eine gleichmäßige Luftzirkulation in der Box.



DT-17
Bei Abweichungen von der Soll-Temperatur um ±4,0 °C, die länger als 5 Minuten andauern, wird ein Alarm ausgelöst.

PAKET 1	Art.-Nr. 9600049509	UVP + MwSt in EUR 960,00 €
Lieferumfang:		
CDF 18 Professional, DT-02, DT-04, DT-17		



Zusätzliches Zubehör		
Modellname	Beschreibung	Art.-Nr.
PLB40	Tragbare Lithiumbatterie	9600012878
EPS 100	Netzadapter	9600000440




DOMETIC CFX 40W PROFESSIONAL PAKET 2

38 LITER KÜHLBOX MIT 2 FIXTEMPERATUREN +5 °C UND -20 °C
FÜR MEDIKAMENTE UND IMPFSTOFFE

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

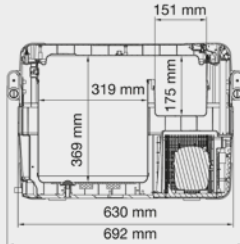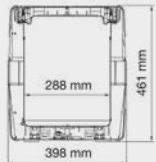
KOMPRESSOR-KÜHLBOX FÜR KÜHLUNG UND TIEFKÜHLUNG MIT CFX-SPEZIALELEKTRONIK			
	Nutzzinhalt	ca. 38 Liter	
	Anschlussspannung	12/24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC	
	Temperatur	Fixtemperaturen +5 °C und -20 °C	
	System	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Elektronik einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Aluminium-Rollbond-Verdampfer	
	Kältemittel	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R 134a (38 g), CO2-Äquivalent: 0,054 t, GWP: 1430	
	Gewicht	ca. 18,5 kg	
	Qualitätsmerkmale	Tiefkühltauglichkeit bis -20 °C, exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen, CFX-Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige, äußerst effizient und besonders leise im Betrieb, USB-Anschluss, Abflusstopen für die einfache Reinigung	
Lieferumfang	DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbinsatz, abnehmbare Tragegriffe		

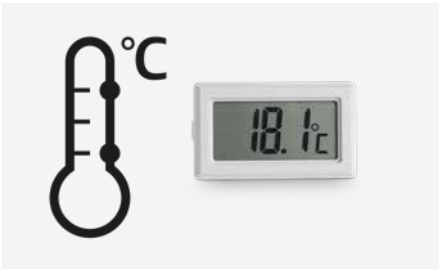

DT-09
Zwei Fixtemperaturen mit digitaler Temperaturanzeige



DT-04
Hochleistungslüfter zum schnellen Kühlen oder Heizen und für eine gleichmäßige Luftzirkulation in der Box.

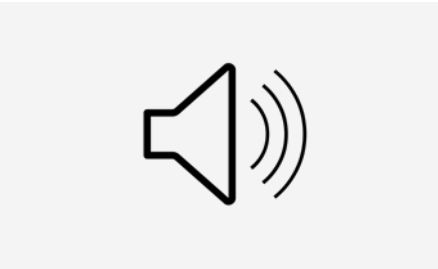

DT-17
Bei Abweichungen von der Soll-Temperatur um ±4,0 °C, die länger als 5 Minuten andauern, wird ein Alarm ausgelöst.

PAKET 2	Art.-Nr. 9600049510	UVP + MwSt in EUR 1330,00 €
Lieferumfang:		
CFX 40W Professional, DT-09, DT-04, DT-17		

Zusätzliches Zubehör		
Modellname	Beschreibung	Art.-Nr.
PLB40	Tragbare Lithiumbatterie	9600012878



OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR KOMPRESSOR KÜHLBOXEN

KUNDENSPEZIFISCHE ANPASSUNG AUF ANFRAGE



TRAGBARE LITHIUMBATTERIE AUSGEZEICHNETE LEISTUNG – ZUVERLÄSSIGE STROMVERSORGUNG

Die Dometic PLB40 Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet eine leistungsstarke mobile Stromversorgung. Eine einzige Aufladung reicht aus, um beispielsweise eine Dometic CFX 40W über einen Zeitraum von bis zu 40 Stunden zu versorgen. Entwickelt für elektrische Kühlboxen und andere 12-V-Geräte, wenn kein Stromnetz zur Verfügung steht. Dank geringem Gewicht und kompakten Maßen sind Sie unabhängig und kommen länger ohne feste Stromversorgung aus.

Art.-Nr. 9600012878

Weitere Informationen finden Sie unter dometic.com



EPS 100

Mit diesem preisgünstigen Netzadapter können Sie Kompressorkühlgeräte mit 24 V an Stromnetze mit 230 V anschließen. Er eignet sich besonders für Kühlboxen, die keinen Wechselstromanschluss haben.

Art.-Nr. 9600000440



ZUSATZMODULE FÜR KOMPRESSORKÜHLBOXEN



DT-02

Eine Fixtemperatur (nur Kühlung) mit digitaler Temperaturanzeige im Bereich von -18 °C (CDF)/-22 °C (CFX) bis +10 °C. Toleranz: ±2 °C. Prüfbericht im Lieferumfang enthalten. Wenn die eingestellte Temperatur über der erwarteten niedrigsten Umgebungstemperatur liegt, ist die Heizung DT-05 erforderlich.

Art.-Nr. 9600024731



DT-09

Zwei Fixtemperaturen (nur Kühlung) mit digitaler Temperaturanzeige im Bereich von -18 °C (CDF)/-22 °C (CFX) bis +10 °C. Bequemes Umschalten per Kippschalter. Toleranz: ±2 °C. Prüfbericht im Lieferumfang enthalten. Wenn die eingestellte Temperatur über der erwarteten niedrigsten Umgebungstemperatur liegt, ist die Heizung DT-05 erforderlich.

Art.-Nr. 9600024732




DT-04

Hochleistungslüfter zum schnellen Kühlen oder Heizen und für eine gleichmäßige Luftzirkulation in der Box (empfohlen für CFX-Serie). Nutzinhalt wird um ca. 100 x 100 x 30 mm (B x H x T) reduziert.

Art.-Nr. 9103540004

Achtung: Nur in Verbindung mit DT-02 / DT-09 sinnvoll

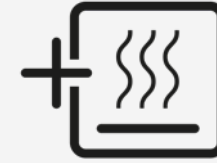

DT-05

Heizung für sicheren Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen (wenn die eingestellte Temperatur über der Umgebungstemperatur liegt). Inklusive Lüfter DT-04. Nur Betrieb mit 12 oder 24 Volt. Betrieb mit 230 Volt nicht möglich. Außer CFX 100W.

Art.-Nr. 9103540005



DT-17

Bei Abweichungen von der Soll-Temperatur um ±4,0 °C, die länger als 5 Minuten andauern, wird ein Alarm ausgelöst. Die Alarmfunktion wird 20 Minuten nach Einschalten der Kühlbox aktiviert. Nur in Verbindung mit DT-04 und DT-02 oder DT-09 erhältlich.

Art.-Nr. 9103540015



DT-07N

Temperaturdatenlogger als eine Einheit, ohne Software. Software-Download auf www.testo.com

Art.-Nr. 9103540007



DT-08N

Thermodrucker für eine grafische Darstellung des Temperaturverlaufs (verwendbar in Verbindung mit DT-07N).

Art.-Nr. 9103540008



DT-13

3-poliges Stecksystem zur Festinstallation der Stromversorgung. Max. Leistungsaufnahme: 25 A bei 12 Volt. Flachsteckanschlüsse (4 x 6,3 mm bzw. 1 x 4,8 mm)

Art.-Nr. 2225400001



DT-21

Einweg-Datenlogger zum Aufzeichnen der Temperatur in der Kühlbox. Aufzeichnungsdauer nach Aktivierung bis zu 90 Tage (USB- Schnittstelle)

Art.-Nr. 9103540134





ANFORDERUNGSBUCH

KÜHLLÖSUNG FÜR DEN TEMPERATURGEFÜHRTEN TRANSPORT VON ARZNEIMITTELN

Bei jeder Dometic Professional-Kühlbox für medizinische Zwecke werden in einem Anforderungsbuch alle Funktions- und Verwendungsinformationen angegeben. Unsere Produkte sind Hochleistungskompressor-Kühlboxen, die den Inhalt auch unter hohen Umgebungsbedingungen kalt halten. Sollte das Produkt in Anwendungen oder unter Bedingungen verwendet werden, die nicht im Anforderungsbuch angegeben sind, übernimmt Dometic keine Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Verwendung der Box verursacht werden.



WEITERE LÖSUNGEN FÜR DIE TEMPERATUREMPFINDLICHE LAGERUNG

VON MEDIZINISCHEN KÜHLSCHRÄNKEN BIS HIN ZU GEEIGNETEN GERÄTEN FÜR KRANKENWAGEN



HC 502FS

Medikamentenkühlschrank, Türanschlag
rechts, 43 l



FO800NC

Frontlader-Kühlcontainer, 605 l



CFX 100W PROFESSIONAL

Mobile Kompressorkühl- und -gefrierbox,
88 l

ENTDECKEN SIE DAS GESAMTE SORTIMENT AUF DOMETIC.COM

IHR DIREKTER ANSPRECHPARTNER



Wolfgang Heck

Tel +49 (0) 2572 879 237
Mail wolfgang.heck@dometic.com

Verkaufsteam Profikühlung

Tel: +49 (0) 2572 879 194
Mail: profikuehlung@dometic.com

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de
Net dometic.com

