

Farbiger Infusionsständer

Verkehrsrot (RAL 3020) beschichtet


I-N71121

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich	Kinderstation, Normalstation
Material	Stahl beschichtet
Farbe	Schwarz
Kunststoffteile	Kunststoff 4 90° zueinander
Infusionshalterung	Schraubhöhenverstellung
Anzahl der Haken	1.270 mm Ø18 mm Ø25 mm
Anordnung der Haken	1.000 mm 25 x 25 mm
Art der Höhenverstellung	Unbeschwert Ø635 mm
Minimale Länge/Höhe	Doppelaufrollen Ø50 mm
Innenrohrdurchmesser	Ja
Außenrohrdurchmesser	9.5
Länge Außenrohr	8
Auslegerprofil	2
Fußbeschwerung	
Fußgröße	Rollentyp
Rollendurchmesser	
Sterilisierbares Abtropfglas	
Gesamtzuladung (kg)	
Zuladung pro Aufhängung (kg)	
Zuladung pro Haken (kg)	

VERPACKUNGSEINHEIT: *

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

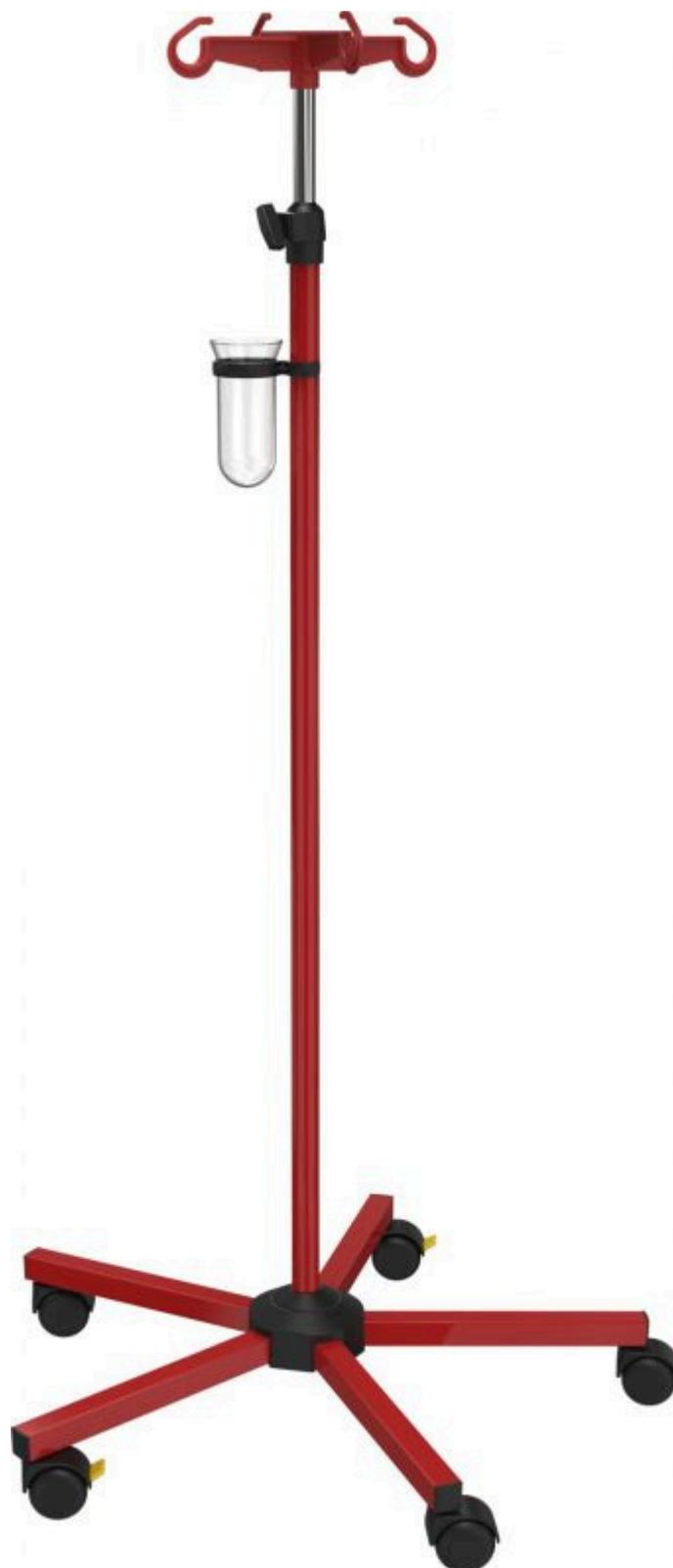

Hochglanzverchromt
3-Schicht-System



Made in
Germany
viele Varianten



Anwendung

optimale
Hygieneigenschaften
(Wischdesinfektion)

sehr einfache und schnelle
Montage durch Stecksystem
mit nur 1 Schraube

komfortable
Höhenverstellung mittels
Schraubhöhenverstellung
mit integriertem,
oberflächenschonendem
Formklemmelement



Technik

Alle Kunststoffteile sind
lichtecht

Rollen mit spurloser
Lauffläche

Die integrierte
Auszugsbegrenzung
verhindert das Trennen der
verstellbaren Rohre

Sicherheitsflaschenkreuz
nach DIN ISO 15375
glanz- und UV-beständige
Rohr-Oberfläche
(Doppelnickel/ Chrom-
Schicht - Schichtdicke ca.
20 µm)

sehr hoher
Korrosionsschutz durch 3-
Schicht-Verfahren

hervorragende
Salzsprühnebeltest-
Beständigkeit

das Eintreten von
hygienisch sensiblen
Flüssigkeiten wird durch die
patentierte Dichtkappe
verhindert



Ökonomie

Kompakte Verpackung führt
zur kostengünstigen
Versendung



Sicherheit

Die Ausleger sind mit
Stopfen aus Kunststoff
verschlossen (keine
Verletzungsgefahr)

Geringe Klemmgefahr beim
Ein- und Ausfahren des
Statives dank eingebautem
Sicherheitsabstand

Keine Verletzungsgefahr
durch abgerundete Form
der Flaschenhaken

Die Geometrie der Haken
verhindert das Herausfallen
der Infusionsflasche