

Infusionsständer Normalstation

Verkehrsgrün (RAL 6024) beschichtet


I-N91121

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich		Kinderstation, Normalstation
Material	Farbe der	Stahl beschichtet Schwarz
Kunststoffteile		Kunststoff 4 90° zueinander
Infusionshalterung		Schraubhöhenverstellung
Anzahl der Haken		1.270 mm Ø18 mm Ø25 mm
Anordnung der Haken		1.000 mm 25 x 25 mm
der Höhenverstellung	Art	Unbeschwert Ø635 mm
		Doppelaufrollen Ø50 mm
Minimale Länge/Höhe		Ja
Innenrohrdurchmesser		9.5
Außenrohrdurchmesser		8
Länge Außenrohr		2
Auslegerprofil		
Fußbeschwerung		
Fußgröße Rollentyp		
Rollendurchmesser		
Sterilisierbares Abtropfglas		
Gesamtzuladung (kg)		
Zuladung pro Aufhängung (kg)		
Zuladung pro Haken (kg)		

VERPACKUNGSEINHEIT: *


VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

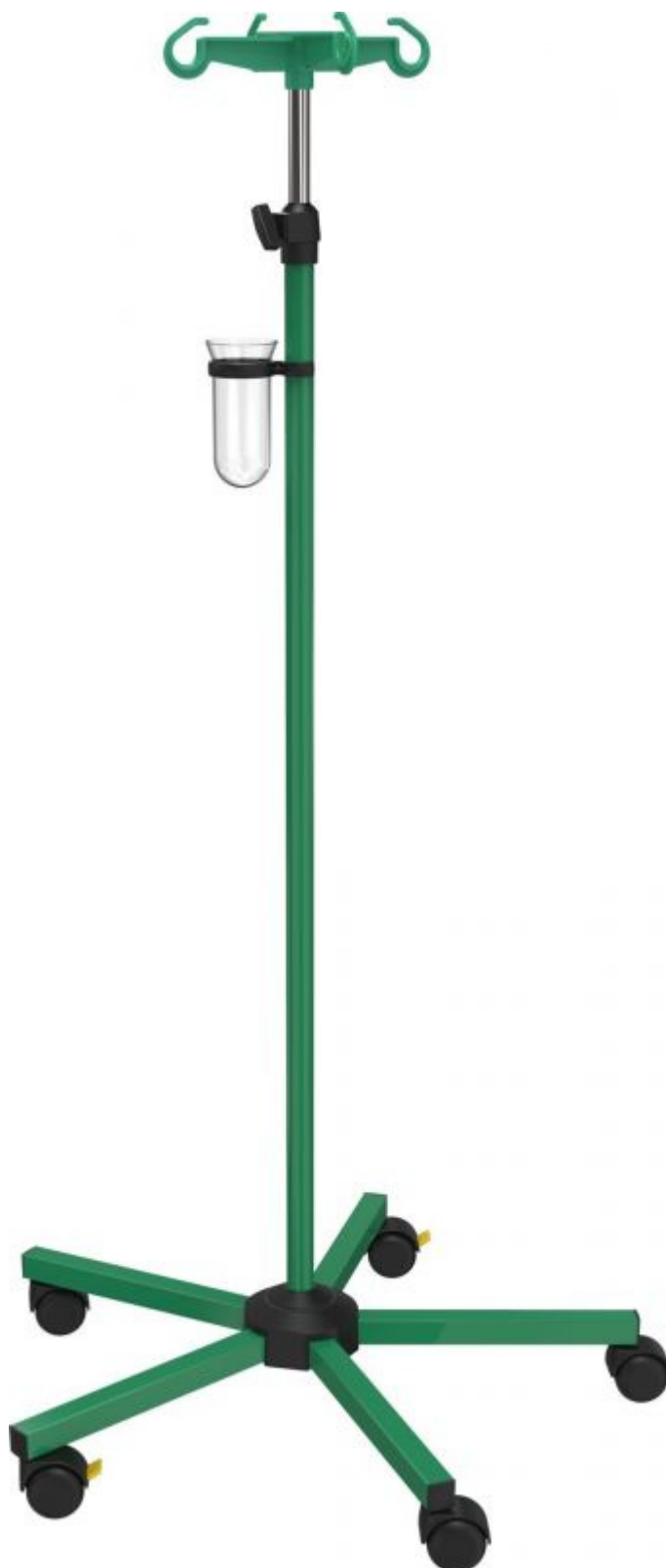

Hochglanzverchromt
3-Schicht-System



Made in
Germany
viele Varianten

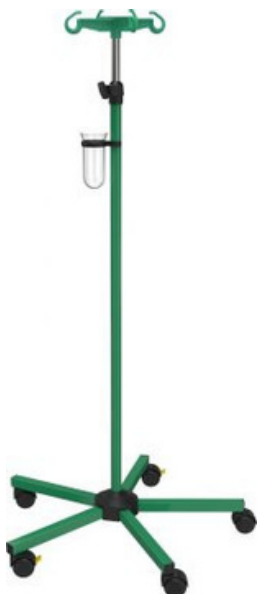

Anwendung

optimale
Hygieneeigenschaften
(Wischdesinfektion)

sehr einfache und schnelle
Montage durch Stecksystem
mit nur 1 Schraube

komfortable
Höhenverstellung mittels
Schraubhöhenverstellung
mit integriertem,
oberflächenschonendem
Formklemmelement



Technik

Alle Kunststoffteile sind
lichtecht

Rollen mit spurloser
Lauffläche

Die integrierte
Auszugsbegrenzung
verhindert das Trennen der
verstellbaren Rohre

Sicherheitsflaschenkreuz
nach DIN ISO 15375

glanz- und UV-beständige
Rohr-Oberfläche
(Doppelnickel/ Chrom-
Schicht - Schichtdicke ca.
20 µm)

sehr hoher
Korrosionsschutz durch 3-
Schicht-Verfahren

hervorragende
Salzsprühnebeltest-
Beständigkeit

das Eintreten von
hygienisch sensiblen
Flüssigkeiten wird durch die
patentierte Dichtkappe
verhindert



Ökonomie

Kompakte Verpackung führt
zur kostengünstigen
Versendung



Sicherheit

Die Ausleger sind mit
Stopfen aus Kunststoff
verschlossen (keine
Verletzungsgefahr)

Geringe Klemmgefahr beim
Ein- und Ausfahren des
Statives dank eingebautem
Sicherheitsabstand

Keine Verletzungsgefahr
durch abgerundete Form
der Flaschenhaken

Die Geometrie der Haken
verhindert das Herausfallen
der Infusionsflasche