

Mobile elektronische Säuglingswaage

seca 336 



Handlich und leicht für den mobilen medizinischen Einsatz . Komfortable Wiegemulde .
Große, gut ablesbare LCD-Anzeige . Verlässliche Ergebnisse durch automatische Dämpfung .
Optional mit Messstab seca 232

Weil Babys sich bewegen – und Ärzte beweglich sein müssen. Die mobilen Säuglingswaagen mit Bewegungsdämpfung.

Moderne Technologie nützt nur dann etwas, wenn sie auch den Alltagstest besteht. Die elektronische Säuglingswaage seca 336 hat die nötigen Details, mit denen der Alltag in Praxis und Krankenhaus zukünftig leichter wird: Einfach in der Bedienung, mobil und langlebig zugleich erfüllt sie alle Voraussetzungen für die ideale Waage in der Pädiatrie.



Handlich und leicht für den mobilen medizinischen Einsatz

Mit einem Eigengewicht von nur 3,5 kg ist diese Waage ein wahres Leichtgewicht ihrer Klasse. Der seitlich integrierte Tragegriff erleichtert den Transport. Praktisch außerdem: Die flache und damit platzsparende Form, z. B. für die Lagerung in der Schublade von Wickeltischen. In der optional erhältlichen Tasche seca 428 lässt sich die Waage unterwegs sicher verstauen.




Komfortable Bedienung durch großzügige Wiegemulde und gut ablesbare LCD-Anzeige

Viel Platz zum Wohlfühlen und rundherum gut aufgehoben ist das Baby in der extra großen und bequemen Wiegemulde der seca 336. Größere Babies oder Kleinkinder können im Sitzen gewogen werden. Der ermittelte Messwert wird auf einer hell erleuchteten LCD-Anzeige angezeigt und zwei Minuten lang festgehalten. Die automatische Abschaltautomatik sichert einen garantiert energiesparenden Betrieb.



Verlässliche Ergebnisse durch automatische Dämpfung

Absolute Präzision in allen Situationen: Ausgestattet mit einer hochsensiblen Wiegetechnologie und der speziellen seca Dämpfung, sind exakte Ergebnisse für die seca 336 selbstverständlich. Selbst bei unruhigen Babys.

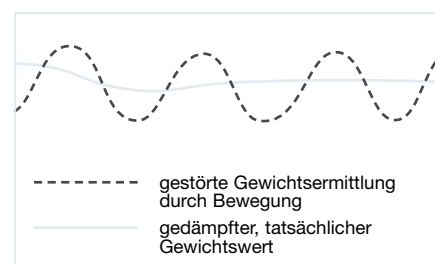

Optional mit Messstab 232

Mit der Montage des optional erhältlichen Messstabes seca 232 wird die Säuglingswaage seca 336 zu einer zeitsparenden kombinierten Mess- und Wiegestation.



Technische Daten

seca 336

Tragkraft: 15 kg

Teilung: 10 g

Maße (BxHxT): 640 x 105 x 300 mm

Eigengewicht: 3,5 kg

Stromversorgung: Batterien / Netzgerät optional

Eichklasse: 

Funktionen: TARA, HOLD

Optional: Messstab seca 232, Kopfanschlag

seca 419, Transporttasche seca 428, Netzgerät