

HeartSine® samaritan® PAD 350P/360P AEDs

Halbautomatischer/Vollautomatischer
Ersthelfer-Defibrillator

Datenblatt

Lebensrettende Technologie für öffentliche Bereiche. Kompakt und einfach zu bedienen

Jedes Jahr sind Millionen Personen weltweit von plötzlichem Herztod betroffen - ohne jegliche Warnzeichen und Symptome.¹ Eine sofortige Behandlung ist lebensrettend. Die Überlebenschancen des Opfers nehmen mit jeder Minute ohne Behandlung dramatisch ab.² Dies bedeutet, dass ein automatisierter externer Defibrillator (AED) zur Hand sein muss, der einfach bedienbar und schockbereit ist.

Der halbautomatische samaritan PAD 350P (SAM 350P) und der vollautomatische samaritan PAD 360P (SAM 360P) von HeartSine bieten hohen Schutz vor Umgebungseinflüssen, in einem benutzerfreundlichen System im kleinstmöglichen und leichtesten Gehäuse unter führenden AEDs.

Der vollautomatische SAM 360P erfasst Bewegungen, wie etwa die Durchführung einer HLW oder Verlagerung des Patienten, um möglichst zu vermeiden, dass der Ersthelfer den Patienten vor der Schockabgabe berührt.



Schockbereit



Spezielles Pediatric-Pak

Stellt sicher, dass die in den Richtlinien empfohlene Energiemenge für Kinder zwischen 1 und 8 Jahren, oder mit einem Körpergewicht bis zu 25 kg abgegeben wird.



Maximaler Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

Schutzart IP56, eine der branchenweit höchsten Schutzarten.



Klinisch validierte Technologie³

Fortschrittliche Elektrodentechnologie und biphasische SCOPE Technologie, eine ansteigende Niedrigenergie-Wellenform, die sich automatisch an die Patientenimpedanz anpasst.



Maximale Mobilität

Der leichteste und kompakteste AED unter den Marktführern lässt sich einfach transportieren und braucht wenig Platz.

Einfach verständliche visuelle und Sprachanweisungen



Benutzerfreundlich

Einfach verständliche visuelle und Sprachanweisungen leiten den Ersthelfer durch den gesamten Wiederbelebungsprozess, einschließlich HLW.



Ein- oder Zwei-Tasten-Betrieb

Einfache Bedienung mit nur einer Taste, der ON/OFF-Taste (und der SHOCK-Taste auf dem SAM 350P).



Automatische Schockabgabe / Bewegungserkennung

Der vollautomatische SAM 360P* erfasst Bewegungen wie etwa die Durchführung einer HLW oder Verlagerung des Patienten, um möglichst zu vermeiden, dass der Ersthelfer den Patienten vor der Schockabgabe berührt.



Einsatzbereit

Die Statusanzeige blinkt, um darauf hinzuweisen, dass das System den automatischen wöchentlichen Selbsttest bestanden hat und einsatzbereit ist.

Einfache Instandhaltung



Zwei Teile, ein Verfallsdatum

Das innovative Pad-Pak, eine Einweg-Kassette mit Batterie und Elektroden mit nur einem Verfallsdatum sorgt für eine einfache, verschlankte Wartung alle vier Jahre.




Minimale Betriebskosten

Mit seiner Haltbarkeitsdauer von vier Jahren ab Herstellerdatum kann das Pad-Pak Einsparungen gegenüber anderen Defibrillatoren bieten, bei denen Batterie und Elektroden separat ersetzt werden müssen.



8 Jahre Garantie

Der AED bietet eine beschränkte Garantie von 8 Jahren.

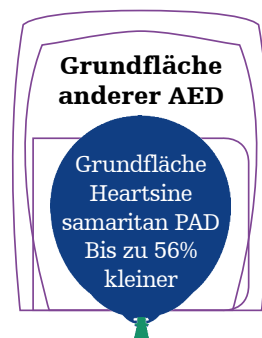

* Warnung: Der SAM 360P ist ein vollautomatischer Defibrillator. Die Schockabgabe an den Patienten erfolgt bei Bedarf OHNE Betätigung des Geräts durch den Benutzer.

Technische Daten

Defibrillator
Wellenform: SCOPE (Self-Compensating Output Pulse Envelope) optimierte biphasische ansteigende Wellenform, die Energie, Anstieg und Dauer an die Patientenimpedanz anpasst.
Patientenanalysesystem
Methode: Wertet das Patienten-EKG, die Kontaktintegrität der Elektroden und die Patientenimpedanz aus, um festzustellen, ob eine Defibrillation erforderlich ist.
Sensitivität/Spezifität: Gemäß DIN EN 60601-2-4
Impedanzbereich: 20 -230 Ohm
Energieauswahl
Pad-Pak: Schock 1: 150 J Schock 2: 150 J Schock 3: 200 J
Pediatric-Pak: Schock 1: 50 J Schock 2: 50 J Schock 3: 50 J
Typische Aufladedauer: 150 J in < 8 Sekunden 200J in < 12 Sekunden
Umgebungsbedingungen
Betriebs-/Standbytemperatur: 0°C bis 50°C
Transporttemperatur: 0°C bis 50°C
HINWEIS: Es wird empfohlen, das Gerät nach dem Erhalt mindestens 24 Stunden lang bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 50°C zu lagern.
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % nicht-kondensierend
Feuchtigkeitsbeständigkeit: IEC 60529/ EN60529 IPX6 mit angeschlossenen Elektroden und eingelegten Batterien
Staubbeständigkeit: IEC 60529/ EN60529 IP5X mit angeschlossenen Elektroden und eingelegten Batterien
Schutzklasse: DIN EN 60529 IP56
Höhe über dem Meeresspiegel: -381 bis 4.575 Meter
Mechanischer Schock: MIL-STD-810F, Methode 516.5, Verfahren 1 (40 G)
Vibrationen: MIL-STD-810F, Methode 514.5, Verfahren 1
Kategorie 4 Lkw-Transport – US Highway
Kategorie 7 Flugzeug – Jet 737 & Allgemeine Luftfahrt

Atmosphärendruck: 572 hPa bis 1060hPa (429 mmHg bis 795 mmHg)
EMV: DIN EN 60601-1-2
Strahlungsemissionen: DIN EN 55011
Elektrostatische Entladung: DIN EN 61000-4-2 (8 kV)
HF-Immunität: DIN EN 61000-4-3 80 MHz-2,5 GHz, (10 V/m)
Magnetfeldimmunität: DIN EN 61000-4-8 (3 A/m)
Flugzeug: RTCA/DO-160G, Abschnitt 21 (Kategorie M)
RTCA/DO-227 (ETSO-C142a)
Fallhöhe: 1 Meter
Abmessungen und Gewicht
Inkl. Pad-Pak:
Größe: 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm
Gewicht: 1,1 kg

Zubehör
Pad-Pak Elektrode und Batteriekassette
Lagerfähigkeit: Siehe Verfallsdatum auf Pad-Pak/Pediatric-Pak (4 Jahre ab Herstellerdatum)
Gewicht: 0,2 kg
Größe: 10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm
Batterietyp: Kombinierte Batterie- und Defibrillationselektroden-Kassette zum einmaligen Gebrauch (Lithium-Mangan-Dioxid (LiMnO ₂) 18 V)
Batteriekapazität (neu): >60 Schocks mit je 200 J oder 6 Stunden Batterienutzung
Elektroden: Einweg-Defibrillationselektroden werden standardmäßig mit jedem Gerät geliefert
Platzierung der Elektroden: Anterior-lateral (Erwachsene)
Anterior-posterior oder anterior-lateral (Kinder)
Aktiver Bereich der Elektroden: 100 cm²
Kabellänge der Elektroden: 1 Meter
Luftfahrtsicherheitstest (TSO/ETSO-zertifiziertes Pad-Pak): RTCA/DO-227 (ETSO-C142a)

Datenspeicherung
Speichertyp: Interner Speicher
Kapazität: 90 Stunden EKG- (Vollausschrieb) und Ereignis-/Vorfallaufzeichnung
Datenprüfung: Direkter Anschluss an PC über spezielles USB-Kabel (optional) mit Saver EVO Datenprüfsoftware auf der Basis von Windows
Verwendete Materialien
Gehäuse Defibrillator / HeartSine Gateway: ABS, Santopren
Elektroden: Hydrogel, Silber, Aluminium und Polyester
Garantie:
AED: 8 Jahre beschränkte Garantie

Quellenangabe

1. Mehra R. Global public health problem of sudden cardiac death. *Journal of Electrocardiology*. 2007;40 (6):S118-S122.
2. Graham R, McCoy M, Schultz A. Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival, A Time to Act. *Institute of Medicine Report*. 2015.
3. Walsh SJ, McClelland A, Owens CG, et al. Efficacy of distinct energy delivery protocols comparing two biphasic defibrillators for cardiac arrest. *Am J Cardiol*. 2004;94:378-380.

Alle Angaben gelten mit Stand vom 06/2021.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Stryker-Gebietsleiter, um weitere Informationen zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website unter strykeremergencycare.com

Öffentlicher Zugang zur Notfallversorgung

AED-Anwender sollten in der HLW sowie der Verwendung von AED-Geräten geschult sein.

Auch wenn nicht jeder Mensch gerettet werden kann, haben Studien gezeigt, dass eine frühzeitige Defibrillation die Überlebensraten deutlich steigern kann. AEDs können an Erwachsenen und Kindern verwendet werden. AEDs können an Kindern mit einem Körpergewicht von weniger als 25 kg verwendet werden, aber bei einigen Modellen sind separate Defibrillationselektroden notwendig.

Mit den hierin bereitgestellten Informationen soll das Produktangebot von Stryker demonstriert werden. Lesen Sie die vollständigen Informationen zu Verwendungsindikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen Nebenwirkungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie die Produkte von Stryker verwenden. Es ist möglich, dass nicht alle Produkte in allen Märkten verfügbar sind, da die Produktverfügbarkeit von behördlichen und/oder medizinischen Praktiken in den einzelnen Märkten abhängt. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Gebiet an Ihren Gebietsleiter. Technische Daten können unangekündigt geändert werden. Die hier dargestellten Produkte tragen gemäß EU-Verordnungen und -Richtlinien die CE-Kennzeichnung.

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen besitzen oder verwenden die folgenden Handels- oder Dienstleistungsmarken oder haben diese beantragt: HeartSine, Pad-Pak, Pediatric-Pak, samaritan, Saver EVO, SCOPE, Stryker. Alle anderen Handelsmarken sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Besitzer oder Inhaber.

Eigentümer oder Inhaber. Wenn ein Produkt, eine Funktion, ein Dienstleistungsname oder Logo in dieser Liste nicht genannt wird, stellt dies keinen Verzicht auf die Handelsmarke oder sonstige geistige Eigentumsrechte von Stryker hinsichtlich dieses Namens oder Logos dar.

CE 0123 HeartSine samaritan PAD verfügt über die CE-Kennzeichnung (Klasse IIb – 0123) gemäß EU MDD 93/42 und anderen zutreffenden Richtlinien. Es wird in CE Klasse III – 0123 gemäß EU MDR zum oder vor dem Ende des MDR-Übergangszeitraum Mai 2024 neu klassifiziert. Pad-Pak und Pediatric Pak verfügen über die CE-Kennzeichnung (Klasse IIb – 0123) gemäß zutreffenden Richtlinien.

 HeartSine samaritan PAD: UL-Prüfzeichen. Siehe vollständige Kennzeichnung auf dem Produkt.

Erscheinungsdatum: 06/2021
Hergestellt in UK
H009-032-343-AD DE
Copyright © 2021 Stryker.



HeartSine Technologies Ltd.
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Northern Ireland
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartlinesupport@stryker.com
heartline.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Vertrieben von:

Dr. Homer Stryker Platz 1
Duisburg 47228
Germany
Tel +49 2065 837 0
Fax +49 2065 837 837