


DATENBLATT

Inkubator / Labor-Wärmeschrank Labocult

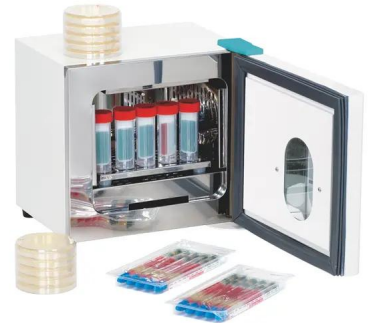

Kompakter Labor-Wärmeschrank mit volldigitaler Steuerung für Praxis und Labor

Die aktuelle Vorschrift für Labor-Inkubatoren besagt, dass die Nährböden nicht mehr in direktem Kontakt zum Gehäuse stehen dürfen. Der Labocult Wärmeschrank hat bereits ab Werk einen Einlegeboden, welcher den Kontakt der Nährmedien zum Gehäuse verhindert.

Technische Daten

Spannung: 200 – 240 Volt

Frequenz: 50 Hz

Leistungsaufnahme: 300 Watt max. / in der Regel 80 Watt

Temperaturvorwahl: max. 70 °C

Genauigkeit: +/- 0,5 °C

Timer: 0 – 9999 Minuten

Innen (B/H/T): 230 x 200 x 200 mm

Außen (B/H/T): 300 x 330 x 330 mm

Gewicht: 9 kg

Der Labocult Wärmeschrank verfügt über eine digitale Steuerung mit Timer-Abschaltfunktion und leicht ablesbarer LED-Anzeige zur einfachen Temperaturkontrolle. Das Display und die Bedienfolie sind abwaschbar, leicht zu bedienen und enthalten neben dem Ein/Aus-Schalter auch Signallampen für Funktion und Alarm. Neu ist die Tür mit integriertem Sichtfenster und ein von außen erreichbarer Taster, zur Aktivierung der Innenraumbeleuchtung. Diese hilfreiche Funktion ermöglicht die Begutachtung der Nährmedien, ohne Unterbrechung des Brutvorgangs. Temperaturen, von 5 °C oberhalb der Raumtemperatur bis 70 °C, können in genauen Schritten von 0,1 °C eingestellt werden. Das Gehäuse des Labocult besteht aus lackiertem Stahlblech, der Innenraum wird aus rostfreiem Chrom-Stahl gefertigt und hat eine nutzbare Tiefe von 20 cm. Die digitale Steuerung garantiert eine kurze Aufheizzeit und hat bei einer Temperatur von 37 °C eine Genauigkeit von $\pm 0,5$ °C.

Automatische Temperaturregelung!

Die aktuelle Vorschrift für Labor-Inkubatoren besagt, dass die Nährböden nicht mehr in direktem Kontakt zur Bodenfläche stehen dürfen. Der integrierte Einlegeboden verhindert diesen Kontakt.

WEEE Registrierungs-Nr. des Herstellers: DE74434443

Lieferumfang

1 Einlegeboden für Platten und Eintauchnährboden, Netzkabel, Bedienungsanleitung

Hinweise
Herstellerhinweise WEEE-Nummer: DE74434443

DATENBLATT

Inkubator / Labor-Wärmeschrank Labocult

Typ	PZN	REF	VE
Labocult Labor-Wärmeschrank		H7 70	1 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter
<https://www.servoprax.de/agb/>