


DATENBLATT

Tischzentrifuge / Laborzentrifuge SERVOSpin Next

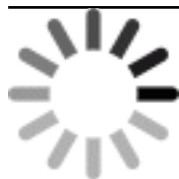


Leicht erlernbares Bedienkonzept mit Programmspeicherfunktion

Die SERVOSpin Next hat ein leicht erlernbares Bedienkonzept. Die Drehzahl lässt sich manuell in Schritten zu 100 U/min einstellen, die Laufzeit ist in Minuten bis max. 99min. wählbar. Zur Vereinfachung der Bedienung stehen 5 frei wählbare Programme zur Verfügung

Zentrifugation von Probenröhrchen

Die SERVOSpin Next Tischzentrifuge ist optimal geeignet zur Zentrifugation von Probenröhrchen, die ein Trennmedium wie z. B. Gel oder Granulat enthalten. Durch den Ausschwingrotor erfolgt die Zentrifugation in Richtung der Gefäßachse, so dass die zentrifugierten Bestandteile horizontal gleichmäßig dicke Schichten bilden.

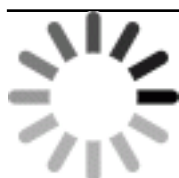

Zentrifugalkraft mit klaren Bedienkonzept

Das klare Bedienkonzept ist leicht erlernbar und bietet dem Anwender **größtmöglichen Komfort und Sicherheit**. Für die **tägliche Routine** stehen 5 frei programmierbare Programmplätze zur Verfügung. Der **kräftige Motor mit Gebläsekühlung** und die **integrierte Unwucht-Kontrolle** sorgen für einen sehr **ruhigen und geräuscharmen Lauf**. Zur **Sicherheit** für den Anwender wird der **Deckel elektromagnetisch verriegelt**. Während der Zentrifugation werden die Drehzahl und die Restlaufzeit im Display angezeigt. Durch einen einfachen Tastendruck kann das Display auf die Anzeige der RCF (Zentrifugalkraft) umgestellt werden.

Die Vorteile auf einen Blick

- Vielseitiger Einsatz in Labor, Arztpraxis, Krankenhaus, Pharmazie, etc.
- Schwing rotor 6 x 15 ml mit Adapter-Set zur Anpassung an unterschiedliche Röhrchen.
- Ergonomisches Bedienfeld und Display.
- Digitale Vorwahl von Laufzeit und Drehzahl.
- Anzeige umschaltbar von Drehzahl (rpm) auf Zentrifugalkraft (rcf).
- Elektromagnetische Deckelverriegelung.
- Notfallöffnung bei Stromausfall .
- Stabiles Gehäuse und langlebiger Motor.
- Leichter Rotorwechsel.
- Automatische Unwucht-Kontrolle.
- Einfache Reinigung und Desinfektion.
- 24 Monate Garantie.



Technische Daten

- Drehzahl: 100 - 4000 U/min
 - Zentrifugalkraft (Max.RCF): 2510 G
 - Laufzeit: 1 bis 99 min
 - Abmessungen: 420 X 340 X 280 mm (T x B x H)
 - Gewicht: 12 kg
 - Netzspannung: 220 - 230 Volt 50/60 Hz
-

DATENBLATT

Tischzentrifuge / Laborzentrifuge SERVOpin Next

Typ	PZN	REF	VE
SERVOpin Next inkl. Schwingrotor		H7 820	1 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter
<https://www.servoprax.de/agb/>