




LumiraDx INR Test



Zuverlässige INR-Ergebnisse am Point-of-Care in unter 90 Sekunden^{1*}

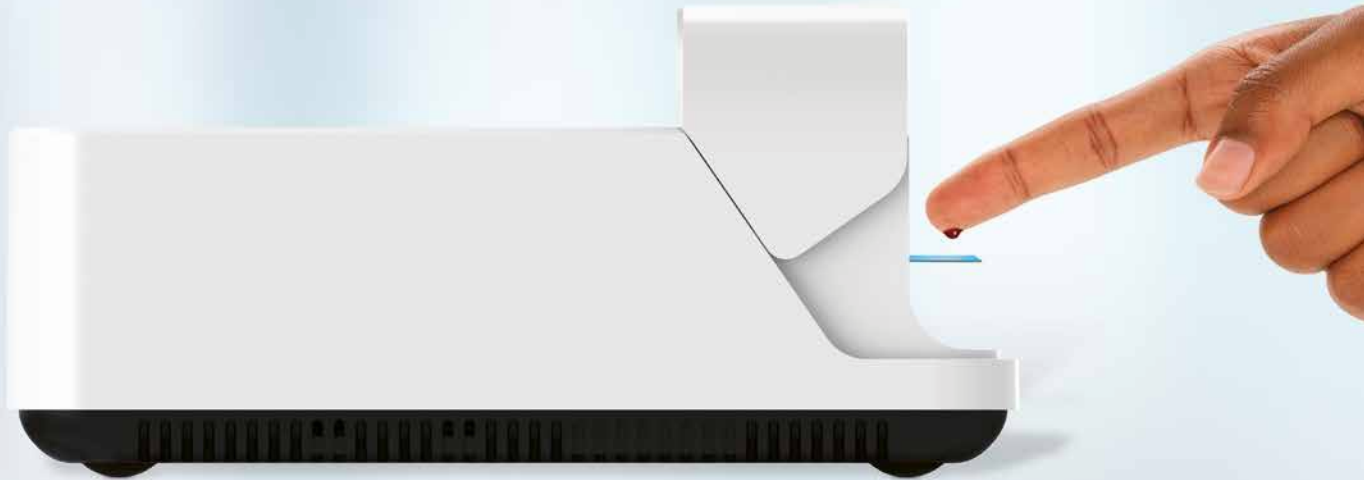

Schnelle Ergebnisse: Zuverlässige Ergebnisse mit Kapillarblut aus der Fingerbeere in < 90 Sekunden*



Testzugriff: Handliches, mobiles Gerät für den Einsatz an fast jedem Ort



Einfacher Ablauf: Einfacher Testablauf mit unkomplizierter Probennahme aus Kapillarblut – keine Venenpunktion erforderlich



Problemlose Lagerung: Ungekühlt bei Umgebungstemperatur (5 – 32 °C) lagerbar



Diagnostik leicht gemacht. Mit dem LumiraDx System.

* Bei einer supratherapeutischen INR > 4,0 kann es 90 – 180 Sekunden bis zum Vorliegen der Testergebnisse dauern.


Verwendungszweck und medizinischer Nutzen

Der LumiraDx INR Test misst die quantitative Prothrombinzeit, die als International Normalized Ratio (INR) angegeben wird, anhand einer einzigen direkt aus der Fingerbeere entnommenen Blutprobe.^{1,2} In der Arztpraxis oder bei Patienten zuhause von geschultem medizinischem Fachpersonal durchgeführte INR-Tests ermöglichen schnelle Ergebnisse. Dadurch kann der Behandlungsplan direkt vor Ort angepasst werden und dem Patienten bleibt ein weiterer Gang in die Praxis und eine Venenpunktion erspart.¹

Einfacher Ablauf

Der LumiraDx INR Test ist für die Verwendung mit dem LumiraDx System vorgesehen.

Lesen Sie vor der Durchführung dieses Tests die im Lieferumfang des Kits enthaltene Gebrauchsanweisung genau durch.

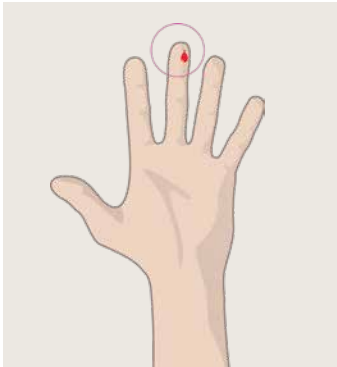			
ca. 1 Minute		< 90 Sekunden*	
1. Teststreifen einführen	2. Probe entnehmen	3. Auftragen und starten	4. Ergebnisausgabe

Technische Daten

Probenart	Blut aus der Fingerbeere
Probenmenge	8 µl
Ergebnisausgabe nach	< 90 Sekunden*
Präzision	< 3,73 % VK
Messbereich	0,8 – 80 INR
Hämatokrit	25 – 55 %
Transferröhrchen	ohne Antikoagulans
Externe Kontrollen	Flüssig-QK in 2 Konzentrationen (3×3-ml-Fläschchen/Konzentration/Kit) Separat erhältlich Gekühlte Lagerung bei 2 – 8 °C Nach Öffnen des Fläschchens 30 Minuten stabil
Lagerungsbedingungen Kit	5 – 32 °C

* Bei einer supratherapeutischen INR > 4,0 kann es 90–180 Sekunden bis zum Vorliegen der Testergebnisse dauern.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

LUMIRADX ist eine Marke von Roche.
© 2025 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de



Produktvideos und weitere
Informationen finden Sie unter:
www.roche.de/lumiradx

Quellen

¹ Tait RC, Hung A, Gardner RS. Performance of the LumiraDx Platform INR Test in an Anticoagulation Clinic Point-of-Care Setting Compared With an Established Laboratory Reference Method. Clin Appl Thromb Hemost. Jan.–Dez. 2019;25:1076029619890423.

² LumiraDx Produktbeilage INR (Version 4, 2024)