

2°C~8°C Apotheke/Labor-Kühlschrank

Intelligente Steuerung & konstante Temperatur

Mehrere Alarme bringen mehr Sicherheit



YC-130EL



Präzises Kontrollsystem

Hohe Genauigkeit Temperaturregler mit hoher Empfindlichkeit Sensoren, halten die Temperatur innerhalb 2~8°C, Anzeige-Genauigkeit bei 0.1°C.

Kältesystem

Mit renommierten Marke Kompressor und Kondensator, bessere Kühlleistung;
HCFC-FREE Kältemittel gewährleisten Umweltschutz und Sicherheit;
Luftkühlung, Auto-Abtauung, Temperaturgleichmäßigkeit innerhalb von 2°C.

Menschenbezogen

Frontöffnung abschließbare Tür mit voller Höhe Griff;
Perfekte akustische und visuelle Alarme: Hoch- und Niedertemperaturalarm, Sensorausfallalarm, Stromausfallalarm, Alarm bei angelehnter Tür;
Schrank aus hochwertigem Stahl, Innenseite mit spritzendem Aluminiumstahlmaterial, langlebig und leicht zu reinigen;
Ausgestattet mit 2 Rollen + (2 Nivellierfüße);
Standardmäßig mit eingebautem USB-Datenlogger, Fernalarmkontakt und RS485-Schnittstelle für Überwachungssystem.

 **hier bestellen!**



Intelligente Temperaturregelung

- Hochpräzises Mikrocomputer-Temperaturkontrollsystem mit eingebauten Kontroll-/Alarmsensoren für hohe/niedrige Temperatur, Umgebungstemperatur und Verdampfertemperatur usw., die den sicheren und stabilen Betrieb gewährleisten;
- 1-Zoll-hohe Helligkeit digitale Temperaturanzeige mit 0,1°C Anzeigegenauigkeit; die Temperatur kann frei eingestellt werden.



Sicherheitssystem

- Ein perfektes akustisches und visuelles Alarmsystem macht die Lagerung sicherer. Ausgestattet mit Alarmfunktionen, einschließlich Alarm bei hoher/niedriger Temperatur, Alarm bei hoher Umgebungstemperatur, Alarm bei Sensorausfall, Alarm bei angelehnter Tür, Alarm bei Stromausfall usw.;
- Alarmton für die Türöffnung von mehr als 1 Minute, Alarm wird automatisch stummgeschaltet, wenn die Tür geschlossen wird.



Kältesystem

Ausgestattet mit einem Kompressor einer international bekannten Marke, einem hocheffizienten luftgekühlten Kondensator und einem Verdampfer, der eine schnelle Kühlung gewährleistet.



Datenspeicherung

- Ausgestattet mit einer USB-Exportschnittstelle, die für den Export von Daten im PDF-Format genutzt werden kann.
- Wenn eine U-Disk angeschlossen ist, können Temperaturdaten kontinuierlich und automatisch gespeichert werden (Daten können für 100.000 Datensätze gespeichert werden);



Beleuchtungssystem

Ausgestattet mit einem Beleuchtungssystem mit LED-Leuchten, die eine gute Sichtbarkeit im Inneren des Gehäuses gewährleisten.




Menschenbezogen

- Ausgestattet mit hochwertigen Regalen aus PVC-beschichtetem Stahldraht, die leicht zu reinigen sind;
- Ausgestattet mit einem unsichtbaren Türgriff, der für ein elegantes Aussehen sorgt;
- Ausgestattet mit einer Prüföffnung, die es dem Benutzer ermöglicht, die Temperatur im Schrank zu prüfen.




Umfang der Anwendung

Geeignet für die Lagerung von biologischen Produkten, Impfstoffen, Medikamenten, Reagenzien usw. Geeignet für den Einsatz in Apotheken, pharmazeutischen Fabriken, Krankenhäusern, Zentren für Krankheitsprävention und -kontrolle, Kliniken usw.

Leistungsdaten / Abkühlkurve

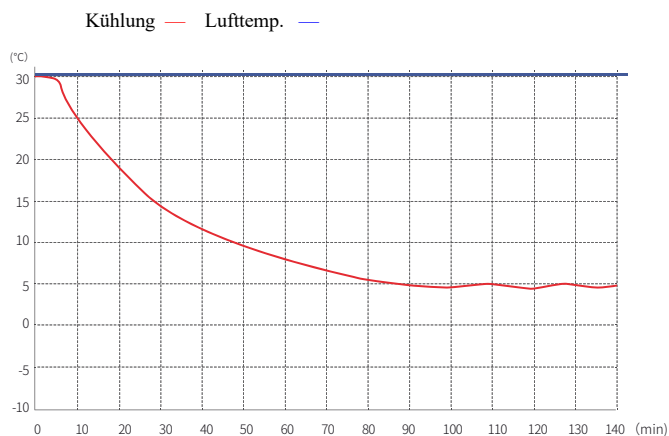

Externe Abmessungen

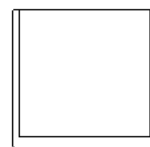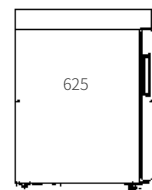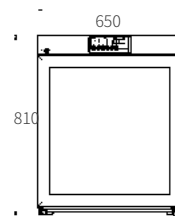

2~8°C Apotheken-Kühlschrank	
Modell	YC-130EL
Kabinett Typ	Stehend
Kapazität (L)	130
Innengröße (B*T*H) mm	554*510*588
Außengröße (B*T*H) mm	650*625*810
Verpackungsgröße (B*T*H) mm	720*703*880
NW/GW(Kgs)	51/56
Leistung	
Temperaturbereich	2~8°C
Temperatur in der Umgebung	16~32°C
Leistung der Kühlung	5°C
Klima-Klasse	N
Kontroller	Mikroprozessor
Bildschirm	Digitale Anzeige
Kältetechnik	
Kompressor	1pc
Methode der Kühlung	Luftkühlung
Abtau-Modus	Automatisch
Kältemittel	R600a
Dicke der Isolierung (mm)	L/R:48, B:50
Konstruktion	
Externes Material	PCM
Inneres Material	gespritztes Aluminiumblech (optional Edelstahl)
Einlegeböden	3 (beschichteter Stahldrahtboden)
Türschloss mit Schlüssel	Ja
Beleuchtung	LED
Zugangspforte	1pc. Ø 25 mm
Rollen	2+2(Nivellierfüße)
Datenaufzeichnung/Intervall/Speicherkapazität	USB/Aufzeichnung alle 10 Minuten/100.000 Daten
Tür mit Heizung	Ja
Warnung	
Temperatur	Hohe/niedrige Temperatur, hohe Umgebungstemperatur
Elektrisch	Stromausfall, schwache Batterie
System	Sensorfehler, Tür angelehnt, integrierter USB-Datenlogger-Fehler, Kommunikationsfehler
Elektrisch	
Stromversorgung (V/HZ)	220-240~/50
Nennleistung (W)	150
Stromverbrauch (KWh/24h)	2,55
Nennstrom (A)	0,98
Zubehör	
Standard	RS485, Fernalarmkontakt, Stützbatterie

*Die in dieser Broschüre angegebenen Modelle, Parameter und Leistungen können aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

*Die in dieser Broschüre gezeigten Produktabbildungen können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Wenn Sie ein Produkt kaufen möchten, überprüfen Sie bitte das tatsächliche Produkt.