

NITRILE FÜHLEN SIE IHRE SICHERHEIT

SCHUTZ VOR INFEKTIONEN – virendicht für Anwender und Patienten ¹⁾

HOHER TRAGEKOMFORT – durch das innovative, weiche Material

GUTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT – durch hohe Wandstärke



Höhere Durchstich-Festigkeit und bessere Chemikalienbeständigkeit

Für Typ-I-Allergiker


Hoher Tragekomfort

Die blaue Farbe erleichtert die schnelle Unterscheidung von Latex-Handschuhen.

Perfekte Passform und Sensitivität

- Die höhere **Durchstich-Festigkeit** und bessere **Chemikalien-beständigkeit³⁾** von Nitril (bei gleicher Wanddicke wie Natur-latex) bieten dem Anwender Schutz und ein sicheres Gefühl.
- Das weiche Material erhöht den **Tragekomfort** und sorgt für komfortables und sicheres Arbeiten über längere Zeit.
- Der Handschuh ist puderfrei und enthält keine Naturlatex-Proteine, somit bestens geeignet für **Typ-I-Allergiker**, die auf erhöhten Komfort, ähnlich dem elastischen Naturlatex, nicht verzichten wollen.
- Strukturierte Fingerkuppen sichern einen **guten Griff**, auch im feuchten Umfeld.

- Die blaue Farbe erleichtert die **schnelle Unterscheidung von Latex-Handschuhen**.
- Die **Reißkräfte²⁾** des Sempercare® Nitrile liegen deutlich über den in der Norm festgelegten Mindestwerten und ermöglichen dadurch dem Anwender ein besonderes Schutzgefühl.

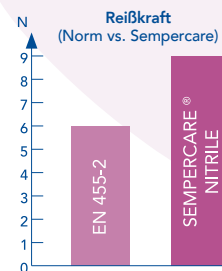

TECHNISCHE DATEN



TYP	Puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
MATERIAL	Nitrile-Butadien-Rubber (NBR)
FARBE	Blau
HANDSCHUHFORM	Flach mit Rollrand
GESAMTLÄNGE/GRÖSSE gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL 240 mm
WANDDICKE im Handflächenbereich doppelt gemessen	median 0,20 mm
DICHTHEIT gemäß EN 455-1	AQL 1.5
REISS KRAFT gemäß EN 455-2 REISS KRAFT Produktionswert	≥ 6 N median 9 N
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre
VERPACKUNG	1. unsteril, im Spenderkarton: S, M, L 100 Stück lose, XL 90 Stück S, M, L 200 Stück lose, XL 180 Stück unsteril, im Versandkarton: S, M, L 1.000 Stück lose, XL 900 Stück S, M, L 2.000 Stück lose, XL 1.800 Stück 2. steril: 50 Paar im Spenderkarton, Handschuhe gestulpt in faserfreier Innentasche, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. Im Versandkarton S, M, L 300 Paar/VE
KENNZEICHNUNGEN	EN 1041, ISO 15223, EN 420
KONFORMITÄT ZU NORMEN	EN 455, EN 420, EN 374
ZWECKBESTIMMUNG Gemäß MP Richtlinie 93/42/EWG Gemäß PSA Richtlinie 89/686/EWG	Medizinprodukt Klasse I (unsteril), Klasse Is (steril) Einmal-Schutzhandschuh – PSA Kategorie III (steril und unsteril) (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen) ³⁾