

DIAGNOSTIC TOOLS

2023

PRODUKTKATALOG

strässle&co



Strässle EKG-Vakuumanlagen fungieren als moderner Mittler zwischen Patienten und EKG-Gerät. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf von EKG-Aufnahmen und sind in der modernen Arztpraxis sowie im schnelllebigen Klinikalltag nicht mehr zu entbehren.

DT100 B, DT100 T sowie die DT80 B, DT80 T und die EASY II erfüllen mit Ihren unterschiedlichen Leistungsprofilen die gesamte Palette der Anforderungen moderner EKG-Vakuumanlagen. DT100 B und DT100 T sind auch als Akkuversionen erhältlich.

Das Leistungsspektrum aller Anlagen umfasst Ausblasfunktion, 4-stufige Druckstufenwahl, einstellbar mit dem jeweiligen Einhand-Bedienmodul, LED-Information und selbstverständlich dem Defibrillationsschutz.

Die spezielle Regelautomatik überwacht und steuert Vakuumpumpen in modifizierter Drehschiebertchnik und sorgt für geregelten Halt auch auf schwierigen Hautverhältnissen, wie Lederhaut, sehr knöchernen oder behaarten Patienten.

Die Elektrodenleitungen verfügen über weiche und damit sehr anpassungsfähige Silikonsaugnäpfe, die im Inneren mit einer klassischen Silber-Silberchlorid-Elektrode ausgestattet sind.


Eine hochwertig durchgehende Schirmung, Oxidationsschutz und ein kontrollierter Fertigungsprozess ermöglichen präzise Übertragungen sensibler Messpotentiale und eine sichere Diagnose. Strässle EKG-Vakuumanlagen sind hochwertige medizinische Diagnosewerkzeuge und in der modernen Praxis sowie im Klinikablauf integrierter Bestandteil medizinischer und ökonomischer Investition.

Informativ: Jeder Händler oder Endverbraucher, der Produkte der Strässle & Co. Medizintechnik GmbH mit anderen Produkten zu einem System kombiniert oder zusammenbaut, unterliegt den Anforderungen des (EU) MDR 2017/745 Artikel 22!

Strässle & Co.
Medizintechnik GmbH
Primelweg 5
D-72461 Albstadt

Tel.: +49 (0)7432 22 01 86
Fax: +49 (0)7432 22 01 89
info@straessle-co.de
www.straessle-co.de

EASY II

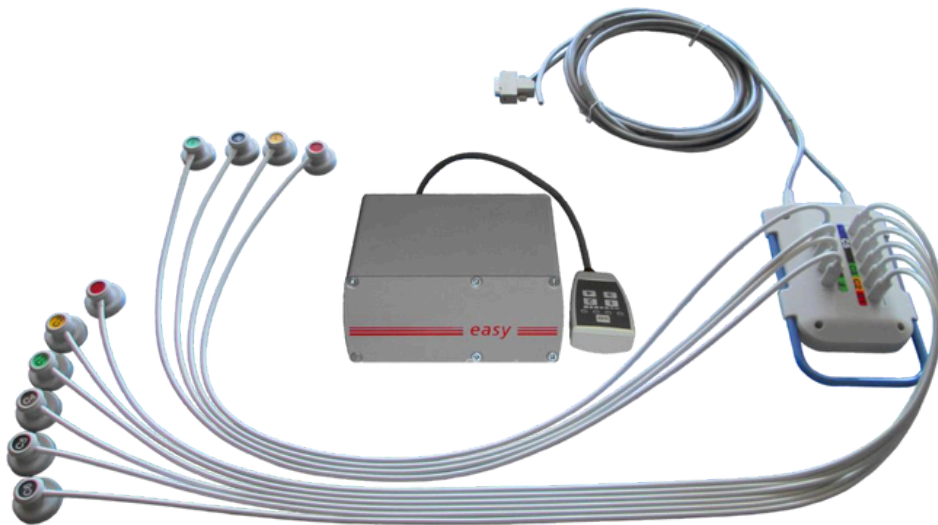

EASY II

Die EASY, für gelegentliche Anwendungen, besteht aus dem Verteilerkopf mit integriertem Defibrillationsschutz, den Elektrodenausleitungen, der Unterdruck-Patientenleitung, der Vakuumeinheit und dem Einhand-Bedienmodul.

Die Unterdruck-Patientenleitung beginnt am Verteilerkopf und mündet mit dem Schlauchende im Anschlussstutzen an der Rückseite des Vakuumgehäuses.

Der 15polige Stecker führt zum EKG. Das Bedienteil mit 4-stufiger Druckfunktion und LED-Information führt ebenfalls rückseitig in das Vakuumgehäuse.

Das Gerät verfügt über eine automatische Ausblasfunktion, vor und nach jeder Anwendung.

Technische Daten:

- Schutzklasse I; MPG Klasse 1
- Netzspannung 230 V~ 50/60 Hz; 22VA
- Vakuumbereich von 60-200 mbar; Vierstufige Einstellung der Vakuumleistung; Druckbereichs- und Statusanzeige
- Patienten kabel mit integriertem Defibrillationsschutz;
- Silber-Silberchlorid-Elektroden; Napfmaterial Silikon; einzeln, von außen austauschbar

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-405	EASY	10x Vakuumelektrode 1m; 1x Vakuumeinheit EASY mit Bedienteil und Halter; 1x Patienten kabel mit Verteiler; 1x Netzkabel; 250ml Elektroden spray
II	4000-406	6x Vakuumelektrode 1m und 4x1,3m ; 1x Vakuumeinheit EASY mit Bedienteil und Halter; 1x Patienten kabel mit Verteiler; 1x Netzkabel; 250ml Elektroden spray
EASY II 4000-407	EASY II	10x Vakuumelektrode 1,3m ; 1x Vakuumeinheit EASY mit Bedienteil und Halter; 1x Patienten kabel mit Verteiler; 1x Netzkabel; 250ml Elektroden spray