

seca 417

Leichtes und stabiles Messbrett für den mobilen Einsatz



- Einfache Handhabung für schnellen, mobilen Einsatz.
- Zusammenklappbar für besonders kleines Stauvolumen.
- Hochwertige Materialien für sehr lange Lebensdauer.
- Glatte Oberflächen für leichtes Reinigen.

seca 417:**Was schwer war wird leicht.**

Das Messbrett seca 417 ist die mobile Alternative zum Infantometer seca 416. Durch seinen Klappmechanismus und das geringe Eigengewicht ist es kompakt und leicht zu transportieren. Es ist einfach zu bedienen und besticht mit glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen und einer langen Lebensdauer dank hochwertiger Materialien.

**Einfaches Bedienen.**

Das zweigeteilte Messbrett seca 417 wird über ein Scharnier aufgeklappt. Es verfügt über einen integrierten Kopfanschlag und einen separaten Fußanschlag, der auf einer sanft erhöhten Führungsschiene leicht und präzise bewegt werden kann. Zum Messen genügt es, den Kopf des Kindes am Kopfanschlag auszurichten, die Beine vorsichtig zu strecken und den Fußanschlag an die Füße zu führen.

Einfaches Ablesen.

Das Stadiometer seca 417 ist ideal für den mobilen Einsatz, um den Ernährungs- und Entwicklungsstand von Säuglingen und Kleinkindern z.B. bei Reihenuntersuchungen zu überprüfen. Denn gerade hier ist es wichtig, dass die Messergebnisse leicht und schnell abgelesen werden können. Das gewährleisten rote Ablesemarken und eine hochwertige Skalenbedruckung, die auch nach Jahren intensiven Gebrauchs nicht verblasst.

Schnelles Reinigen.

Die glatten, abgerundeten Oberflächen sorgen dafür, dass man sich beim Messen nicht stößt. Ein weiterer Vorteil: Das Messbrett ist dadurch sehr leicht zu reinigen. Hinzu kommt, dass der Fußanschlag abnehmbar ist und sich in den Führungsschienen keine Schmutzreste sammeln können. Dabei erweisen sich sowohl das Material aus hautfreundlichem ABS-Kunststoff als auch die Bedruckung der Skala als völlig unbeeindruckt gegen alle handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.



Auf der großen Skala lässt sich der Messwert schnell ablesen.




Der hochwertige Klappmechanismus garantiert eine lange Lebensdauer.

Lange Lebensdauer.

So leicht das Messbrett ist, so hochwertig sind sein Klappmechanismus, der Kopfanschlag oder der Fußanschlag. Hier wurde darauf geachtet, dass sie dank ausgewählter Materialien selbst einen jahrelangen harten Einsatz überstehen – ohne sich zu verformen oder zu verbiegen. Was die Transporttasche seca 412 noch zusätzlich unterstützt, denn sie schützt das Messinstrument sicher vor Spritzwasser – obwohl sie aus federleichtem Nylon besteht.

seca 417**Technische Daten**

- Messbereich: 10 – 100 cm
- Teilung: 1 mm
- Maße, Messbrett (BxHxT):
1.110 x 115 x 333 mm
- Maße, Transportsituation (BxHxT):
577 x 115 x 333 mm
- Eigengewicht: 1,6 kg

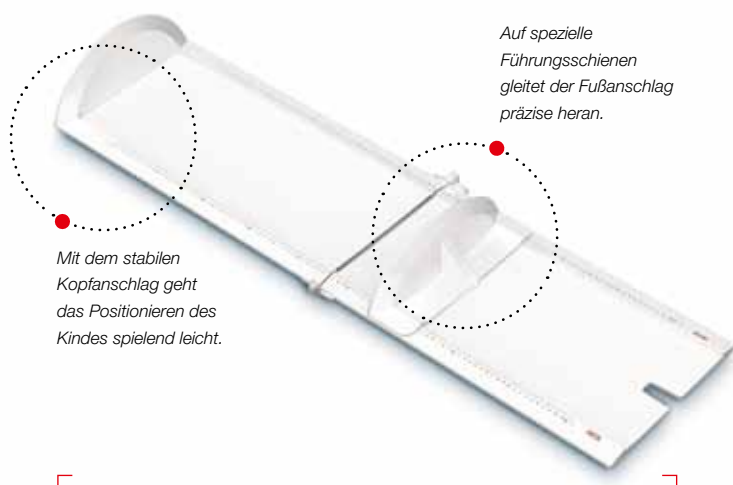

Mit dem stabilen Kopfanschlag geht das Positionieren des Kindes spielend leicht.

Auf spezielle Führungsschienen gleitet der Fußanschlag präzise heran.