

seca 635

Funkfähige Plattform- und Adipositaswaage ㉓

PDMS integrated



- Große Plattform mit hoher Tragkraft.
- Flexible Kabelfernanzeige.
- Integrierte Body-Mass-Index-Funktion.

seca 635:

Die komfortable Lösung für besondere Anforderungen

Übergewicht und Folgeerkrankungen sind weltweit das am schnellsten wachsende Problem im Gesundheitsbereich. Für die Diagnose und Therapie ist die regelmäßige Gewichtskontrolle unverzichtbar; denn auch die kleinste Gewichtsverminderung kann das Risiko von Folgeerkrankungen erheblich reduzieren. Um den besonderen Anforderungen beim Wiegen adipöser Patienten zu entsprechen, hat seca diese spezielle Plattform- und Adipositaswaage entwickelt. Die seca 635 erfüllt höchste Ansprüche von Ärzten, Pflegepersonal und auch von Patienten. Natürlich lassen sich auch normalgewichtige Personen problemlos auf ihr wiegen. Durch die spezielle Dämpfungsfunktion wird das Gewicht auch bei unruhigen Patienten fehlerfrei angezeigt.



Hohe Tragkraft und große Plattform


Die batteriebetriebene elektronische Waage seca 635 wurde speziell für das Wiegen adipöser Patienten entwickelt und bietet mit einem Wägebereich von bis zu 300 kg und einer 56 x 56 cm großen Plattform eine solide Basis für schwergewichtige und umfangreiche Patienten. Die geringe Höhe von 5,5 cm und der rutschfeste Belag der Plattform bietet ein komfortables Betreten der Waage ohne große Risiken. Auch die Aufstellung eines Stuhls auf der Waage ist mühelos möglich. Dank der Pre-TARA-Funktion wird das Gewicht eines Stuhls oder einer Stehhilfe einfach vom Gesamtgewicht abgezogen- und steht einer präzisen Gewichtsermittlung nicht im Wege.



Per Größeneingabe kann der BMI des Patienten ermittelt werden.

Kabelfernanzeige lässt kleinste Veränderungen einfach erkennen.

Das Anzeigeelement der seca 635 ist über ein 2,50 m langes Kabel mit der Waage verbunden und lässt sich dadurch flexibel positionieren – in Augenhöhe an der Wand, bequem auf dem Tisch oder auf dem optional erhältlichen Stativ seca 472. Das Ergebnis erscheint in gut ablesbaren LCD-Ziffern. Die 100-g-Teilung lässt kleinste Gewichtsveränderungen erkennen, dank der HOLD-Funktion auch nach Verlassen der Waage.

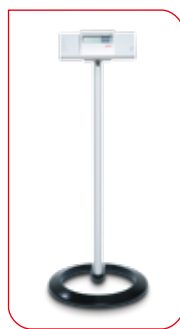

Stativ für die Kabelfernanzeigen der seca Waagen und Längenmessgeräte.

Weitere Funktionen die begeistern

Die Body-Mass-Index-Funktion (BMI) der seca 635 ermöglicht es den Ernährungszustand mühelos zu beurteilen um frühzeitige Maßnahmen ergreifen zu können. Durch die integrierte Abschaltautomatik schaltet sich die Waage im Batteriebetrieb nach Gebrauch automatisch aus und verhindert so einen unnützen Energieverbrauch.

seca 635

Technische Daten

- Tragkraft: 300 kg
- Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g
- Abmessung Waage (BxHxT): 640 x 55 x 600 mm
- Abmessung der Plattform (BxHxT): 560 x 55 x 560 mm
- Eigengewicht: 14,4 kg
- Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional
- Kabellänge: 2,50 m
- Funktionen: TARA, Pre-TARA, HOLD, BMI, Wägebereichumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik
- Optional: Stativ für Kabelfernanzeige seca 472, RS232-Schnittstelle seca 460, Netzgerät seca 447