

seca 877

Flachwaage für den
mobilen Einsatz ㉓



- Mutter-Kind-Funktion für problemloses Wiegen von Kleinkindern.
- Große Nivellierfüße für hohe Standfestigkeit.
- Leicht zu transportieren durch sehr geringes Eigengewicht von 4,2 kg.
- Batterie-Stromversorgung für Standorte ohne Steckdose.

seca 877:

Nur 4,2 Kilogramm.

Waagen, die in der Medizin mobil eingesetzt werden, müssen leicht sein, stabil, gut zu reinigen und komfortabel. Die seca 877 besttigt das mit einem Gewicht von 4,2 Kilogramm, robusten Materialien und der wichtigen Mutter-Kind-Funktion.



Ausgezeichnete Oberflchenhrte.

Die Basis besteht aus einem Gemisch aus Kunststoff und Plexiglas. Eine Kombination, die ein Material mit extremer Oberflchenhrte und Schlagfestigkeit gewhrleistet, das mit allen handelsblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden kann. Darber hinaus ist die seca 877 mit zustzlichen Stahlelementenverstrkt, damit auch Personen bis zu 200 Kilogramm gewogen werden knnen.

Standfest auf allen Untergrnden.

Vier groe Nivellierfe unter der Wiegebasis garantieren, dass die seca 877 selbst auf schwierigen Untergrnden sicher steht. Eine Manahme, die zustzlich auch die Messgenauigkeit erhht. Ebenso wichtig ist die geringe Hhe der Waage von unter sechs Zentimetern. Denn die flache Bauweise gewhrleistet, dass auch Menschen mit Bewegungseinschrnkungen problemlos die rutschfeste Trittfe betreten knnen.

Komfortabel zu bedienen.

Obwohl das Anzeige- und Bedienelement in der Waage integriert ist, kann die seca 877 bequem bedient werden. Zum Einschalten gengt es, kurz die Trittfe anzutippen. Auch Suglinge und Kleinkinder knnen einfach auf dem Arm eines Elternteils oder des Pflegepersonals gewogen werden. Dazu muss sich der Erwachsene nur vorher separat wiegen. Das Tarieren des Gewichts bernimmt die Mutter-Kind-Funktion, die mit einem Knopfdruck eingeschaltet werden kann.




Groes Display fr leichtes Ablesen.



Groe Nivellierfe an der Unterseite der Wiegebasis fr sicheres Aufstellen.



Tip-on Einschaltautomatik.

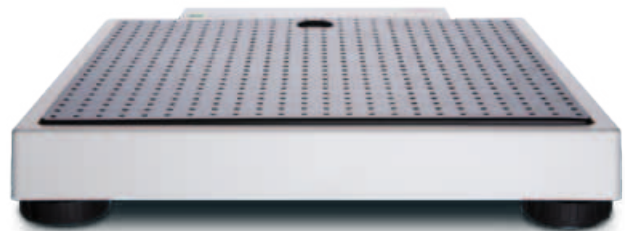

Flache Bauweise und rutschfeste Trittfe fr bequemes Betreten.

seca 877

Technische Daten

- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 100 g < 150 g > 200 g
- Mae (BxHxT): 321 x 60 x 356 mm
- Mae/Plattform (BxHxT): 288 x 60 x 278 mm
- Eigengewicht: 4,2 kg
- Stromversorgung: Batterien
- Funktionen: Mutter/Kind-Funktion, Tip-on Einschaltautomatik, Abschaltautomatik
- Optional: Messstab seca 217 in Kombination mit Adapterelement seca 437, Transporttasche seca 414 (fr Kombination mit Messstab und Adapterelement) und seca 421
- Eichklasse: