


Gammex® PF Sensitive™

Puderfreier OP-
Handschuh aus
Naturkautschuklatex

Ein dünnerer Handschuh für optimale Tastsensibilität

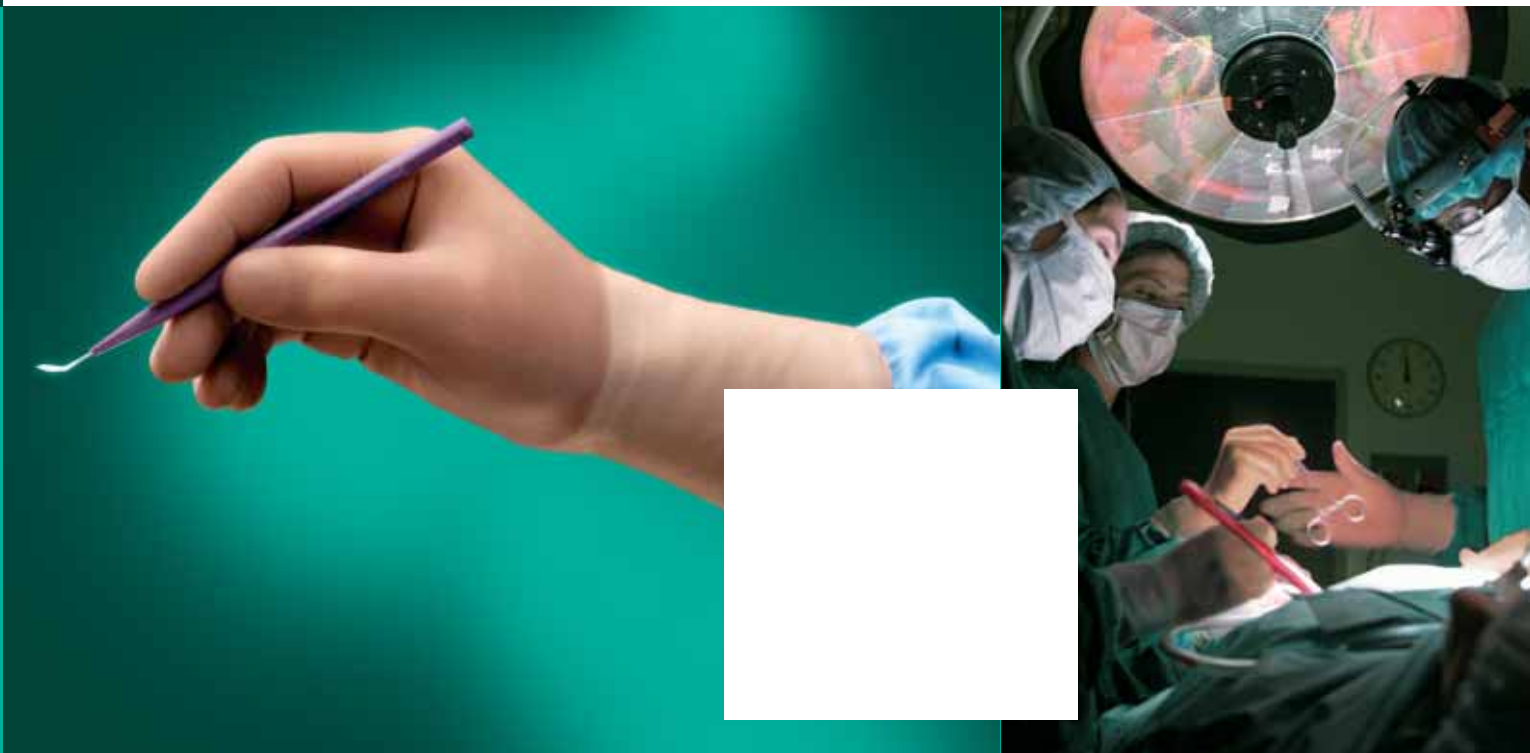

Der OP-Handschuh Gammex® PF Sensitive™ von Ansell wurde speziell für die hohen Anforderungen in der Mikrochirurgie entwickelt. Sein sehr dünner Latexfilm (25% dünner als bei herkömmlichen puderfreien OP-Handschuhen – siehe Vergleichstabelle der Wandstärken innen) mit seiner leicht texturierten Oberfläche gewährleistet höchste Tastsensibilität und einen sicheren Griff beim Führen von Instrumenten unter allen Bedingungen.

Der Gammex® PF Sensitive™ zeichnet sich aber nicht nur durch hohe Tastsensibilität aus, sondern auch durch geringen Allergengehalt, ausgezeichneten Tragekomfort, Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit. Merkmale, die er mit allen anderen Modellen der renommierten Gammex®-Handschuhreihe gemeinsam hat.

Ansell

Ein dünnerer für

Optimale Tastsensibilität mit hoher Griffsicherheit

Der Gammex® PF Sensitive™ ist 25 % dünner als ein handelsüblicher OP-Latexhandschuh, wie beispielsweise der Gammex® PF. Das Ergebnis: Eine überragende Tastsensibilität (siehe Vergleichstabelle der Wandstärken) selbst bei operativen Eingriffen, die eine Instrumentenführung von höchster Präzision erfordern.

Die texturierte Oberfläche gewährleistet einen sicheren Griff auch bei komplizierten Operationen unter feuchten und trockenen Bedingungen.

Anwendungsbereiche

Mikrochirurgische Eingriffe

- **Neurochirurgie**
- **Herzchirurgie**
- **Augenchirurgie**
- **Gefäßchirurgie**
- **ENT-Chirurgie**
- **Kosmetische/Rekonstruktive Chirurgie**
- **Handchirurgie**



Handschuh optimale Tastsensibilität

Der außergewöhnliche Tragekomfort von Latex

Aufgrund der besonderen Feinheit des Latexfilms und der hohen Aufmerksamkeit, die Ansell jedem einzelnen Entwicklungsaspekt widmet, trägt sich der Gammex® PF Sensitive™ wie eine zweite Haut. Neben anderen Merkmalen zeichnet er sich durch die hohe Ebene von Tragekomfort, Elastizität und Tastsensibilität aus, die das hohe Ansehen der Gammex®-Reihe begründet hat.

Weitere einzigartige Vorzüge: Der obere Hafrand der Manschette gewährleistet einen sicheren Halt am OP-Kittel, und die braune Farbe des Handschuhs schützt die Augen vor starken Reflexionen der starken Lichtquellen, die in der Mikrochirurgie eingesetzt werden.

Durch die Chlorbehandlung der Innenseite lässt sich der Handschuh unter trockenen Bedingungen sehr leicht an- und ausziehen.

Geringer Allergengehalt

Die Träger des Gammex® PF Sensitive™ profitieren vom geringen Risiko einer Latexsensibilisierung. Diesen Vorteil gewährleisten die Bleichungsprozesse und Waschzyklen nach der Produktion, wie unter anderem die P.E.A.R.L.-Technologie (Protein and Endogenous Allergen Reduction Leaching) von Ansell. Der Proteingehalt wird durch HPLC- und Modified-Lowry-Tests ermittelt. Der Fertigungsprozess ist außerdem für die Reduzierung von Chemikalienrückständen auf ein absolutes Minimum ausgerichtet.

Sicherheit

Der hohe Sicherheitsstandard, der ein nur geringes Risiko von Mikrolöchern und einen hohen Barrierschutz garantiert, wird durch eine eingehende Qualitätskontrolle vor,

während und nach der Produktverpackung gewährleistet.

- Die Qualitätskontrolle basiert unter anderem auf den AQL-Prüfverfahren (Wasserhaltetest) für Mikrolöcher.
 - Konformität mit der EU-Norm EN 455-1: Inspektionsebene I (AQL-Wert 1,5)
 - Vor der Freigabe: Inspektionsebene I (AQL-Wert 1,0)
 - Vor der Verpackung: Inspektionsebene II (AQL-Wert 0,65)
- Gute Reißfestigkeit und sehr vorteilhaftes Robustheits-/Wandstärkenverhältnis für einen hohen Barrierschutz.
- Hohe Festigkeit gegen Virenpenetration, nachgewiesen durch die Ergebnisse umfassender Tests mit Bakteriophagen (siehe die AVPP-Broschüre von Ansell).
- Erhöhter Patientenschutz durch die enge Überwachung des Pyrogen- und Endotoxingehalts (Biokompatibilitätstest gemäß ISO 10993).
- Niedriger Partikelgehalt durch nur geringe Puderrückstände (Formtrennmittel) aus der Produktion.
- Eindeutige Identifikation mit Verweisen auf die Produktionsdaten.

Wandstärkenvergleich

Einzelwandstärke (mm)	Gammex® PF	Gammex® PF Micro-Thin®	Gammex® PF Sensitive™
Finger	0,220	0,185	0,170

Gammex® PF Sensitive™

Puderfreier OP-
Handschuh aus
Naturkautschuklatex

Spezifikationen

Bestellnummer	Größe
353191	5.5
353192	6.0
353193	6.5
353194	7.0
353195	7.5
353196	8.0
353197	8.5
353198	9.0

Verpackung

25 Paar pro Karton, 4 Kartons pro Umkarton



Die legendäre Gammex®-Produktreihe von Ansell bietet optimalen Handschutz:

	Bestellnummer	Anwendungsbereich	Material	Wandstärke	Farbe
Gammex®	8010810-7	Allgemeinchirurgie	Naturkautschuklatex	0,235 mm	Weiß
Gammex® PF	351141-9	Allgemeinchirurgie	Naturkautschuklatex	0,220 mm	Weiß
Gammex® PF HydraSoft®	352681-8	Allgemeinchirurgie	Naturkautschuklatex. Innenschicht mit HydraSoft® zur Befeuchtung der Haut.	0,220 mm	Weiß
Gammex® PF HyGrip™	353161-8	Orthopädische Chirurgie, Traumachirurgie Herz-Lungen-Chirurgie	Naturkautschuklatex	0,220 mm	Weiß (durchscheinend)
Gammex® PF Underglove	351981-8	Doppelbehandschuhung bei einem Risiko des Hautkontakts mit durch Blut übertragbaren Pathogenen.	Naturkautschuklatex. Innenschicht mit HydraSoft® zur Befeuchtung der Haut.	0,215 mm	Grün
Gammex® PF Micro-Thin®	352901-8	Mikrochirurgie	Naturkautschuklatex	0,185 mm	Hellbraun
Gammex® PF Sensitive™	353191-8	Mikrochirurgie	Naturkautschuklatex	0,170 mm	Hellbraun
Gammex® PF IsoDerm®	353081-8	Allgemeinchirurgie	Synthetiklatex (Polyisopren). Frei von Latexproteinen , kein Allergierisiko des Typs I	0,230 mm	Hellgrün
Gammex® PF DermaPrene®	353201-8	Allgemeinchirurgie	Neopren. Frei von Latexproteinen , kein Allergierisiko des Typs I. Frei von Vulkanisationsbeschleunigern , minimiertes Allergierisiko des Typs IV	0,185 mm	Grün
Gammex® PF XP™	353111-8	PSA-Handschuh für die Handhabung von Zytostatika. KEIN OP-Handschuh.	Naturkautschuklatex	0,260 mm	Blau

Weitere Daten enthält das Produktdatenblatt des jeweiligen Handschuhs

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung der Ansell-Produkte für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl des Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.



Ansell

Ansell Limited ist ein weltweiter Marktführer auf dem Gebiet von Schutzprodukten. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 11.000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine führende Position sowohl im Markt für Kondome als auch in den Märkten für Handschuhe aus Naturkautschuk und synthetischem Polymer. Ansell konzentriert sich auf drei Geschäftsbereiche: Occupational Healthcare (Handschutzprodukte für die Industrie), Professional Healthcare (Operations- und Untersuchungshandschuhe für das Gesundheitswesen) und Consumer Healthcare (Kondome und Haushaltshandschuhe für Verbrauchermärkte). Informationen über Ansell und seine Produkte finden Sie auf unserer Website unter <http://www.ansell.eu>

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

Ansell GmbH
Stadtquartier Riem Arcaden Lehrer-Wirth-Str. 2 D-81829 München, Deutschland
Telefon : +49-(0)89-45118-0 Fax : +49-(0)89-45118-140
<http://www.ansell.eu> E-Mail : infodeutschland@eu.ansell.com

Ansell