mulimed - otoscillo®
professional

Einmaldüsen – Handling

Für jeden Patienten eine neue, saubere Einmaldüse ist gegenüber der Desinfektion wirtschaftlicher, **preisgünstiger**, hygienisch sicherer hinsichtlich Infektionsschutz und umweltfreundlicher.


Aufstecken



Immer ! am schwarzen Knie des Handgriffaufsatzes gegenhalten, nicht am Handgriff ! Aufsatz muß gut am farbigen Ring drehbar sein. Bei Schwergängigkeit Aufsatz vom Handgriff abziehen und Aufsteck-Konus an der Verdickung mit Vaseline fetten.




Einmaldüse bis zum Anschlag einstecken. Arretiert automatisch.

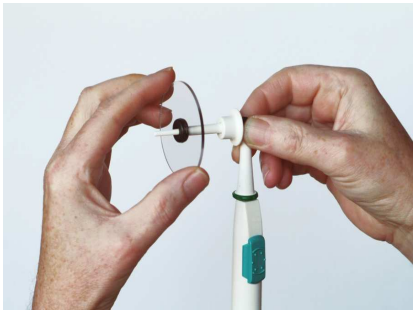

Spritzschutzteller bis Anschlag am Lösering aufschieben. Bei Schwergängigkeit Durchführungstülle mit Vaseline fetten. Nicht ohne Spritzschutzplatte arbeiten!

Abziehen

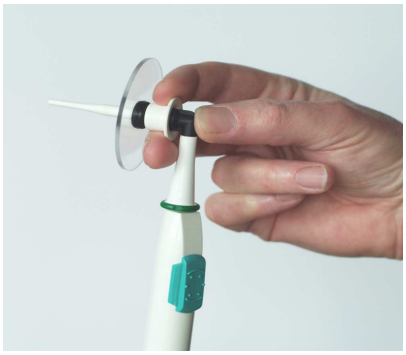

Lösering zurückziehen. Spritzschutzteller samt Einmaldüse abziehen. Düse am sauberen Ende fassen, abziehen und entsorgen. Spritzschutzteller kann mit heißem Wasser gereinigt werden.

mulimed - otoscillo®
professional

Einmaldüsen 100 Stück
Art.- Nr. 60820

Spritzschutzteller für Einmaldüsen
Art.- Nr. 60840

Handgriffaufsatz für Einmaldüsen
Integrierte, automatische Rücklaufsperre im Aufsatz
Art.- Nr. 60860

© mulimed-otoscillo® 2012